


Перейти в магазин Эль-Дент и заказать:

**acrytemp**



## **BRILLIANT CHARME**

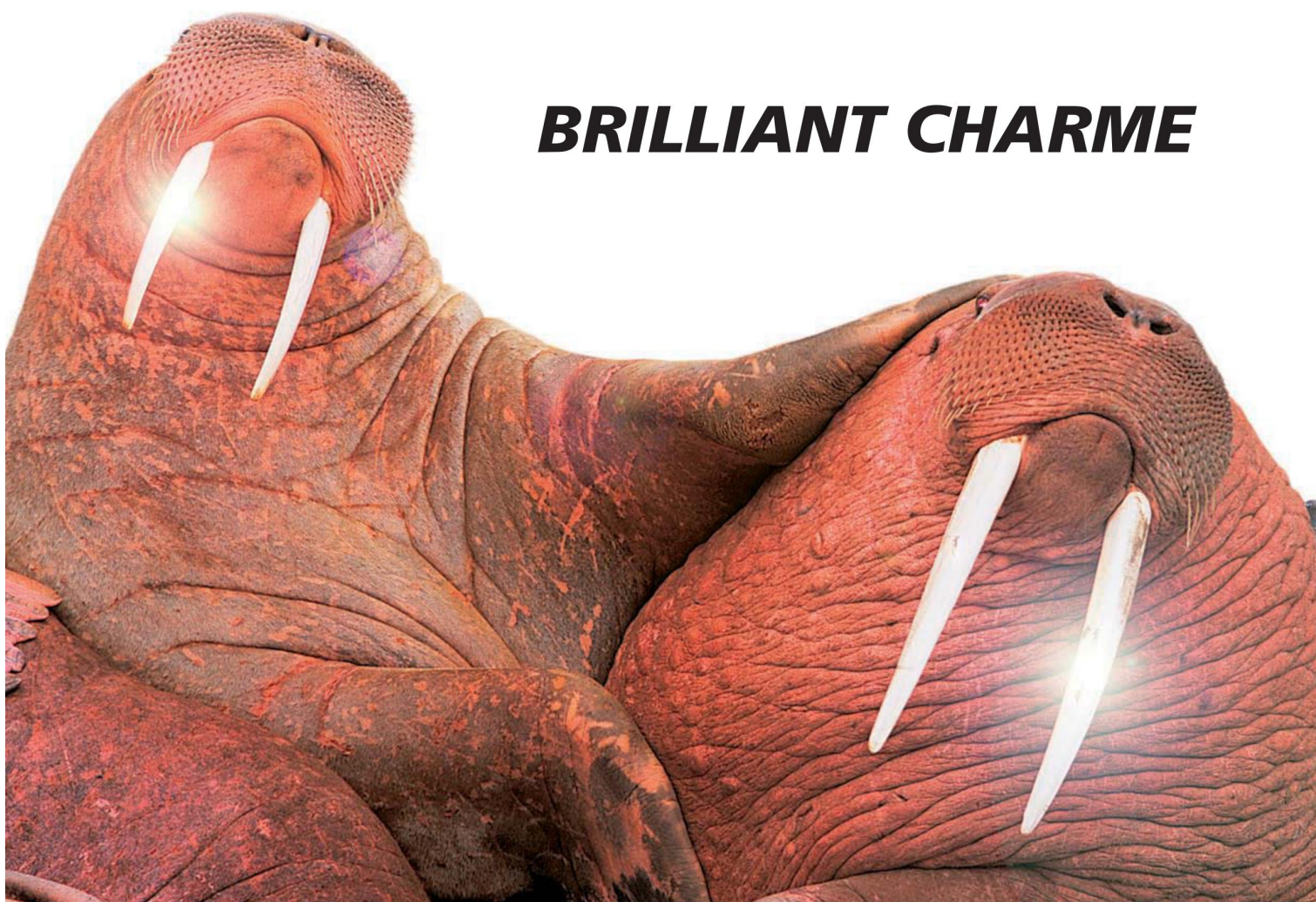

**Clinical**

Temporary C&B Composite

**Zhermack®**

CLINICAL



# acrytemp

*Блестящая естественность и великоле*

## КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

**ZHERMACK** представляет самополимеризующую пластмассу для **быстрого создания непосредственно в клинике** временных коронок и мостов в несъемном протезировании.

## УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Защита** культи зуба
- Соблюдение **зубно-пародонтального** соотношения
- **Сохранение** положения зубов
- Высокая **прочность**
- **Естественная эстетика** законченного временного элемента
- **Идеальное** воспроизведение краев
- Создание **компактных и ровных поверхностей** уменьшающих риск появления налета
- **Низкая температура реакции помогает избежать раздражения пульпы**



2 Переустановка оттиска на культе



4 Финишная обработка временного элемента из ACRYTEMP

**пная эстетика!**



1  
Нанесение ACRYTEMP на внутреннюю поверхность оттиска препарированной культи



3  
Удаление временного элемента из оттиска после застывания



5  
Окончательная версия работы



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Легкость полировки**
- **Цвета A1, A2, A3, A 3,5, B1, B3 подходят для любых клинических случаев**
- Система авто-смешивания в картридже 50 мл (4:1) для **оптимальной дозировки и экономии времени**
- **Оптимальное время обработки (1 мин)**
- **Быстрое время схватывания (5 мин)**

# acrytemp



GPLCOMMUNICATION.COM



## Упаковка

C700201 ACRYTEMP A1	1 картридж 50 мл + 15 смесительных наконечников 4:1
C700200 ACRYTEMP A2	1 картридж 50 мл + 15 смесительных наконечников 4:1
C700215 ACRYTEMP A3	1 картридж 50 мл + 15 смесительных наконечников 4:1
C700205 ACRYTEMP A3,5	1 картридж 50 мл + 15 смесительных наконечников 4:1
C700211 ACRYTEMP B1	1 картридж 50 мл + 15 смесительных наконечников 4:1
C700210 ACRYTEMP B3	1 картридж 50 мл + 15 смесительных наконечников 4:1
C700220 ACRYTEMP kit	1 Acrytemp B3 + 1 Acrytemp A2 + 1 Dispenser D2 (4:1) + 30 смесительных наконечников 4:1

## Аксессуары

C700230	1 диспенсер D2 (4:1)
U100210	1 зубчатая рейка для диспенсера D2 (4:1)
C700240	Упаковка 45 смесительных наконечников (4:1)

Branch  
**Zhermack GmbH Deutschland**  
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl  
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0  
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11  
info@zhermack.de  
www.zhermack.com

Branch  
**Zhermapol**  
ul. Augustówka 14  
02 - 981 Warszawa - Polska  
Tel. +48 - 22 858 82 72 - 858 73 41  
Fax +48 - 22 642 07 14  
zhermapol@zhermapol.pl  
www.zhermack.com

Branch  
**Zhermack Inc.**  
151 Industrial Way East Bldg B  
Eatontown, NJ 07724  
Phone +1 - 732 389 8540  
Fax +1 - 732 389 8543  
info.usa@zhermack.com  
www.zhermack.com

Representative Office  
**Zhermack UK and Ireland**  
21 Balmoral Road  
Melton Mowbray - Leics.  
LE13 1JN  
Tel. +44 - (0)7870 690811  
uk@zhermack.com  
www.zhermack.com

Representative Office  
**Zhermack Russia**  
5/2 Marshala Vasilevskogo St.  
123098 Moscow - Russia  
Tel. +7 - 0916 9301191  
info.russia@zhermack.com  
www.zhermack.com

Эль-Дент  
www.el-dent.ru  
★★★★★

**Zhermack®**  
BEYOND INNOVATION

