

ПОЛИРЫ ДЛЯ КОМПОЗИТОВ

 [Перейти в магазин Эль-Дент и заказать](#) 

ОПТИ1СТЕП™

Opti1Step™ – это одноэтапная полировочная система для финишной обработки до зеркального блеска всех видов композитных реставраций.


Особенности и преимущества Opti1Step™

- Придание сухого блеска поверхности.
- Удаление царапин с поверхности композитных реставраций.
- Уменьшение шероховатости поверхности и предотвращение скопления микроорганизмов: достижение уровня шероховатости поверхности – 0,18 нм (критичный для скопления микроорганизмов уровень шероховатости поверхности – 0,2 нм).
- Экономия времени и гарантия достижения превосходного результата, сравнимого с результатом использования многоэтапных систем.
- Контроль абразивности и возможность ее изменения в зависимости от нажатия на инструмент.
- Легкая полировка труднодоступных мест различными формами щеточек – пламя, чашечка и диск.
- Длительное сохранение рабочих свойств благодаря прочному позолоченному дискодержателю и уникальной абразивной матрице.
- Возможность многократного использования (до 20 раз, в зависимости от интенсивности использования) благодаря автоклавному (при температуре до 134 °С в течение 3 мин.).
- Использование как с водяным охлаждением (до 20 000 об/мин), так и без него (до 5 000 об/мин).



OptiShine™

2514

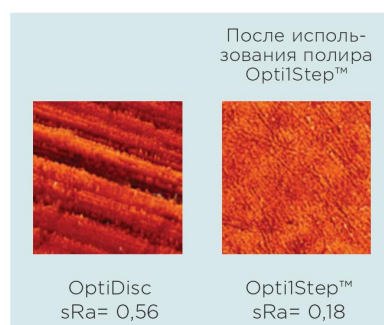

Opti1Step™ – набор ассорти (Assorted Kit) 8000

12 полиров для композитов – пламя (4 шт.), чашечка (4 шт.), диск (4 шт.)

Opti1Step™ – пламя 8001

12 полиров для композитов – пламя

Opti1Step™ – чашечка 8002

12 полиров для композитов – чашечка

Opti1Step™ – диск 8003

12 полиров для композитов – диск

