


 **Перейти в магазин Эль-Дент и заказать:** 

Лютинговый цемент в удобной
упаковке «кликер»

3M ESPE

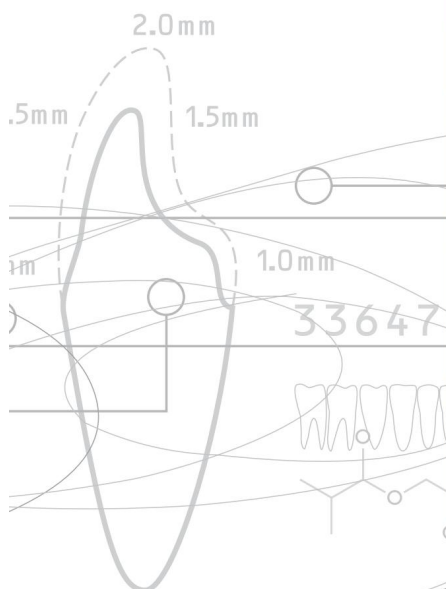

RelyX™

Luting 2

Лютинговый цемент в удобной упаковке «кликер»


Цемент для фиксации:

- металлических коронок, вкладок и накладок (в том числе коронок из нержавеющей стали);
- металлических облицовочной коронок и мостов;
- высокопрочных керамических непрямых реставраций на основе каркасов из оксида алюминия и оксида циркония;
- эндодонтических штифтов;
- ортодонтических конструкций

RelyX™ Luting 2 упрощает этап фиксации

Просто активировать, просто применять


Лютинговый цемент RelyX Luting 2 - это удобство в работе и прекрасный клинический результат. Материал является модифицированным стеклоиономерным цементом, который выпускается в форме паста/паста и удобно извлекается из упаковки «кликер». Цемент легко дозировать, смешивать и очищать, он полностью оптимизирован согласно требованиям врачей-стоматологов.

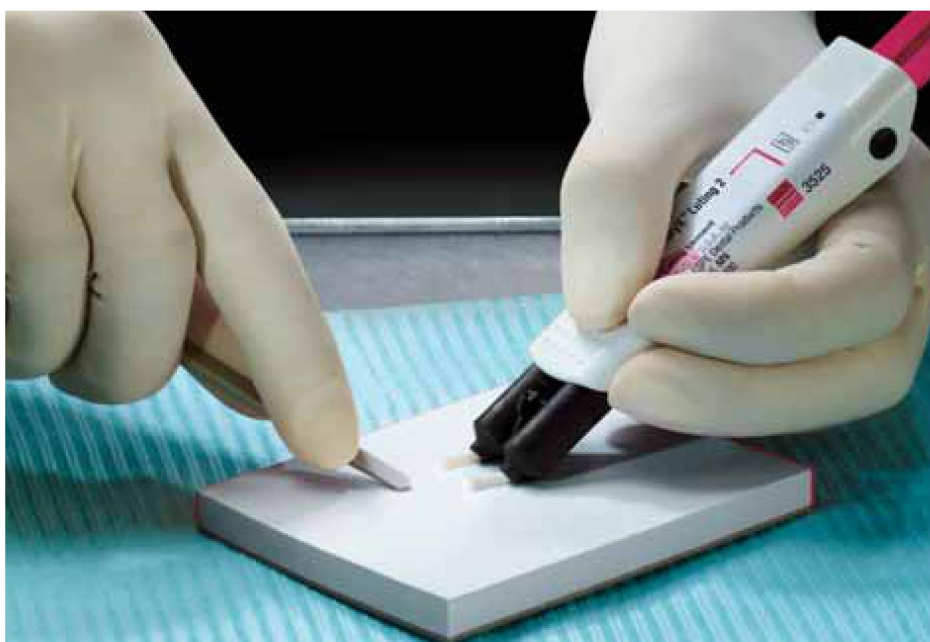

Удобная форма упаковки «кликер», дозировка 1:1, простое смешивание

Преимущества и выгоды нового цемента

Характеристика RelyX™ Luting 2	Преимущества RelyX™ Luting 2	Эффект и выгода для врача RelyX™ Luting 2
Наиболее современное поколение модифицированных стеклоиономерных цемента	Высокая степень адгезии	Великолепные адгезивные свойства к различным реставрационным материалам и тканям зуба, что сокращает время, затраченного на фиксацию, облегчает работу врача
	Продолжительное выделение фтора	Препятствует образованию вторичного кариеса - освобождает доктора от переживаний
	Создает тончайшую пленку	Позволяет достичь максимальной точности в непрямых реставрациях
	Минимальный риск постоперативной чувствительности	Пациент чувствует себя комфортно, спокойно и уверенно
	Низкая растворимость и прекрасное краевое прилегание	Долговечность и сохранность реставрации
	Простота очищения излишков	Значительное сокращение рабочего времени доктора
	Не имеет вкуса и запаха	Приятен пациенту
	Может быть использован для всех видов фиксации	Универсальность обеспечивает удобство для доктора и не ставит перед проблемой выбора материала в каждом случае
	Рентгеноконтрастность	Виден на рентгеновском снимке

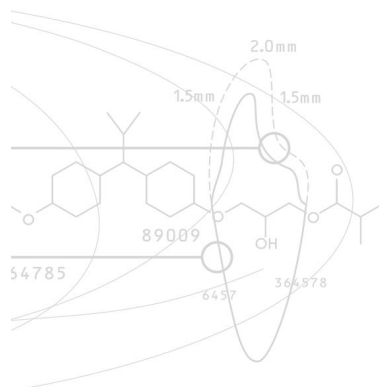


RelyX™ Luting 2 – преимущество в достижении клинического успеха

Усовершенствованная формула модифицированного стеклоиономерного цемента RelyX™ Luting 2 обеспечивает клинический успех. Характеристики материала значительно улучшены по сравнению с обычными цементами. Форма выпуска паста/паста обладает значительным преимуществом по сравнению с другими лютиновыми цементами в форме порошок/жидкость.

Высокая степень адгезии

RelyX™ Luting 2 обеспечивает высокую степень адгезии к различным реставрационным материалам, а также - к тканям дентина и эмали.

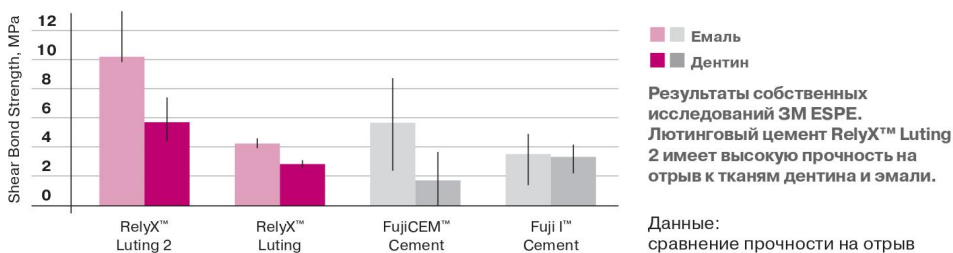

Цемент для фиксации:

- металлических коронок, вкладок и накладок (в том числе коронок из нержавеющей стали);
- металлических с облицовкой коронок и мостов;
- высокопрочных керамических не прямых реставраций на основе каркасов из оксида алюминия и оксида циркония;
- эндодонтических штифтов;
- ортодонтических конструкций

	Преимущества RelyX™ Luting 2 в форме паста/паста	Эффект и выгода для врача RelyX™ Luting 2 в форме паста/паста
Упаковка «кликер»	Простота использования и гигиеничность	Цемент готов к использованию, что значительно экономит время
	Постоянная консистенция	Постоянство и предсказуемость результата, соответственно уверенность врача в своей работе
	Материала в кликере достаточно для фиксации 40 единиц коронок. В зависимости от величины реставрации доктор имеет возможность выдавливать из кликера необходимое в каждом отдельном случае количество материала.	Экономичен, великолепное сочетание качества, количества и цены
	Специальная шкала, показывающая количество цемента в картридже	Позволяет врачу визуально контролировать использование материала
Форма паста/паста	Простое смешивание	Значительное сокращение временных затрат
	Точная дозировка	Экономичность, простота в использовании



Исходная ситуация: старая реставрация из амальгамы



Зуб отпрепарирован под коронку



Простое извлечение и смешивание лютинового цемента RelyX™ Luting 2



Простое внесение RelyX™ Luting 2 в коронку




Установка коронки и очищение излишков



Окончательный вид реставрации

Реставрация выполнена Доктором Радз (Dr. Radz)

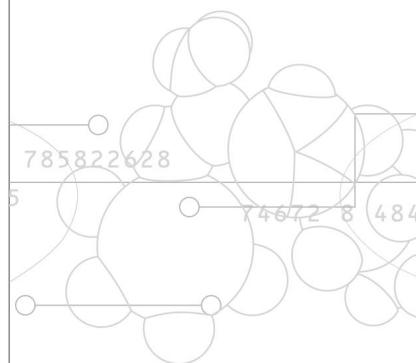



Артикул Комплектация

3525A Набор RelyX™ Luting 2

2 «кликера» RelyX™ Luting 2 (по 11 г)
1 блок для замешивания, инструкция по использованию,
иллюстрированная техническая карта

3525ТКА Пробный набор RelyX™ Luting 2

1 «кликер» RelyX™ Luting 2 (11 г)
аксессуары

