

Ваша практика – источник нашего вдохновения.™

 **Перейти в магазин Эль-Дент и заказать:** 

**Maxcem Elite** | Проще простого.



## Maxcem Elite

## Мы установили новый стандарт.



Maxcem Elite является самопротравливающим, самоадгезивным композитным цементом для не прямых реставраций, с увеличенной силой адгезии и непревзойденной простотой использования: не требуется ручного замешивания и хранения в холодильнике, излишки легко удаляются. Для большего удобства имеются интра-оральные насадки и насадки для внесения материала в канал, для работы в труднодоступных областях.

### Проблематика:

Адгезивные системы очень чувствительны к точному соблюдению техники применения, что является ежедневным вызовом и проблемой для врача. Maxcem Elite позволит Вам пропустить этот этап работы, обеспечивая удобство и великолепный результат.

### Решение:

В составе Maxcem Elite использован тот же адгезив, что и в знаменитом семействе OptiBond от Kerr. Оптимизированная матрица и наполнитель увеличивают устойчивость к влаге, что позволяет добиться более высокой адгезии и возможности немедленной полимеризации светом для большей стабильности. Тиксотропные свойства Maxcem Elite облегчают нанесение материала и простоту удаления излишков. Запатентованная гедох-иницирующая система обеспечивает уникальную цветостабильность, по сравнению с аминокс-иницирующими системами, для еще более эстетичных реставраций.

### Характеристики:

**Сила адгезии 22-25 МПа.** Превосходная адгезия без применения адгезивной системы.

**Простота использования.** Не требуется ручного замешивания и хранения в холодильнике, излишки легко удаляются.

**Совместимость с любыми поверхностями.** Дентин, эмаль, безметалловая и металлокерамика, блоки CAD/CAM.

**Высоко-эффективный механизм полимеризации в темноте.** Полная полимеризация даже в отсутствие света.

## Информация для заказа

### 34055 - Maxcem Elite Standard Kit

Состав: 5 шприцев по 5 г (2хпрозрачного оттенка, белый, белый опакный, желтый), 30 смесительных насадок стандартных, 20 насадок с широким наконечником, 10 интра-оральных насадок, 10 насадок для внесения материала в канал, инструкция.

### 34056 - Maxcem Elite Value Kit

Состав: 2 шприца по 5 г прозрачного оттенка Maxcem Elite, 1 шприц для автоматического смешивания 11.7 г TempBond NE, 10 смесительных насадок стандартных, 10 насадок с широким наконечником, 10 интра-оральных насадок, 10 насадок для шприца TempBond NE, инструкция.

### 34057 - Maxcem Elite Mini Kit

Состав: 1 шприц 5 г прозрачного оттенка, 5 смесительных насадок стандартных, 5 насадок с широким наконечником, 5 интра-оральных насадок, инструкция.

### Дополнительные упаковки Maxcem Elite:

Состав: 2 шприца по 5 г, 10 смесительных насадок стандартных, 10 насадок с широким наконечником, инструкция.

34058 - прозрачный

34059 - белый

34060 - белый опакный

34061 - желтый

34062 - коричневый

### Аксессуары


34074 - 50 смесительных насадок стандартных

34075 - 10 интра-оральных смесительных насадок

34076 - 10 насадок для внесения материала в канал




### Сила адгезии (МПа) к дентину через 24 часа

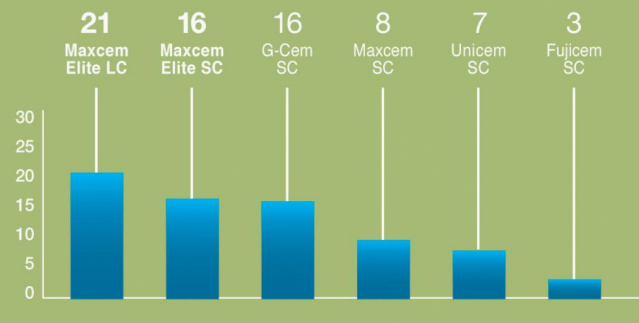

24-часовой тест. Информация предоставлена Dr. Carlos Muñoz, SUNY (Буффало). Более подробная информация – по запросу.

### Сила адгезии (МПа) Maxcem Elite к различным поверхностям (самоотверждение)

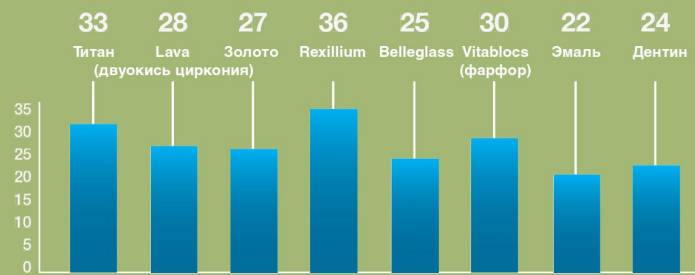

24-часовой тест. Внутри-корпоративное исследование. Более подробная информация – по запросу.

Ваша практика – источник нашего вдохновения