

## SOFTCLAMP™


 [Перейти в магазин ЭльДент и заказать:](#) 

SoftClamp™ – это «мягкий» универсальный кламмер коффердама. Эффективность кламмера зависит от его способности прочно фиксироваться на зубе, предотвращая тем самым соскальзывание коффердама. Однако использование стандартных металлических кламмеров зачастую связано с риском травмирования тканей десны и зуба из-за слишком сильного сжатия и острых краев.

Благодаря уникальному дизайну SoftClamp™ надежно фиксируется на зубе, при этом не оказывая сильного давления. Сориентированные специальным образом крылья SoftClamp™ в сочетании с абразивным покрытием обеспечивают распределение силы сжатия, минимизируя риск ротации, травмирования мягких тканей и дискомфорта пациента.

### Особенности и преимущества SoftClamp™

- Надежная фиксация и снижение риска ротации благодаря уникальному дизайну с абразивным покрытием челюстей.
- Безопасность и минимум риска травмирования тканей десны и зуба благодаря отсутствию острых краев и распределению силы сжатия.
- Универсальность и надежная фиксация на молярах любой формы и размера.
- Совместимость с любыми щипцами.
- Успешное применение при эндодонтическом лечении с микроскопом благодаря отсутствию бликов.
- Отсутствие пластиковых аналогов (кляммеры других производителей металлические).
- Рентгеноконтрастный влагонепроницаемый полимер медицинского назначения.
- Нейтральный бежевый цвет, не отражающий свет во время работы.
- Возможность многократного использования рамок благодаря автоклавированию (в течение 3 мин. при температуре 134 °С).

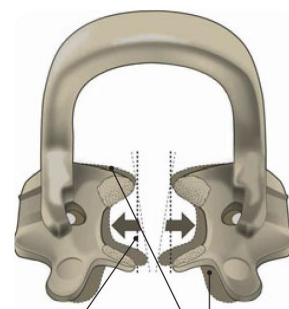

Кламмер в закрытом положении

Абразивное покрытие уменьшает риск ротации и травмирования



Клиническое использование OptiDam™ и SoftClamp™

SoftClamp™

5250

5 универсальных кламмеров для жевательной группы зубов