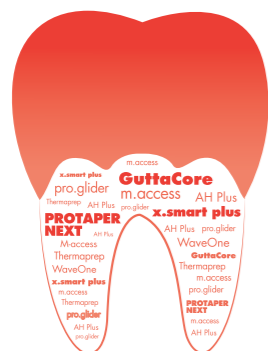


## ЭНДОДОНТИЯ



## РЕСТАВРАЦИЯ



## ПРОФИЛАКТИКА



### DENTSPLY. К лучшей стоматологии.

В компании DENTSPLY мы каждый день занимаемся инновационными разработками во всех сферах стоматологии для того, чтобы обеспечить докторов лучшими комплексными решениями для ежедневной практики. Ориентируясь на самые высокие стандарты качества, DENTSPLY стремится сделать работу стоматолога максимально эффективной, не забывая при этом о пациентах.

# DENTSPLY

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ DENTSPLY™

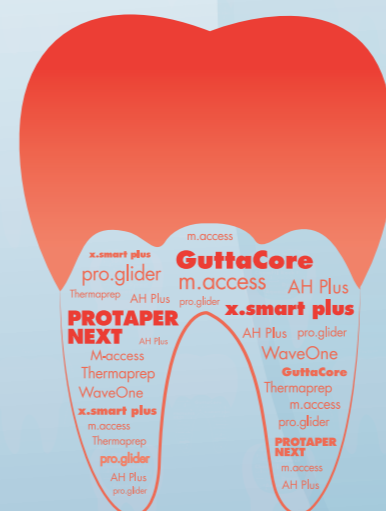
# DENTSPLY КАТАЛОГ

Каталог продукции компании DENTSPLY™

## РЕСТАВРАЦИЯ



## ЭНДОДОНТИЯ




## ПРОФИЛАКТИКА



# ЭТАЛОН РЕСТАВРАЦИИ КЛАССА II

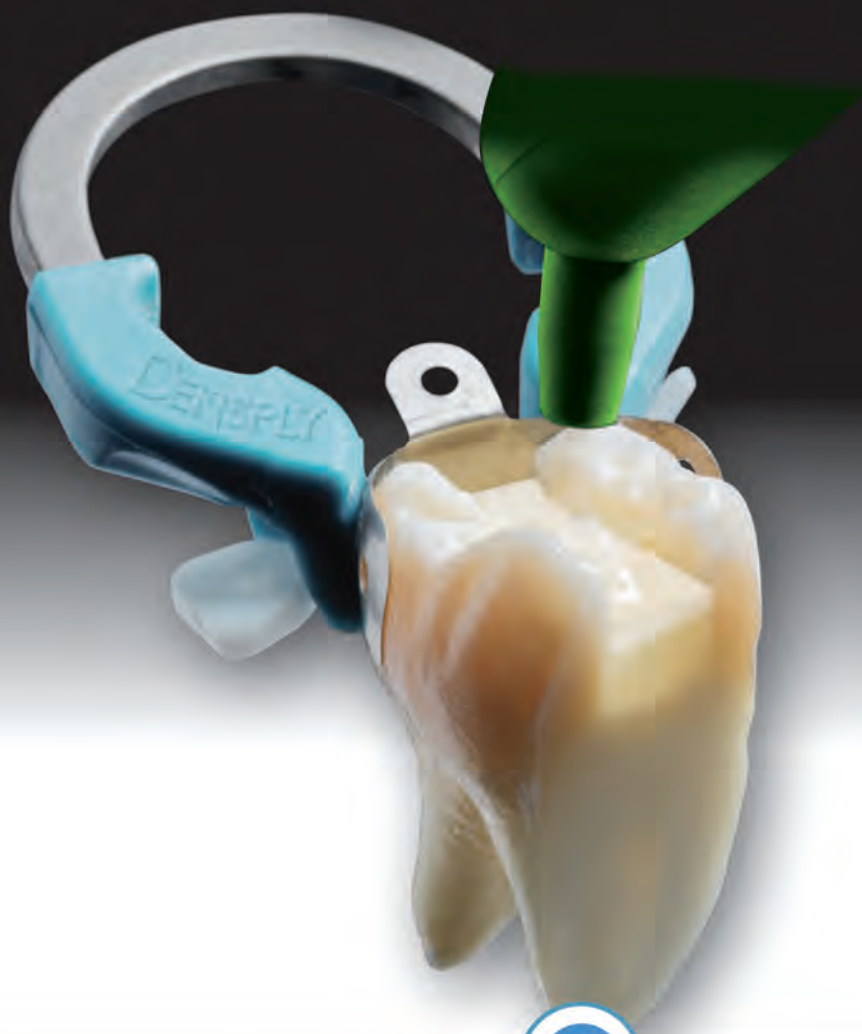НАДЕЖНО. ПРОСТО. БЫСТРО.



Система  
секционных матриц

**Palodent<sup>Plus</sup>**  
Sectional Matrix System

Предсказуемый  
контактный пункт

Рациональный заменитель  
дентина

**SDR<sup>®</sup>**  
Smart Dentin Replacement

Сниженный  
полимеризационный стресс

Универсальный  
нанокерамический композит

**ceram<sup>•</sup>x<sup>+</sup> duo<sup>+</sup>**  
nano ceramic restorative

Высокоэстетичная  
и долговечная реставрация

К лучшей стоматологии

**DENTSPLY**

[www.dentsplycis.com](http://www.dentsplycis.com)



---

# DENTSPLY

---

В 2014 году компания DENTSPLY отметила 115 лет со дня своего основания. В 1899 году доктора Jacob Frick Franz, John Sheppard и Dean Osborne встретились в офисе Lewis Fawcett, и заключили соглашение сроком на 50 лет о создании новой компании — The Dentists' Supply Company с начальным капиталом \$10,000.

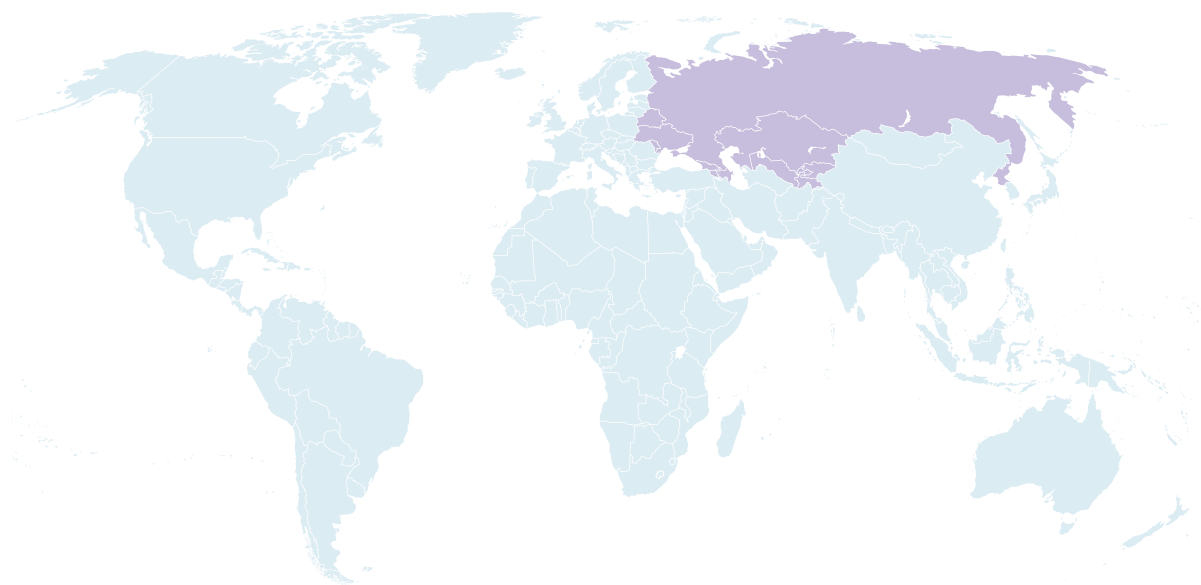
Спустя 115 лет уровень продаж компании DENTSPLY превышает \$2 миллиарда, она производит и продаёт продукцию в 120 странах мира на шести континентах, в компании работает более 9000 сотрудников.

Благодаря фокусу на качестве, инновациях и первоклассном сервисе, а также приобретению других крупных компаний стоматологической индустрии, DENTSPLY является одним из признанных лидеров рынка, предлагая комплексные инновационные решения для всех этапов лечения в стоматологической практике: профилактике, эндодонии, реставрации и ортопедии.

---









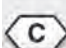
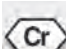







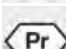
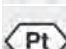





# DENTSPLY в России и СНГ

Обратитесь в представительство DENTSPLY чтобы получить более подробную информацию о продукции.



Официальные представительства DENTSPLY	
Россия	Проспект мира, 6 Москва 129090 Россия Тел.: +7 495 9882808
Украина	ул. Механизаторов, 2 Киев, 03035 Украина Тел.: +38 044 5201323
Беларусь	ул. Короля, 51 Помещение 13, офис 40 Минск, 220004 Беларусь Тел.: +375 17 2000631
Казахстан Азербайджан Грузия Молдова Кыргызстан Узбекистан Армения Таджикистан	ул. Достик, 38 КДС Бизнес-центр 2-ой этаж, офис 11 Алма-Аты, 050010 Казахстан Тел.: +7 727 3401135

### Используемые символы

	См. инструкцию по применению
	Стерильная продукция
	Может стерилизоваться при любой температуре
	Нельзя стерилизовать
	Одноразового использования
	Вскрытые упаковки обратно не принимаются
	Серебро
	Алюминий
	Карбид
	Хром
	Углеродистая сталь
	Алмаз
	Гуттаперча
	Минеральный триоксид
	Никель
	Никель-титан
	Пластик
	Бумага
	Платина
	Силикон
	Сталь
	Титан
	Карбид вольфрама
	Стекловолокно



### Кончик

	FG
	Не режущий
	Режущий
	ProTaper
	Fingerspreader
	Tapfingerspreader

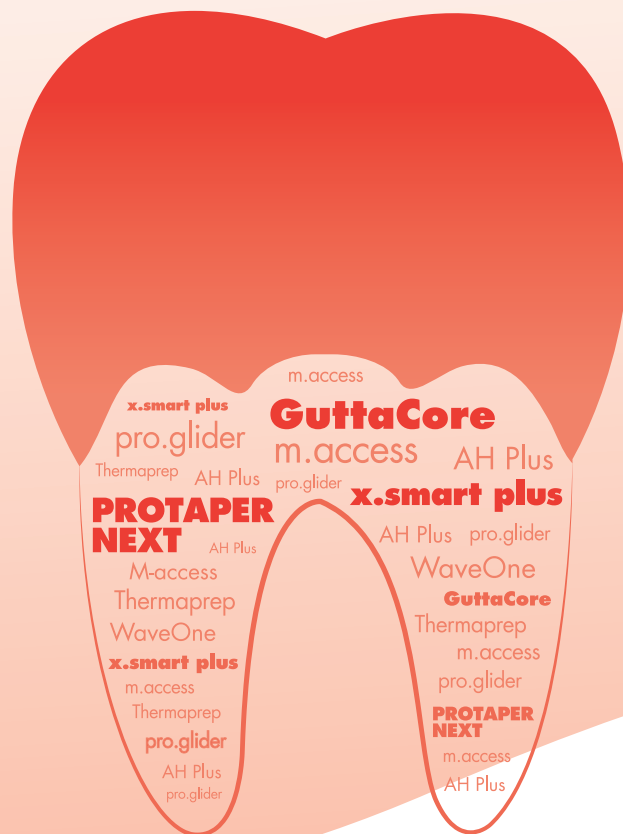
### Сечение

	Круг
	Пятиугольник
	EndoZ
	Gates
	Круг
	Квадрат
	Половина квадрата
	Половина квадрата
	Треугольник
	ProTaper
	Спираль
	Конический треугольник
	Круг 2
	Термофил
	Верифер


### Форма хвостовика

	Profile
	ProTaper


# ЭНДОДОНТИЯ



## ЭНДОДОНТИЯ

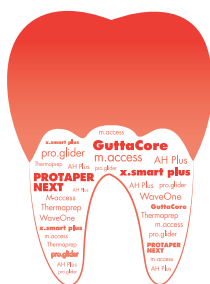

## РЕСТАВРАЦИЯ

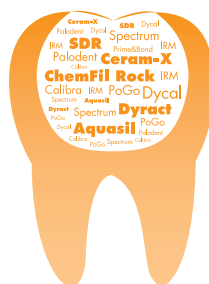

## ПРОФИЛАКТИКА



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ СТОМАТОЛОГИИ

## Бор Cavity



Карбидный бор 28 мм



Вид	006	008	010	012	014	016
Упаковка – 6 шт. одного вида	6 шт. E020524100610	6 шт. E020524100810	6 шт. E020524101010	6 шт. E020524101210	6 шт. E020524101410	6 шт. E020524101610
Ассортиментная упаковка – 1 шт. каждого вида	1 шт. каждого вида E020524190000					

## Бор Gates Glidden



RA 28 мм



Вид	1 Ø0.5 мм	2 Ø0.7 мм	3 Ø0.9 мм	4 Ø1.1 мм	5 Ø1.3 мм	6 Ø1.5 мм
Упаковка – 6 шт. одного вида	6 шт. A000823000112	6 шт. A000823000212	6 шт. A000823000312	6 шт. A000823000412	6 шт. A000823000512	6 шт. A000823000612
Ассортиментная упаковка – 1 шт. каждого вида	1 шт. каждого вида A000823090112					

RA 32 мм

Тип	1 Ø0.5 мм	2 Ø0.7 мм	3 Ø0.9 мм	4 Ø1.1 мм	5 Ø1.3 мм	6 Ø1.5 мм
Упаковка – 6 шт. одного вида	6 шт. A000824000112	6 шт. A000824000212	6 шт. A000824000312	6 шт. A000824000412	6 шт. A000824000512	6 шт. A000824000612
Ассортиментная упаковка – 1 шт. каждого вида	1 шт. каждого вида A000824090112					

Доступны другие размеры.

## Бор Largo



RA 28 мм



Вид	1 Ø0.5 мм	2 Ø0.7 мм	3 Ø0.9 мм	4 Ø1.1 мм	5 Ø1.3 мм	6 Ø1.5 мм
Упаковка – 6 шт. одного вида	6 шт. A000923000112	6 шт. A000923000212	6 шт. A000923000312	6 шт. A000923000412	6 шт. A000923000512	6 шт. A000923000612
Ассортиментная упаковка – 1 шт. каждого вида	1 шт. каждого вида A000923090112					

RA 32 мм

Вид	1 Ø0.5 мм	2 Ø0.7 мм	3 Ø0.9 мм	4 Ø1.1 мм	5 Ø1.3 мм	6 Ø1.5 мм
Упаковка – 6 шт. одного вида	6 шт. A000924000112	6 шт. A000924000212	6 шт. A000924000312	6 шт. A000924000412	6 шт. A000924000512	6 шт. A000924000612
Ассортиментная упаковка – 1 шт. каждого вида	1 шт. каждого вида A000924090112					

## UNICLIP Пенетрационный дрель



В продаже в упаковке из 6 шт.



C02122000800	Special Penetration Drill 008	●
C021220010800	Special Penetration Drill 108	○
C021220011000	Special Penetration Drill 110	●
C021220020800	Special Penetration Drill 208	●
C021220021000	Special Penetration Drill 210	●
C021220030800	Special Penetration Drill 308	●
C021220031000	Special Penetration Drill 310	●

## UNICLIP Калибровочный дрель



В продаже в упаковке из 6 шт.



C02132000800	Special Calibrating Drill 008	●
C021320010800	Special Calibrating Drill 108	○
C021320011000	Special Calibrating Drill 110	●
C021320020800	Special Calibrating Drill 208	●
C021320021000	Special Calibrating Drill 210	●
C021320030800	Special Calibrating Drill 308	●
C021320031000	Special Calibrating Drill 310	●

## UNICLIP Штифты

В продаже в упаковке из 100 шт.



C215U00010800	Uniclip Burn Out Plastic Posts 108	○
C215U00011000	Uniclip Burn Out Plastic Posts 110	●
C215U00020800	Uniclip Burn Out Plastic Posts 208	●
C215U00021000	Uniclip Burn Out Plastic Posts 210	●
C215U00030800	Uniclip Burn Out Plastic Posts 308	●
C215U00031000	Uniclip Burn Out Plastic Posts 310	●

## UNICLIP Штифты (наборы)



C226T0000800	Unimetric Set Titanium 0.8 мм
C226T00001000	Unimetric Set Titanium 1 мм
C226U0000800	Uniclip Set 0.8 мм
C226U00001000	Uniclip Set 1 мм

## UNIMETRIC Штифты

В продаже в упаковке из 25 шт.

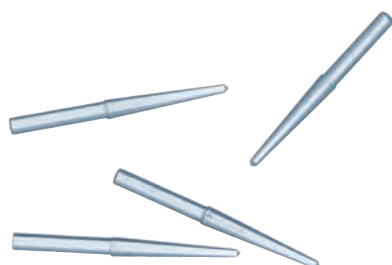


C215TL0010800	Unimetric Titan Root-Post 108L	○
C215TL0011000	Unimetric Titan Root-Post 110L	●
C215TL0020800	Unimetric Titan Root-Post 208L	●
C215TL0021000	Unimetric Titan Root-Post 210L	●
C215TL0030800	Unimetric Titan Root-Post 308L	●
C215TL0031000	Unimetric Titan Root-Post 310L	●
C215TS0000800	Unimetric Titan Root-Post 008S	●
C215TS0010800	Unimetric Titan Root-Post 108S	○
C215TS0011000	Unimetric Titan Root-Post 110S	●
C215TS0020800	Unimetric Titan Root-Post 208S	●
C215TS0021000	Unimetric Titan Root-Post 210S	●
C215TS0030800	Unimetric Titan Root-Post 308S	●
C215TS0031000	Unimetric Titan Root-Post 310S	●

## UNIMETRIC Штифты (наборы)

дрель пенетрационный  
дрель калибровочный  
20 шт. штифтов  
ключ

226AT0011000	Unimetric T. Single Set 110
C226ATL010800	Unimetric T. Single Set 108L
C226ATL011000	Unimetric T. Single Set 110L
C226ATL020800	Unimetric T. Single Set 208L
C226ATL021000	Unimetric T. Single Set 210L
C226ATL030800	Unimetric T. Single Set 308L
C226ATS000800	Unimetric T. Single Set 008S
C226ATS010800	Unimetric T. Single Set 108S
C226ATS011000	Unimetric T. Single Set 110S
C226ATS020800	Unimetric T. Single Set 208S
C226ATS021000	Unimetric T. Single Set 210S
C226ATS030800	Unimetric T. Single Set 308S



## MOOSER Штифты

В продаже в упаковке из 100 шт.



Код	Размер ISO	Упаковка – 100 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка – наборы
C02410000800	08 ●	100	C024300000000
C024100001000	10 ○	100	



## Glyde™

**GLYDE** делает обработку каналов легче,  
чем когда бы-то ни было.

- Устраняет риск повреждения инструментов
- Помогает избавиться от осколков
- Удаляет смазанный слой
- Полностью удаляется при промывке благодаря своей водорастворимой формуле



### Glyde™ Набор шприцов

3 шт. шприцев по 3 мл

A09010000000 Glyde Syringes



### Glyde™ Вводный набор

2 шт. шприцев по 3 мл  
25 шт. наконечников шприцов

A09020000000 Glyde Intro Kit



### Наконечники Glyde™ Syringe

50 шт. наконечников в упаковке.

A09030000000 Glyde Syringe Tips



### Glyde™ Унидозы дозы в упаковке

35 шт. унидоз по 0.5 мл в упаковке.

A09050000000 Glyde unitdose



Стенд для очистки инструментов



Инструменты не входят в комплект.

В продаже поштучно.



A268P0000000	Clean Stand
A268P0000200	Clean Stand – large

Губки для стенда



Упаковка из 25 шт.

A268S0000000	Clean Stand Sponges
A268S0000200	Clean Stand Sponges – large

# Попробуйте силер AH Plus® Jet™!



Подробнее на **стр. 39**



### Контейнер Endo Container Complete

В продаже поштучно.



A020700000000 Endo Container Complete



### Контейнер Endo-Stand

В продаже поштучно.



A265P00000000 Endo-Stand



### Endo M Block

В продаже поштучно.



A018400000000 Endo M Block



### Flexobend

Для предварительного изгиба инструментов.  
В продаже поштучно.



A009600000000 Flexobend

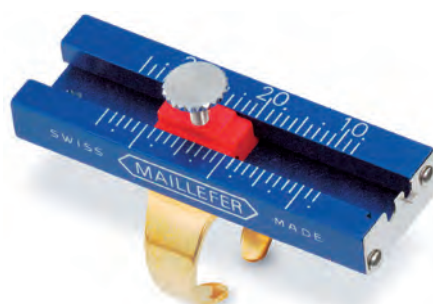


### Твин-блок

Устройство для определения рабочей длины,  
совмещенное со стендом для очистки инструментов.  
В продаже поштучно.



A033800000100 Twin-Block



### Эндометр

Устройство для определения рабочей длины.  
В продаже поштучно.



A017800000000 Endometer

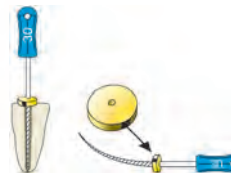


## Контейнер Flexofit

В продаже поштучно.



A02740000000 Flexokit Full



## Силиконовые стопперы

Упаковка из 200 шт.



A019700000100 Silicone Stops Dispenser



## Эндо-блоки

Упаковка из 8 шт.



A017700000200 Endo Training Blocks



## Эндо-блоки S-образной формы

Упаковка из 12 шт.



A177S00000000 Endo Training Bloc S-Shape



## Thermafil® Тренировочный блок

Упаковка из 12 шт.



A017400000100 Thermafil Training Bloc, 0.3, taper .04



## Контейнер для стерилизации

В продаже поштучно.














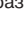
E024800000100	Sterilisable Plastic Box 1 FG
E024800000200	Sterilisable Plastic Box 2 RA
E024800000300	Sterilisable Plastic Box 3 HP
E024800000400	Sterilisable Plastic Box 4 FG/RA/HP
E024800000500	Sterilisable Plastic Box 5 Empty
E024800000600	Sterilisable Plastic Box 6 RA L (long)
E024800000700	Sterilisable Plastic Box 7 (1x RA 1x FG 1x RA-L 1x HP)
E024800000800	Sterilisable Plastic Box 8 Endo

## M-ACCESS™ K-Reamer Files

M-access — это доступные инструменты швейцарского качества. Инструменты из нержавеющей стали эргономичного дизайна, пластмассовые рукоятки имеют цветовую кодировку по ISO. M.access удобны и просты в использовании.

M-ACCESS™ K-Reamer 21 мм. Упаковка из 6 шт.

















Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. — 1 шт. каждого вида
A11MA02100812	008 	6 шт.	A11MA02190012
A11MA02101012	010 	6 шт.	
A11MA02101512	015 	6 шт.	
A11MA02102012	020 	6 шт.	
A11MA02102512	025 	6 шт.	
A11MA02103012	030 	6 шт.	
A11MA02103512	035 	6 шт.	
A11MA02104012	040 	6 шт.	
A11MA02104512	045 	6 шт.	
A11MA02105012	050 	6 шт.	
A11MA02105512	055 	6 шт.	
A11MA02106012	060 	6 шт.	
A11MA02107012	070 	6 шт.	
A11MA02108012	080 	6 шт.	A11MA02190112



Также доступны и другие размеры.

M-ACCESS™ K-Reamer 25 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A11MA02500812	008 	6 шт.	A11MA02590012
A11MA02501012	010 	6 шт.	
A11MA02501512	015 	6 шт.	
A11MA02502012	020 	6 шт.	
A11MA02502512	025 	6 шт.	
A11MA02503012	030 	6 шт.	
A11MA02503512	035 	6 шт.	
A11MA02504012	040 	6 шт.	
A11MA02504512	045 	6 шт.	
A11MA02505012	050 	6 шт.	
A11MA02505512	055 	6 шт.	
A11MA02506012	060 	6 шт.	
A11MA02507012	070 	6 шт.	
A11MA02508012	080 	6 шт.	A11MA02590112

Также доступны и другие размеры.

M-ACCESS™ K-Reamer 31 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A11MA03100812	008 	6 шт.	A11MA03190012
A11MA03101012	010 	6 шт.	
A11MA03101512	015 	6 шт.	
A11MA03102012	020 	6 шт.	
A11MA03102512	025 	6 шт.	
A11MA03103012	030 	6 шт.	
A11MA03103512	035 	6 шт.	
A11MA03104012	040 	6 шт.	
A11MA03104512	045 	6 шт.	
A11MA03105012	050 	6 шт.	
A11MA03105512	055 	6 шт.	
A11MA03106012	060 	6 шт.	
A11MA03107012	070 	6 шт.	
A11MA03108012	080 	6 шт.	A11MA03190112

Также доступны и другие размеры.

## M-ACCESS™ K-Files

M-ACCESS™ K-Files 21 мм. Упаковка из 6 шт.



Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A12MA02100612	006	6 шт.	
A12MA02100812	008	6 шт.	
A12MA02101012	010	6 шт.	
A12MA02101512	015	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040
A12MA02102012	020	6 шт.	
A12MA02102512	025	6 шт.	
A12MA02103012	030	6 шт.	
A12MA02103512	035	6 шт.	
A12MA02104012	040	6 шт.	
A12MA02104512	045	6 шт.	1 шт. 045, 1 шт. 050, 1 шт. 055, 1 шт. 060, 1 шт. 070, 1 шт. 080
A12MA02105012	050	6 шт.	
A12MA02105512	055	6 шт.	
A12MA02106012	060	6 шт.	
A12MA02107012	070	6 шт.	
A12MA02108012	080	6 шт.	



Также доступны и другие размеры.

M-ACCESS™ K-Files 25 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A12MA02500612	006	6 шт.	
A12MA02500812	008	6 шт.	
A12MA02501012	010	6 шт.	
A12MA02501512	015	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040
A12MA02502012	020	6 шт.	
A12MA02502512	025	6 шт.	
A12MA02503012	030	6 шт.	
A12MA02503512	035	6 шт.	
A12MA02504012	040	6 шт.	
A12MA02504512	045	6 шт.	1 шт. 045, 1 шт. 050, 1 шт. 055, 1 шт. 060, 1 шт. 070, 1 шт. 080
A12MA02505012	050	6 шт.	
A12MA02505512	055	6 шт.	
A12MA02506012	060	6 шт.	
A12MA02507012	070	6 шт.	
A12MA02508012	080	6 шт.	

Также доступны и другие размеры.

M-ACCESS™ K-Files 31 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A12MA03100612	006	6 шт.	
A12MA03100812	008	6 шт.	
A12MA03101012	010	6 шт.	
A12MA03101512	015	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040
A12MA03102012	020	6 шт.	
A12MA03102512	025	6 шт.	
A12MA03103012	030	6 шт.	
A12MA03103512	035	6 шт.	
A12MA03104012	040	6 шт.	
A12MA03104512	045	6 шт.	1 шт. 045, 1 шт. 050, 1 шт. 055, 1 шт. 060, 1 шт. 070, 1 шт. 080
A12MA03105012	050	6 шт.	
A12MA03105512	055	6 шт.	
A12MA03106012	060	6 шт.	
A12MA03107012	070	6 шт.	
A12MA03108012	080	6 шт.	

Также доступны и другие размеры.

## M-ACCESS™ Hedstroem Files















M-ACCESS™ Hedstroem 21 мм. Упаковка из 6 шт.



Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида	
A16MA02100812	008 	6 шт.		
A16MA02101012	010 	6 шт.		
A16MA02101512	015 	6 шт.		
A16MA02102012	020 	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040	
A16MA02102512	025 	6 шт.		
A16MA02103012	030 	6 шт.		
A16MA02103512	035 	6 шт.		
A16MA02104012	040 	6 шт.		
A16MA02104512	045 	6 шт.	A16MA02190012	
A16MA02105012	050 	6 шт.		
A16MA02105512	055 	6 шт.		
A16MA02106012	060 	6 шт.		
A16MA02107012	070 	6 шт.		
A16MA02108012	080 	6 шт.		
				1 шт. 045, 1 шт. 050, 1 шт. 055, 1 шт. 060, 1 шт. 070, 1 шт. 080
			A16MA02190112	















Также доступны и другие размеры.

M-ACCESS™ Hedstroem 25 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида	
A16MA02500812	008 	6 шт.		
A16MA02501012	010 	6 шт.		
A16MA02501512	015 	6 шт.		
A16MA02502012	020 	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040	
A16MA02502512	025 	6 шт.		
A16MA02503012	030 	6 шт.		
A16MA02503512	035 	6 шт.		
A16MA02504012	040 	6 шт.		
A16MA02504512	045 	6 шт.	A16MA02590012	
A16MA02505012	050 	6 шт.		
A16MA02505512	055 	6 шт.		
A16MA02506012	060 	6 шт.		
A16MA02507012	070 	6 шт.		
A16MA02508012	080 	6 шт.		
				1 шт. 045, 1 шт. 050, 1 шт. 055, 1 шт. 060, 1 шт. 070, 1 шт. 080
			A16MA02590112	

Также доступны и другие размеры.

M-ACCESS™ Hedstroem 31 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида	
A16MA03100812	008 	6 шт.		
A16MA03101012	010 	6 шт.		
A16MA03101512	015 	6 шт.		
A16MA03102012	020 	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040	
A16MA03102512	025 	6 шт.		
A16MA03103012	030 	6 шт.		
A16MA03103512	035 	6 шт.		
A16MA03104012	040 	6 шт.		
A16MA03104512	045 	6 шт.	A16MA03190012	
A16MA03105012	050 	6 шт.		
A16MA03105512	055 	6 шт.		
A16MA03106012	060 	6 шт.		
A16MA03107012	070 	6 шт.		
A16MA03108012	080 	6 шт.		
				1 шт. 045, 1 шт. 050, 1 шт. 055, 1 шт. 060, 1 шт. 070, 1 шт. 080
			A16MA03190112	

Также доступны и другие размеры.



## К-ФАЙЛЫ Н-ФАЙЛЫ К-РИМЕРЫ

**M.ACCESS** – стальные инструменты из Швейцарии.  
Высокое качество, точный результат.

Размеры по ISO от 008 до 140  
Длина инструментов 21мм, 25мм, 31мм  
Оснащены силиконовым стоппером  
Поставляется в блистерах по 6 инструментов  
Доступны также ассортиментные наборы



**M** • access™  
by Dentsply Maillefer

[www.dentsplycis.com](http://www.dentsplycis.com)



## K-Type Flexofile Golden Mediums®



Гибкие и прочные стальные инструменты

Golden Mediums® 21 мм. Упаковка из 6 шт.



Размер по ISO	12	17	22
Упаковка – 6 шт. одного вида	6 шт. A012I02101200	6 шт. A012I02101700	6 шт. A012I02102200

Golden Mediums® 25 мм. Упаковка из 6 шт.

Размер по ISO	12	17	22
Упаковка – 6 шт. одного вида	6 шт. A012I02501200	6 шт. A012I02501700	6 шт. A012I02502200

Ассортиментная упаковка –  
1 шт. каждого размера:  
12, 17, 22, 27, 32 и 36

A012I02590100

Golden Mediums® 31 мм. Упаковка из 6 шт.

Размер по ISO	12	17	22
Упаковка – 6 шт. одного вида	6 шт. A012I03101200	6 шт. A012I03101700	6 шт. A012I03102200

Доступны в других размерах ISO.

## K-Flexofiles®



Гибкие и прочные стальные инструменты

K-Flexofile® Colorinox® 21 мм. Упаковка из 6 шт.



Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A012C02100812	008 ●	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040 A012C02190012
A012C02101012	010 ●	6 шт.	
A012C02101512	015 ○	6 шт.	
A012C02102012	020 ●	6 шт.	
A012C02102512	025 ●	6 шт.	
A012C02103012	030 ●	6 шт.	
A012C02103512	035 ●	6 шт.	
A012C02104012	040 ●	6 шт.	

K-Flexofile® Colorinox® 25 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A012C02500812	008 ●	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040 A012C02590012
A012C02501012	010 ●	6 шт.	
A012C02501512	015 ○	6 шт.	
A012C02502012	020 ●	6 шт.	
A012C02502512	025 ●	6 шт.	
A012C02503012	030 ●	6 шт.	
A012C02503512	035 ●	6 шт.	
A012C02504012	040 ●	6 шт.	

K-Flexofile® Colorinox® 31 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – по 1 шт. каждого вида
A012C03100800	008 ●	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040 A012C03190000
A012C03101500	015 ○	6 шт.	
A012C03102000	020 ●	6 шт.	
A012C03102500	025 ●	6 шт.	
A012C03103000	030 ●	6 шт.	
A012C03103500	035 ●	6 шт.	
A012C03104000	040 ●	6 шт.	

## C+ Files

Идеальный инструмент для обработки сложных или кальцифицированных каналов.



C+ File Catheterisation 18 мм. Упаковка из 6 шт.



Размер по ISO	006	008	010	015
Упаковка – 6 шт. одного вида	6 шт. A012X01800600	6 шт. A012X01800800	6 шт. A012X01801000	6 шт. A012X01801500
Ассортиментная упаковка – 2 шт. каждого вида		2 шт. A012X01890000	2 шт.	2 шт.

C+ File Catheterisation 21 мм. Упаковка из 6 шт.

Размер по ISO	006	008	010	015
Упаковка – 6 шт. одного вида	6 шт. A012X02100600	6 шт. A012X02100800	6 шт. A012X02101000	6 шт. A012X02101500
Ассортиментная упаковка – 2 шт. каждого вида		2 шт. A012X02190000	2 шт.	2 шт.

C+ File Catheterisation 25 мм. Упаковка из 6 шт.

Размер по ISO	006	008	010	015	020
Упаковка – 6 шт. одного вида	6 шт. A012X02500600	6 шт. A012X02500800	6 шт. A012X02501000	6 шт. A012X02501500	6 шт. A012X02502000
Ассортиментная упаковка – 2 шт. каждого вида		2 шт. A012X02590000	2 шт.	2 шт.	

## Hedstroem Files



Hedstroem File Colorinox® 21 мм. Упаковка из 6 шт.



Hedstroem File Colorinox® 25 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A016D02100812	008 ●	6 шт.	
A016D02101012	010 ●	6 шт.	
A016D02101512	015 ○	6 шт.	
A016D02102012	020 ●	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040
A016D02102512	025 ●	6 шт.	
A016D02103012	030 ●	6 шт.	
A016D02103512	035 ●	6 шт.	A016D02190012
A016D02104012	040 ●	6 шт.	
A016D02104500	045 ○	6 шт.	
A016D02105000	050 ●	6 шт.	1 шт. 045, 1 шт. 050, 1 шт. 055, 1 шт. 060, 1 шт. 070, 1 шт. 080
A016D02105500	055 ●	6 шт.	
A016D02106000	060 ●	6 шт.	
A016D02107000	070 ●	6 шт.	
A016D02108000	080 ●	6 шт.	A016D02190100

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A016D02500812	008 ●	6 шт.	
A016D02501012	010 ●	6 шт.	
A016D02501512	015 ○	6 шт.	
A016D02502012	020 ●	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040
A016D02502512	025 ●	6 шт.	
A016D02503012	030 ●	6 шт.	
A016D02503512	035 ●	6 шт.	
A016D02504012	040 ●	6 шт.	A016D02590012
A016D02504500	045 ○	6 шт.	
A016D02505000	050 ●	6 шт.	1 шт. 045, 1 шт. 050, 1 шт. 055, 1 шт. 060, 1 шт. 070, 1 шт. 080
A016D02505500	055 ●	6 шт.	
A016D02506000	060 ●	6 шт.	
A016D02507000	070 ●	6 шт.	
A016D02508000	080 ●	6 шт.	A016D02590100

Доступны в других размерах ISO.

## Hedstroem Files



Ручной инструмент с режущей гранью

Hedstroem File Colorinox® 28 мм. Упаковка из 6 шт.



Hedstroem File Colorinox® 31 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A016D02800812	008	6 шт.	
A016D02801000	010	6 шт.	
A016D02801500	015	6 шт.	
A016D02802000	020	6 шт.	1 шт. 015,
A016D02802500	025	6 шт.	1 шт. 020,
A016D02803000	030	6 шт.	1 шт. 025,
A016D02803500	035	6 шт.	1 шт. 030,
A016D02804000	040	6 шт.	1 шт. 035,
A016D02804500	045	6 шт.	1 шт. 040
A016D02805000	050	6 шт.	A016D02890000
A016D02805500	055	6 шт.	
A016D02806000	060	6 шт.	1 шт. 045,
A016D02807000	070	6 шт.	1 шт. 050,
A016D02808000	080	6 шт.	1 шт. 055,
			1 шт. 060,
			1 шт. 070,
			1 шт. 080
			A016D02890100

Также доступны и другие размеры.

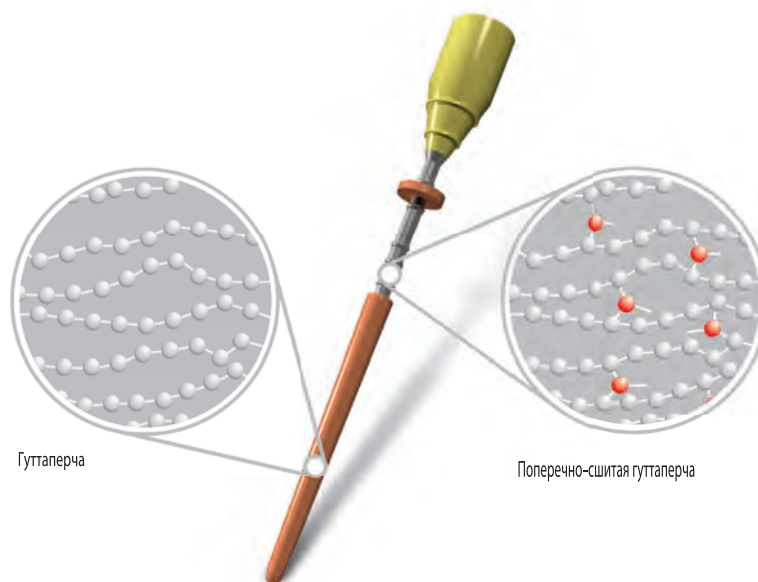
Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A016D03100800	008	6 шт.	
A016D03101000	010	6 шт.	
A016D03101500	015	6 шт.	
A016D03102000	020	6 шт.	1 шт. 015,
A016D03102500	025	6 шт.	1 шт. 020,
A016D03103000	030	6 шт.	1 шт. 025,
A016D03103500	035	6 шт.	1 шт. 030,
A016D03104000	040	6 шт.	1 шт. 035,
A016D03104500	045	6 шт.	1 шт. 040
A016D03105000	050	6 шт.	A016D03190000
A016D03105500	055	6 шт.	
A016D03106000	060	6 шт.	1 шт. 045,
A016D03107000	070	6 шт.	1 шт. 050,
A016D03108000	080	6 шт.	1 шт. 055,
			1 шт. 060,
			1 шт. 070,
			1 шт. 080
			A016D03190100

Также доступны и другие размеры.

Подробнее на стр. 37

# gutta•core™

Обтуратор с поперечно-сшитым гуттаперчевым носителем



- Превосходная 3D обтурация
- Лёгкость в случаях перелечивания
- Простота при подготовке канала под штифт

Регистрационное удостоверение №РЗН.2013.692

**+**  
WE  
KNOW  
ENDO.

**DENTSPLY**  
MAILLEFER

## K-FlexoReamers



Гибкие и прочные стальные инструменты

### K-FlexoReamer Colorinox® 21 мм.

Упаковка из 6 шт.



Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A011C02101500	015 ○	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040  A011C02190000
A011C02102000	020 ●	6 шт.	
A011C02102500	025 ●	6 шт.	
A011C02103000	030 ●	6 шт.	
A011C02103500	035 ●	6 шт.	
A011C02104000	040 ●	6 шт.	

Также доступны и другие размеры.



### K-FlexoReamer Colorinox® 25 мм.

Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A011C02501500	015 ○	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040  A011C02590000
A011C02502000	020 ●	6 шт.	
A011C02502500	025 ●	6 шт.	
A011C02503000	030 ●	6 шт.	
A011C02503500	035 ●	6 шт.	
A011C02504000	040 ●	6 шт.	

Также доступны и другие размеры.

### K-FlexoReamer Colorinox® 31 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Индивидуальная упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A011C03101500	015 ○	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040  A011C03190000
A011C03102000	020 ●	6 шт.	
A011C03102500	025 ●	6 шт.	
A011C03103000	030 ●	6 шт.	
A011C03103500	035 ●	6 шт.	
A011C03104000	040 ●	6 шт.	

Также доступны и другие размеры.

## Senseus™ Flexofiles®

Инструмент с крупной силиконовой ручкой для повышенного контроля обработки канала.

### Senseus™ Flexofile® 21 мм.

Упаковка из 6 шт.



Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A101202100600	006 ●	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040  A101202190000
A101202100800	008 ●	6 шт.	
A101202101000	010 ●	6 шт.	
A101202101500	015 ○	6 шт.	
A101202102000	020 ●	6 шт.	
A101202102500	025 ●	6 шт.	
A101202103000	030 ●	6 шт.	A101202190000
A101202103500	035 ●	6 шт.	
A101202104000	040 ●	6 шт.	

Также доступны и другие размеры.

### Senseus™ Flexofile® 31 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A101203100600	006 ●	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040  A101203190000
A101203100800	008 ●	6 шт.	
A101203101000	010 ●	6 шт.	
A101203101500	015 ○	6 шт.	
A101203102000	020 ●	6 шт.	
A101203102500	025 ●	6 шт.	
A101203103000	030 ●	6 шт.	A101203190000
A101203103500	035 ●	6 шт.	
A101203104000	040 ●	6 шт.	

Также доступны и другие размеры.

### Senseus™ Flexofile® 25 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A101202500600	006 ●	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040  A101202590000
A101202500800	008 ●	6 шт.	
A101202501000	010 ●	6 шт.	
A101202501500	015 ○	6 шт.	
A101202502000	020 ●	6 шт.	
A101202502500	025 ●	6 шт.	
A101202503000	030 ●	6 шт.	A101202590000
A101202503500	035 ●	6 шт.	
A101202504000	040 ●	6 шт.	

Также доступны и другие размеры.

## Senseus™ Hedstroem

Инструмент с крупной силиконовой ручкой для повышенного контроля обработки канала.

**Senseus™ Hedstroem 21 мм.**  
Упаковка из 6 шт.



Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A101602100800	008	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040  A101602190000
A101602101000	010	6 шт.	
A101602101500	015	6 шт.	
A101602102000	020	6 шт.	
A101602102500	025	6 шт.	
A101602103000	030	6 шт.	
A101602103500	035	6 шт.	
A101602104000	040	6 шт.	

**Senseus™ Hedstroem 25 мм.** Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A101602500800	008	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040  A101602590000
A101602501000	010	6 шт.	
A101602501500	015	6 шт.	
A101602502000	020	6 шт.	
A101602502500	025	6 шт.	
A101602503000	030	6 шт.	
A101602503500	035	6 шт.	
A101602504000	040	6 шт.	

**Senseus™ Hedstroem 31 мм.** Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A101603100800	008	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040  A101603190000
A101603101000	010	6 шт.	
A101603101500	015	6 шт.	
A101603102000	020	6 шт.	
A101603102500	025	6 шт.	
A101603103000	030	6 шт.	
A101603103500	035	6 шт.	
A101603104000	040	6 шт.	



Доступны в других размерх ISO.

## Senseus™ FlexoReamers®

**Senseus™ FlexoReamer® 21 мм.**  
Упаковка из 6 шт.



Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A101102100800	008	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040  A101102190000
A101102101000	010	6 шт.	
A101102101500	015	6 шт.	
A101102102000	020	6 шт.	
A101102102500	025	6 шт.	
A101102103000	030	6 шт.	
A101102103500	035	6 шт.	
A101102104000	040	6 шт.	

**Senseus™ FlexoReamer® 25 мм.** Упаковка из 6 шт.

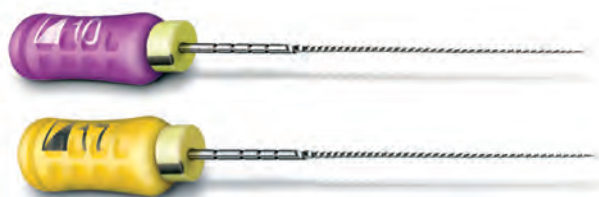
Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A101102500800	008	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040  A101102590000
A101102501000	010	6 шт.	
A101102501500	015	6 шт.	
A101102502000	020	6 шт.	
A101102502500	025	6 шт.	
A101102503000	030	6 шт.	
A101102503500	035	6 шт.	
A101102504000	040	6 шт.	

Senseus™ FlexoReamer® 31 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A101103100800	008	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040  A101103190000
A101103101000	010	6 шт.	
A101103101500	015	6 шт.	
A101103102000	020	6 шт.	
A101103102500	025	6 шт.	
A101103103000	030	6 шт.	
A101103103500	035	6 шт.	
A101103104000	040	6 шт.	



Senseus™ ProFinder™



Гибкий инструмент с минимальной конусностью и крупной силиконовой ручкой для повышенного контроля обработки канала.



Senseus™ ProFinder™ 25 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 2 шт. каждого вида
A101302501000	010	6 шт.	2 шт. 010, 2 шт. 013, 2 шт. 017  A101302590000
A101302501300	013	6 шт.	
A101302501700	017	6 шт.	

Senseus™ ProFinder™ 21 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 2 шт. каждого вида
A101302101000	010	6 шт.	2 шт. 010, 2 шт. 013, 2 шт. 017  A101302190000
A101302101300	013	6 шт.	
A101302101700	017	6 шт.	

Senseus™ ProFinder™ 18 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 2 шт. каждого вида
A101301801000	010	6 шт.	2 шт. 010, 2 шт. 013, 2 шт. 017  A101301890000
A101301801300	013	6 шт.	
A101301801700	017	6 шт.	

Nitiflex® file



2% никель-титановый ручной инструмент

Nitiflex® File 21 мм. Упаковка из 6 шт.



Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A012N02101512	015	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040  A012N02190012
A012N02102012	020	6 шт.	
A012N02102512	025	6 шт.	
A012N02103012	030	6 шт.	
A012N02103512	035	6 шт.	
A012N02104012	040	6 шт.	
A012N02104512	045	6 шт.	
A012N02105012	050	6 шт.	
A012N02105512	055	6 шт.	A012N02590012
A012N02106012	060	6 шт.	

Nitiflex® File 25 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A012N02501512	015	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040  A012N02590012
A012N02502012	020	6 шт.	
A012N02502512	025	6 шт.	
A012N02503012	030	6 шт.	
A012N02503512	035	6 шт.	
A012N02504012	040	6 шт.	
A012N02504512	045	6 шт.	
A012N02505012	050	6 шт.	
A012N02505512	055	6 шт.	A012N02590012
A012N02506012	060	6 шт.	

## ProTaper® for Hand Use

Ручные инструменты ProTaper имеют тот же дизайн, что и машинные, но могут применяться в более сложных клинических ситуациях. Они являются превосходным решением для всех стоматологов, предпочитающих использовать ручные инструменты.



### ProTaper® for Hand Use SX



В продаже блистер (6 шт.)

<b>A041601910112</b>	ProTaper Hand Use SX – 19 мм
----------------------	------------------------------

### ProTaper® for Hand Use S1



В продаже блистер (6 шт.)

<b>A041602110112</b>	ProTaper Hand Use S1 – 21 мм
<b>A041602510112</b>	ProTaper Hand Use S1 – 25 мм
<b>A041603110112</b>	ProTaper Hand Use S1 – 31 мм

### ProTaper® for Hand Use S2



В продаже блистер (6 шт.)

<b>A041602110212</b>	ProTaper Rotary Shaping File S2 – 21 мм
<b>A041602510212</b>	ProTaper Rotary Shaping File S2 – 25 мм
<b>A041603110212</b>	ProTaper Rotary Shaping File S2 – 31 мм

### ProTaper® for Hand Use F1



В продаже блистер (6 шт.)

<b>A041702110112</b>	ProTaper Rotary Finishing File F1 – 21 мм
<b>A041702510112</b>	ProTaper Rotary Finishing File F1 – 25 мм
<b>A041703110112</b>	ProTaper Rotary Finishing File F1 – 31 мм

### ProTaper® for Hand Use F2



В продаже блистер (6 шт.)

<b>A041702110212</b>	ProTaper Rotary Finishing File F2 – 21 мм
<b>A041702510212</b>	ProTaper Rotary Finishing File F2 – 25 мм
<b>A041703110212</b>	ProTaper Rotary Finishing File F2 – 31 мм

### ProTaper® for Hand Use F3



В продаже блистер (6 шт.)

<b>A041702110312</b>	ProTaper Rotary Finishing File F3 – 21 мм
<b>A041702510312</b>	ProTaper Rotary Finishing File F3 – 25 мм
<b>A041703110312</b>	ProTaper Rotary Finishing File F3 – 31 мм

### ProTaper® for Hand Use F4



В продаже блистер (6 шт.)

<b>A041702110412</b>	ProTaper Rotary Finishing File F4 – 21 мм
<b>A041702510412</b>	ProTaper Rotary Finishing File F4 – 25 мм
<b>A041703110412</b>	ProTaper Rotary Finishing File F4 – 31 мм

### ProTaper® for Hand Use F5



В продаже блистер (6 шт.)

<b>A041702110503</b>	ProTaper Rotary Finishing File F5 – 21 мм
<b>A041702510512</b>	ProTaper Rotary Finishing File F5 – 25 мм
<b>A041703110512</b>	ProTaper Rotary Finishing File F5 – 31 мм

### ProTaper® for Hand Use, 21 мм, Ассортимент

В продаже блистер (6 шт.)

<b>A041802190112</b>	ProTaper Hand Use, 21 мм, Assortment
----------------------	--------------------------------------

### ProTaper® for Hand Use, 25 мм, Ассортимент

В продаже блистер (6 шт.)

<b>A041802590112</b>	ProTaper Hand Use, 25 мм, Assortment
----------------------	--------------------------------------

### ProTaper® for Hand Use, 31 мм, Ассортимент

В продаже блистер (6 шт.)

<b>A041803190112</b>	ProTaper Hand Use, 31мм, Assortment
----------------------	-------------------------------------

## ProFile®

Различная конусность от 2 до 8%, позволяет успешно проходить корневой канал на всю длину. Повышенная гибкость финишных файлов позволяет «мягко» сформировать корневой канал, особенно в апикальной трети.

## ProFile® Orifice Shapers

19 мм, 3 Bands. Упаковка из 6 шт.



Размер	.05/20	.06/30	.06/40	.07/50	.08/60	.08/80
Упаковка – 6 шт. одного вида	6 шт. A035921900100	6 шт. A035921900200	6 шт. A035921900300	6 шт. A035921900400	6 шт. A035921900500	6 шт. A035921900600
Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида	1 шт. A035921990000					

## ProFile® .06 Tapers

21 мм, 2 Bands. Упаковка из 6 шт.



25 мм, 2 Bands. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A034522101512	015 ○	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040 A034522190012
A034522102012	020 ●	6 шт.	
A034522102512	025 ●	6 шт.	
A034522103012	030 ●	6 шт.	
A034522103512	035 ●	6 шт.	
A034522104012	040 ●	6 шт.	

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A034522501512	015 ○	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040 A034522590012
A034522502012	020 ●	6 шт.	
A034522502512	025 ●	6 шт.	
A034522503012	030 ●	6 шт.	
A034522503512	035 ●	6 шт.	
A034522504012	040 ●	6 шт.	

## ProFile® .04 Tapers

21 мм, 1 Band. Упаковка из 6 шт.



25 мм, 1 Band. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A011N22101512	015 ○	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040 A011N22190012
A011N22102012	020 ●	6 шт.	
A011N22102512	025 ●	6 шт.	
A011N22103012	030 ●	6 шт.	
A011N22103512	035 ●	6 шт.	
A011N22104012	040 ●	6 шт.	
A011N22104500	045 ○	6 шт.	2 шт. 045, 2 шт. 060, 2 шт. 090 A011N22190700
A011N22106000	060 ●	6 шт.	
A011N22109000	090 ○	6 шт.	

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A011N22501512	015 ○	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040 A011N22590012
A011N22502012	020 ●	6 шт.	
A011N22502512	025 ●	6 шт.	
A011N22503012	030 ●	6 шт.	
A011N22503512	035 ●	6 шт.	
A011N22504012	040 ●	6 шт.	
A011N22504500	045 ○	6 шт.	2 шт. 045, 2 шт. 060, 2 шт. 090 A011N22590700
A011N22506000	060 ●	6 шт.	
A011N22509000	090 ○	6 шт.	

31 мм, 1 Band. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A011N23101500	015 ○	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040 A011N23190000
A011N23102000	020 ●	6 шт.	
A011N23102500	025 ●	6 шт.	
A011N23103000	030 ●	6 шт.	
A011N23103500	035 ●	6 шт.	
A011N23104000	040 ●	6 шт.	
A011N23104500	045 ○	6 шт.	2 шт. 045, 2 шт. 060, 2 шт. 090 A011N23190700
A011N23106000	060 ●	6 шт.	
A011N23109000	090 ○	6 шт.	

## ProFile® .02 Tapers

25 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. – 1 шт. каждого вида
A034422501500	015 ○	6 шт.	1 шт. 015, 1 шт. 020, 1 шт. 025, 1 шт. 030, 1 шт. 035, 1 шт. 040 A034422590000
A034422502000	020 ●	6 шт.	
A034422502500	025 ●	6 шт.	
A034422503000	030 ●	6 шт.	
A034422503500	035 ●	6 шт.	
A034422504000	040 ●	6 шт.	

Другие длины доступны.



СКОРО  
НА РЫНКЕ

# PROTAPER•NEXT™



После 12 лет мирового успеха Protaper, DENTSPLY Maillefer с радостью представляет Вам следующее поколение инструмента уже успешного стать классикой — встречайте Protaper NEXT.

Философия Protaper осталась прежней: это высокая режущая эффективность инструмента, с переменной конусностью. Всё, что Вы ценили в системе Protaper, теперь дополнено уникальными преимуществами:

- Ассиметричное поперечное сечение со смещенным центром дает больше пространства для вывода дентинных опилок и увеличивает прочность инструмента
- Волнообразное движение инструмента в канале повышает режущую эффективность
- Запатентованная технология M-Wire® делает никель-титановый сплав еще более гибким и менее восприимчивым к циклической усталости

В результате, PROTAPER NEXT покрывает более сложные клинические случаи, делая процедуру обработки канала безопаснее и быстрее.

PROTAPER NEXT является комплексным эндодонтическим решением, включающим в себя процедуру создание ковровой дорожки, ирригацию, обработку канала и obturation.

**PROTAPER NEXT. То, что Вы так долго ждали.**



СКОРО  
НА РЫНКЕ

# pro•glider™



## ProGlider™ Инструменты

PROGLIDER — NiTi файл для создания ковровой дорожки, создан для всех стоматологов, которые используют NiTi-инструменты для разработки корневых каналов и которые ценят эффективность, простоту и безопасность.

Оптимальная ковровая дорожка с соблюдением оригинальной анатомии канала — всего одним инструментом!



## PathFile™



Никель-титановая система для быстрого и безопасного создания «ковровой дорожки». Основные преимущества этих революционно новых инструментов: прочность, гибкость, безопасность.



PathFile™ 21 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка — 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. — 2 шт. каждого вида
A001522101300	013 ●	6 шт.	2шт 013,
A001522101600	016 ○	6 шт.	2шт 016,
A001522101900	019 ●	6 шт.	2шт 019. A001522190000

PathFile™ 25 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка — 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. — 2 шт. каждого вида
A001522501300	013 ●	6 шт.	2шт 013 ,
A001522501600	016 ○	6 шт.	2шт 016,
A001522501900	019 ●	6 шт.	2шт 019. A001522590000

PathFile™ 31 мм. Упаковка из 6 шт.

Код	Размер по ISO	Упаковка — 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка 6 шт. — 2 шт. каждого вида
A001523101300	013 ●	6 шт.	013x2 шт.,
A001523101600	016 ○	6 шт.	016x2 шт.,
A001523101900	019 ●	6 шт.	019x2 шт. A001523190000

## Инструменты ProTaper® Universal

Инструменты ProTaper Universal предлагают решения для быстрой и высококачественной обработки корневых каналов. Благодаря уникальной форме с прогрессирующей конусностью, для эффективной обработки большинства каналов достаточно всего лишь трех формирующих файлов ProTaper. Последовательность использования файлов легко запоминается благодаря их цветовой кодировке и является одинаковой для любых каналов, что упрощает процедуру. Поскольку файлы имеют закругленный направляющий кончик, то отклонения от канала сводятся к минимуму, что позволяет использовать файлы для безопасного лечения анатомически сложных случаев.



### ProTaper® Universal Набор



Включает: 2 шт. S1, 2 шт. S2, 2 шт. F1. Упаковка из 6 шт.

<b>A040922100112</b>	ProTaper Universal Набор – 21 мм (2 шт. S1, 2 шт. S2 и 2 шт. F1)
<b>A040922500212</b>	ProTaper Universal Набор – 25 мм (2 шт. S1, 2 шт. S2 и 2 шт. F1)
<b>A040923100312</b>	ProTaper Universal Набор – 31 мм (2 шт. S1, 2 шт. S2 и 2 шт. F1)

## ProTaper® Universal Complete Базовый Набор



Включает: 1 шт. S1, 1 шт. S2, 1 шт. F1, 1 шт. F2, 1 шт. F3 и 1 шт. SX. Упаковка из 6 шт.

<b>A040922190112</b>	ProTaper Universal Complete Starter Pack – 21 мм
<b>A040922590112</b>	ProTaper Universal Complete Starter Pack – 25 мм
<b>A040923190112</b>	ProTaper Universal Complete Starter Pack – 31 мм

## ProTaper® D для перелечивания



Файлы для перелечивания специально создавались для удаления obturational материала из корневых каналов. Существует три вида файлов для перелечивания: D1, D2 и D3, каждый из которых предназначен для обработки конкретной трети длины канала. Файл D1 имеет активный кончик для успешного проникновения внутрь obturational материала в коронковой трети канала. Файлы D2 и D3 применяются для обработки средней и апикальной трети канала соответственно, и имеют неактивные кончики, предназначенные для строгого следования направлению канала. Конусы этих трех файлов соответствуют диаметру среднестатистических корневых каналов, а рукоятки имеют длину всего 11 мм, что облегчает визуальный осмотр обрабатываемой зоны.

### ProTaper® D1 для перелечивания



Упаковка из 6 шт.

<b>A141021600112</b>	ProTaper Retreatment File D1 – 16 мм
----------------------	--------------------------------------

## ProTaper® D2 для перелечивания



Упаковка из 6 шт.

<b>A141021800112</b>	ProTaper Retreatment File D2 – 18 мм
----------------------	--------------------------------------

## ProTaper® D3 для перелечивания



Упаковка из 6 шт.

<b>A141022200112</b>	ProTaper Retreatment File D3 – 22 мм
----------------------	--------------------------------------

## ProTaper® Набор для перелечивания

Упаковка из 6 шт. (2 шт. D1, 2 шт. D2, 2 шт. D3)

<b>A141220090012</b>	ProTaper Retreatment File assorted
----------------------	------------------------------------

## ProTaper® Universal Shaping File S1



Упаковка из 6 шт.

A041022110112	ProTaper Universal Shaping File S1 – 21 мм
A041022510112	ProTaper Universal Shaping File S1 – 25 мм
A041023110112	ProTaper Universal Shaping File S1 – 31 мм

## ProTaper® Universal Shaping File S2



Упаковка из 6 шт.

A041022110212	ProTaper Universal Shaping File S2 – 21 мм
A041022510212	ProTaper Universal Shaping File S2 – 25 мм
A041023110212	ProTaper Universal Shaping File S2 – 31 мм

## ProTaper® Universal Finishing File F1



Упаковка из 6 шт.

A041122110112	ProTaper Universal Finishing File F1 – 21 мм
A041122510112	ProTaper Universal Finishing File F1 – 25 мм
A041123110112	ProTaper Universal Finishing File F1 – 31 мм

## ProTaper® Universal Finishing File F2



Упаковка из 6 шт.

A041122110212	ProTaper Universal Finishing File F2 – 21 мм
A041122510212	ProTaper Universal Finishing File F2 – 25 мм
A041123110212	ProTaper Universal Finishing File F2 – 31 мм

## ProTaper® Universal Finishing File F3



Упаковка из 6 шт.

A041122110312	ProTaper Universal Finishing File F3 – 21 мм
A041122510312	ProTaper Universal Finishing File F3 – 25 мм
A041123110312	ProTaper Universal Finishing File F3 – 31 мм

## ProTaper® Universal Finishing File F4



Упаковка из 6.

A041122110412	ProTaper Universal Finishing File F4 – 21 мм
A041122510412	ProTaper Universal Finishing File F4 – 25 мм
A041123110412	ProTaper Universal Finishing File F4 – 31 мм

## ProTaper® Universal Finishing File F5



Упаковка из 6 шт.

A041122110512	ProTaper Universal Finishing File F5 – 21 мм
A041122510512	ProTaper Universal Finishing File F5 – 25 мм
A041123110512	ProTaper Universal Finishing File F5 – 31 мм

## ProTaper® Universal Shaping File SX



Упаковка из 6 шт.

A041021910112	ProTaper Universal Shaping File SX – 19 мм
---------------	--

# wave • one™

## WaveOne™ Малый



Стерильные блистеры по 3 инструмента

<b>A070022100S01</b>	WaveOne Small File – 21 мм
<b>A070022500S01</b>	WaveOne Small File – 25 мм
<b>A070023100S01</b>	WaveOne Small File – 31 мм

## WaveOne™ Основной



Стерильные блистеры по 3 инструмента

<b>A070022100P01</b>	WaveOne Primary File – 21 мм
<b>A070022500P01</b>	WaveOne Primary File – 25 мм
<b>A070023100P01</b>	WaveOne Primary File – 31 мм

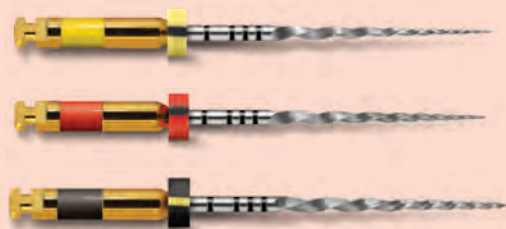
## WaveOne™ Большой



Стерильные блистеры по 3 инструмента

<b>A070022100L01</b>	WaveOne Large File – 21 мм
<b>A070022500L01</b>	WaveOne Large File – 25 мм
<b>A070023100L01</b>	WaveOne Large File – 31 мм

## WaveOne™ Ассортимент



Стерильные блистеры по 3 инструмента

<b>A070022190A01</b>	WaveOne Assorted Files – 21 мм
<b>A070022590A01</b>	WaveOne Assorted Files – 25 мм
<b>A070023190A01</b>	WaveOne Assorted Files – 31 мм

Эндодонтическая система реципрокных инструментов Wave•One™ от компании Dentsply Maillefer делает процедуру формирования корневого канала простой и эффективной.

Реципрокное движение означает, что файл постоянно меняет своё направление вращения в процессе работы с большим углом вращения при движении вперёд (для режущей эффективности) и меньшим углом при движении назад (для продвижения в просвете корневого канала, сохраняя его анатомию). Оптимальные углы вращения помогают снизить риск эффекта «вкручивания» и риск перелома файла.

В большинстве случаев для формирования канала требуется лишь один никель-титановый инструмент Wave•One™ (размера Small, Primary или Large), при этом не тратится время на смену никель-титановых инструментов в процессе обработки корневого канала.

## Эндодонтический мотор X-Smart™ Plus

Эндодонтический мотор X-Smart™ является простым и удобным устройством, позволяющим стоматологам общей практики выполнять эндодонтическое лечение при помощи вращающихся инструментов. Он имеет легкий наконечник с компактной головкой. Устройство отличается компактностью и мобильностью, функционирует без применения педали и может работать от батареи. Мотор поддерживает ротационный и реципрокный режимы.

A1032 000 00 000	X-Smart™ Plus Эндомотор
A1033 000 00 000	X-Smart™ Plus 6:1 Угловой наконечник
A1034 000 00 200	X-Smart™ Plus Адаптер
A1034 000 00 300	X-Smart™ Plus Мотор
A1034 000 00 400	X-Smart™ Plus База
A1007 000 00 100	X-Smart™ Аккумулятор
A1007 000 00 500	X-Smart™ Спрей-насадка F-type
A1007 000 00 600	X-Smart™ Очистительный адаптер
A1007 000 00 800	X-Smart™ Спрей x 6



## X-Smart Plus™ ProTaper® Universal Kit



A10352000000	X-Smart Plus ProTaper Universal Kit
Состав набора:	
A10320000000	X-Smart Plus стартовый набор
A001522590000	Pathfile Assortment, 25 мм – Упаковка 6 шт.
A040922590100	ProTaper Universal Assortment 25 мм – Упаковка 6 шт. (F1-3, S1-2, SX)

## X-Smart™ Plus WaveOne™ Kit



A103510000000	X-Smart Plus WaveOne Kit
Состав набора:	
A103200000000	X-Smart Plus стартовый набор
A070022500P01	Wave One Primary, 25 мм – Блистер 3 шт.
A070022590A01	Wave One Assortment, 25 мм – Блистер 3 шт.
A001522590000	Pathfile Assortment, 25 мм – Упаковка 6 шт.



**DENTSPLY**  
**MAILLEFER**

# propex • pixi™

Апекслокатор



Небольшой размер,  
большие преимущества

Регистрационное удостоверение № P3N.2013/519

**+**  
**WE  
KNOW  
ENDO.**

[www.dentsplycis.com](http://www.dentsplycis.com)

## Propex Pixi™

Компания DENTSPLY представляет вам апекслокатор нового поколения Propex Pixi™, созданный для стоматологов общей практики, которые стремятся повысить уровень качества эндодонтического лечения. Новый апекслокатор удобен в обращении и очень компактен, а также позволяет максимально точно определить рабочую длину корневого канала.

Прибор устанавливается на грудь пациента, тем самым обеспечивая комфортный доступ к полости, избегая спутывания проводов.



A10300000000	Propex Pixi
A103100000200	Propex Pixi зарядное устройство
A103100000100	Propex Pixi измерительный провод
A102900000400	Propex Pixi соединительный крючок 2 шт.
A102900000600	Propex Pixi вилка 2 шт.

## Propex® II

Апекслокатор Propex® II обладает цветным дисплеем для более чёткого отслеживания файлов. Данный апекслокатор 5 поколения имеет встроенную многочастотную технологию и функцию апикального увеличения, которая включается при достижении файлом апикальной области, помогая стоматологу локализовать апекс в большинстве корневых каналов. Апекслокатор Propex II занимает немного места и работает от перезаряжаемой батареи, поэтому его можно с лёгкостью переносить из кабинета в кабинет.



A10280000000	Propex II
A102900000200	Propex II зарядное устройство
A102900000600	Propex II соединительная вилка 2 шт.
A102900000400	Propex II соединительные крюки 2 шт.
A102900000300	Propex II губные зажимы 2 шт.
A102900000500	Propex II измерительный провод 2 шт.





## Аппарат EndoActivator®

Простой в использовании и безопасный аппарат для активации ирригационного раствора.

EndoActivator создан для безопасной и мощной активации внутриканальных ирригационных растворов в процессе эндодонтического лечения.

Аппарат помогает улучшить санацию полости и смазанный слой биопленки.

### Насадки EndoActivator

- Прочные гибкие насадки из полимера медицинского назначения
- Насадки имеют цветовую кодировку в соответствии с их размерами
- Длина составляет 22 мм, измерительные кольца расположены на отметках 18, 19 и 20 мм

### Рукоятка/Управление

- Изогнутая форма обеспечивает легкий доступ к жевательным зубам
- 3-скоростной звуковой мотор позволяет выбирать скорость 2000, 6000 и 10000 оборотов в минуту
- Рукоятка имеет эргономичный дизайн и работает от сменной батареи питания

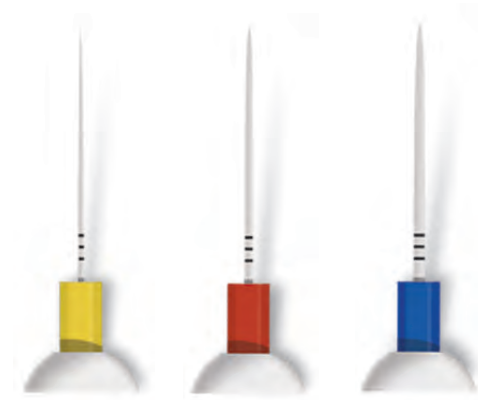


### Набор EndoActivator®

Набор включает в себя: 1 шт. EndoActivator наконечник/ (батарея входит). Насадки 25 шт. малых (#15/.02), 25 шт. средних (#25/.04), 25 шт. больших (#35/.04). 100 шт. защитные барьеры, 1 шт. обучающий DVD.

A09110000000 EndoActivator System Kit

### Насадки для EndoActivator®



Упаковка из 25 шт.

Малая насадка	Средняя насадка	Большая насадка
15/.02	25/.04	35/.04
A091302201500	A091302202500	A091302203500

### Аксессуары EndoActivator®

В продаже поштучно.

A09120000000	Наконечник EndoActivator®
A09140000000	Одноразовые гигиенические рукава
A09150000000	Батарея
A09160000000	Рукоятка

## START-X™ Ультразвуковые насадки

Ультразвуковые насадки Start-X разработаны для повышения качества эндодонтического лечения и обеспечивают повышенный контроль и точность в работе. Каждая насадка имеет несколько возможных применений, что позволяет стоматологу точно знать какую насадку использовать в каждой клинической ситуации. Насадки сделаны из нержавеющей стали, они прочные и устойчивы к перелому, насадки могут вибрировать в воздухе и не ломаться.



### Ультразвуковая насадка START-X™ стандартов Satalec / EMS Пробные наборы

Упаковка из 5 шт.  
(по одному каждого размера + DVD).



A966000090100	Start-X Tip Satalec Пробный набор
A966100090100	Start-X Tip EMS Пробный набор

### Ультразвуковая насадка START-X™ Satalec / EMS № 1

- Применение: Тонкая обработка стенок кавитальной полости
- Неактивный кончик исключает случайное повреждение дна пульпарной камеры
- Активная латеральная часть создает прямой доступ в канал



В продаже поштучно.

A066000000100	Start-X Насадка Satalec № 1
A066100000100	Start-X Насадка EMS № 1

### Ультразвуковая насадка START-X™ Satalec / EMS № 3

- Применение: Обнаружение устьев канала
- Активный кончик удаляет препятствия, мешающие прямому доступу в канал



В продаже поштучно.

A066000000300	Start-X Насадка Satalec № 3
A066100000300	Start-X Насадка EMS № 3

### Ультразвуковая насадка START-X™ Satalec / EMS № 5

- Применение: раскрытие исходного анатомического строения дна пульпарной камеры
- Активный кончик облегчает поиск устьев канала благодаря удалению кальцифицированных тканей и пломбировочных материалов, которые скрывают исходное анатомическое строение дна пульпарной камеры
- Толстый цилиндрический кончик обеспечивает лучший обзор



В продаже поштучно.

A066000000500	Start-X Насадка Satalec № 5
A066100000500	Start-X Насадка EMS Net 5

### Ультразвуковая насадка START-X™ Satalec / EMS № 2

- Применение: Обнаружение канала MB2
- Активный кончик удаляет слой дентина, часто прикрывающий прямой доступ в канал MB2 у верхних моляров



В продаже поштучно.

A066000000200	Start-X Насадка Satalec № 2
A066100000200	Start-X Насадка EMS № 2

### Ультразвуковая насадка START-X™ Satalec/EMS № 4

- Применение: Удаление металлических штифтов
- Конструкция специально приспособлена для эффективной работы как на вершине, так и на боковых поверхностях металлического штифта
- Охлаждение водой предотвращает перегрев



В продаже поштучно.

A066000000400	Start-X Насадка Satalec № 4
A066100000400	Start-X Насадка EMS № 4

### Ультразвуковая насадка START-X™ Satalec / EMS Комплект

Упаковка из 5 шт.



A066000090000	Start-X Насадка Satalec ассортимент
A066100090000	Start-X Насадка EMS ассортимент

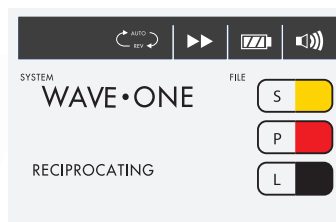
Подробнее на стр. 29

# x·smart™ plus

Всё, что Вы любите в x·smart™ со знаком+



- wave•one™ –реципрокное и ротационное движение мотора
- удобный интерфейс и многофункциональный режим работы
- кнопка включения/выключения на рукоятке наконечника
- отличный обзор и доступ к полости благодаря миниатюрной головке углового наконечника



Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/12479

**+**  
**WE  
KNOW  
ENDO.**

Dentsply Россия Лимитед | 129090 | Москва |  
Проспект мира, д.6 | Тел: + 7 495 988 28 08 |  
[www.dentsplycis.com](http://www.dentsplycis.com)

**DENTSPLY**  
**MAILLEFER**

## Эндодонтический мотор X-Smart™

Эндодонтический мотор X-Smart™ является простым и удобным устройством, позволяющим стоматологам общей практики выполнять эндодонтическое лечение при помощи вращающихся инструментов. Он имеет легкий наконечник с компактной головкой. Устройство отличается компактностью и мобильностью, функционирует без применения педали и может работать от батареи. Мотор имеет режимы контроля по крутящему моменту и автореверса.



В продаже поштучно.



A10040000000

X-Smart

## X-Smart™ Рукоятка



A10050000100

X-Smart Motor & Lead Assembly  
рукоятка

В продаже поштучно.

## X-Smart™ Угловой наконечник 16:1



В продаже поштучно.



A100601600000

X-Smart Contra Angle 16:1

## Эндодонтический мотор X-Smart™ Dual

Эндодонтический мотор X-Smart™ Dual обладает всеми преимуществами X-Smart, а также дополнительной особенностью – встроенным апекс-локатором. Этот простой и удобный в использовании аппарат предназначен для обработки корневых каналов вращающимися инструментами.



В продаже поштучно.



A10240000000

X-Smart Dual

## X-Smart™ Dual аксессуары

A102600200000	X-Smart Dual угловой наконечник 2:1
A102500000300	X-Smart Dual набор для проведения апекслокации
A102500000400	X-Smart Dual крючки 2 шт.
A102500000500	X-Smart Dual зажимы губные 5 шт.
A102500000100	X-Smart Dual батарея
A102500000200	X-Smart Dual зарядное устройство

## X-Smart™ Аксессуары

A100700000100	X-Smart батарея
A100700000300	Насадка для спрея X-Smart Spray Nozzle
A100700000200	X-Smart зарядное устройство
A100700000700	X-Smart адаптер для спрея
A100700000400	X-Smart напольная педаль

SDR<sup>®</sup>

Smart Dentin Replacement



## SDR<sup>™</sup> — ОТЛИЧНАЯ АДАПТАЦИЯ В ПОЛОСТИ

Эндо-ресто концепция  
лечения за одно посещение



подробнее на **стр. 63**

## Обтураторы GuttaCore™

GuttaCore является первым обтуратором на носителе из поперечно-сшитой гуттаперчи. Поперечное сшивание — широко известный научный процесс, при котором происходит консолидация полимерных сетей, что преобразует гуттаперчу, делая ее более плотной, сохраняя при этом все ее лучшие свойства. Благодаря этому, обтуратор проникает в канал до апекса, но при необходимости перелечивания легко извлекается из канала, поскольку носитель сделан также из гуттаперчи.

### Качественная obturation

- Превосходная 3D obturation
- В корневом канале не остается пластикового носителя
- Великолепная рентгеноконтрастность
- Простое перелечивание
- Простота при подготовке канала под штифт

### Простота

- Легкое введение. Легкое удаление.
- Соответствует размерам инструментов

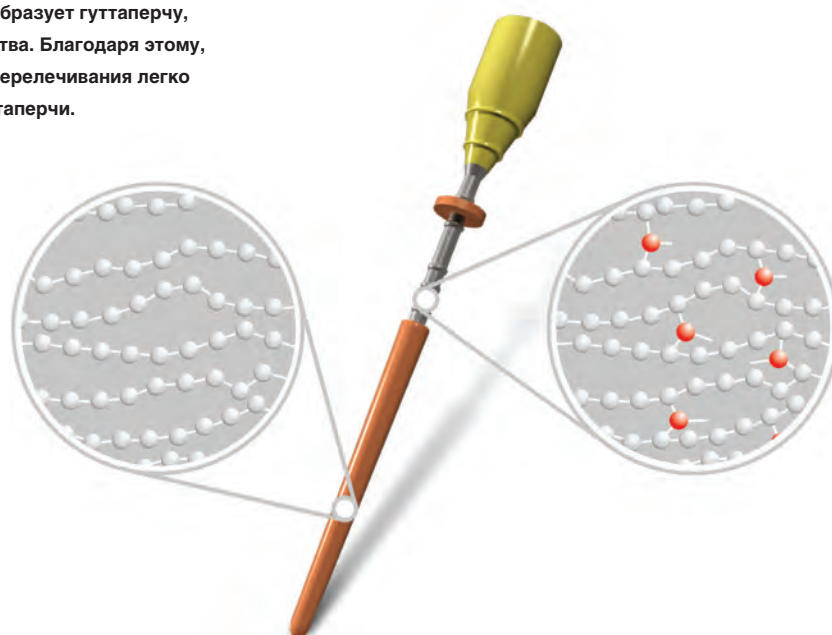
### Безопасность и удобство

- Безопасность и биосовместимость
- Предсказуемость результатов

### Экономия времени

- Нагрев, введение и удаление обтуратора за считанные секунды

gutta • core™



В продаже в блистере (5 шт. обтураторов и верифер)

Код	Размер ISO	Индивидуальная упаковка – 5 шт. одного вида
A1702B0042000	20	5 шт.
A1702B0042500	25	5 шт.
A1702B0043000	30	5 шт.
A1702B0043500	35	5 шт.
A1702B0044000	40	5 шт.
A1702B0044500	45	5 шт.
A1702B0045000	50	5 шт.
A1702B0045500	55	5 шт.
A1702B0046000	60	5 шт.
A1702B0047000	70	5 шт.
A1702B0048000	80	5 шт.
A1702B0049000	90	5 шт.



В продаже упаковка 25 обтураторов (5 блистеров)

Код	Размер ISO	Индивидуальная упаковка – 25 шт. одного вида
A1702P0042000	20	25 шт.
A1702P0042500	25	25 шт.
A1702P0043000	30	25 шт.
A1702P0043500	35	25 шт.
A1702P0044000	40	25 шт.

## Печь Thermaprep® 2



В продаже поштучно.

**A017623000200** Печь Thermaprep 2 230V

**Трехмерный нагрев.** Обтураторы разогреваются за считанные секунды в режиме обычного и двойного нагрева. Трехмерный нагрев поддерживается в нагревательной камере до того момента, пока обтуратор не будет готов к использованию, что делает этот аппарат идеальным для процедур, связанных с обработкой нескольких каналов.

**Световые индикаторы и звуковые сигналы.** Для оповещения об изменении статуса в печи используются жидкокристаллические световые индикаторы и звуковые сигналы.

**Держатели, обеспечивающие плавное извлечение обтураторов.**

Конструкция держателей обтураторов позволяет вставлять и вынимать обтураторы из нагревательной камеры строго вертикально.

**Режим очистки.** В режиме очистки температура печи повышается, а гуттаперча внутри нагревательной камеры размягчается, что облегчает ее удаление.

- Разогрев обтураторов в печи занимает от 20 до 49 секунд, в зависимости от размера обтуратора
- При достижении обтурационным материалом требуемой температуры встроенный таймер издает звуковые сигналы
- Обтуратор хранится при требуемой температуре в течение 90 секунд.

## Набор Thermaprep® 2 + Thermafil

- Thermafil® набор вериферов 20 – 45 шт. REF A 0175
- Thermafil® набор обтураторов для боковой группы зубов
- Щетка
- Дополнительные наклейки фронтальной панели.



**A176A23000200** 1 печь и 1 упаковка обтураторов Thermafil в ассортименте

## Набор Thermaprep® 2 + ProTaper®

- ProTaper® Universal обтураторы F1 6 шт. REF A 1411
- ProTaper® Universal обтураторы F2 20 шт. REF A 1411
- ProTaper® Universal обтураторы F3 6 шт. REF A 1411
- Щетка
- Дополнительные наклейки фронтальной панели.



**A176C23000200** Thermaprep 2 Kit ProTaper Universal – 1 печь и 1 упаковка обтураторы Thermafil (PTU) в ассортименте

## Набор Thermaprep® 2 + WaveOne™

- WaveOne™ малые обтураторы 6 шт. REF A 1700
- WaveOne™ основные обтураторы 20 шт. REF A 1700
- WaveOne™ большие обтураторы 6 шт. REF A 1700
- Щетка
- Дополнительные наклейки фронтальной панели.



**A176B23000200** Thermaprep 2 Kit WaveOne – 1 печь и 1 упаковка обтураторов WaveOne Thermafil в ассортименте

## Обтураторы Thermafil®



Thermafil® обеспечивает превосходное качество пломбирования узких, искривленных корневых каналов. Еще одним преимуществом является быстрое и легкое применение.

В продаже в упаковках из 30 шт.

Код	Размер по ISO	Индивидуальная упаковка – 30 шт. одного вида
A034802502012	20	30 шт.
A034802502512	25	30 шт.
A034802503012	30	30 шт.
A034802503500	35	30 шт.
A034802504000	40	30 шт.

В продаже в упаковке из 6 шт.



Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 шт. одного вида	Ассортиментная упаковка – 20 шт.
A016602502012	20	6 шт.	Thermafil Posterior Pack – 20 Assorted, 20 – 40 A016700090000
A016602502512	25	6 шт.	
A016602503012	30	6 шт.	
A016602503512	35	6 шт.	
A016602504012	40	6 шт.	
A016602504512	45	6 шт.	Thermafil Anterior Pack – 20 Assorted, 45 – 100 A016800090000
A016602505000	50	6 шт.	
A016602505500	55	6 шт.	
A016602506000	60	6 шт.	
A016602507000	70	6 шт.	
A016602508000	80	6 шт.	
A016602509000	90	6 шт.	
A016602510000	100	6 шт.	

## Верифер Thermafil®

Предварительно измеряет глубину каналов для правильного подбора obturатора Thermafil.



25 мм. Упаковки по 6 шт.



Код	Размер по ISO	Упаковка – 6 одного вида	Смешанная упаковка — 1 шт. каждого вида
A017502502000	20 ●	6 шт.	Thermafil Verifier 20 – 45 A017502590000
A017502502500	25 ●	6 шт.	
A017502503000	30 ●	6 шт.	
A017502503500	35 ●	6 шт.	
A017502504000	40 ●	6 шт.	
A017502504500	45 ○	6 шт.	
A017502505000	50 ●	6 шт.	Thermafil Verifier 50 – 90 A017502590100
A017502505500	55 ●	6 шт.	
A017502506000	60 ●	6 шт.	
A017502507000	70 ●	6 шт.	
A017502508000	80 ●	6 шт.	
A017502509000	90 ○	6 шт.	

## Therma-Cut SS Burs



Для извлечения носителя Thermafil.  
Рекомендованная скорость — 300 000 RPM

В продаже в упаковке из 6 шт.



A005032501000	Therma-Cut SS Bur FG 25 Мм 010
A005032501200	Therma-Cut SS Bur FG 25 Мм 012
A005032501400	Therma-Cut SS Bur FG 25 Мм 014
A005032501600	Therma-Cut SS Bur FG 25 Мм 016
A005032590000	Therma-Cut SS Bur FG 25 Мм Assortment

## Thermafil® Post Space Bur



Для создания ложа под штифт.  
Рекомендованная скорость — 250 00 – 300 000 RPM.

Размер 05. В продаже в упаковке из 6 шт.



A005131300500	Thermafil Post Space Bur – 25 мм
A005131900500	Thermafil Post Space Bur – 31 мм

Размер 07. В продаже в упаковке из 6 шт.



A005131300700	Thermafil Post Space Bur – 25 мм
A005131900700	Thermafil Post Space Bur – 31 мм



## Аппарат Calamus®

Аппарат для obturation апикальной трети ("Downpack") и obturation средней и коронковой третей ("Backfill") канала. Экономит время и обеспечивает долговечную трехмерную obturation корневых каналов.

### ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Для общей навигации используются кнопки "+" и "-"
- Возможно применение индивидуальных настроек
- Дружелюбный интерфейс аппарата
- 2 предустановленные программы позволяют выбрать для сохранения наиболее подходящие настройки
- Легко поддается чистке и уходу

### УДОБСТВО И КОНТРОЛЬ

- Интуитивное управление
- Эргономичная рукоятка с большим рычагом управления
- Активация происходит путем легкого нажатия на гибкое силиконовое кольцо
- Благодаря тонкой рукоятке устья корневых

- каналов хорошо просматриваются
- На рукоятке находятся оптические и звуковые индикаторы, обеспечивающие контроль и безопасность
- Прозрачное окно на рукоятке показывает количество гуттаперчи в картридже

### БЫСТРОТА И НАДЕЖНОСТЬ

- Вертикальная конденсация является быстрым и эффективным методом, позволяющим достичь долговечной и герметичной трехмерной obturation корневого канала
- Надежная obturation латеральных каналов
- Риск перелома корня сведен к минимуму
- Заполнение гуттаперчей производится до желаемого уровня для последующей постановки стекловолоконного штифта



## Calamus® Dual Kit

аппарат Calamus® Dual, 1 плаггер малый ISO 40 – конусность .03 упаковка из 10 шт. картриджей гуттаперчи, размер 20G, упаковка из 10 шт. картриджей гуттаперчи, размер 23G, аксессуары



A13000000000 Calamus Dual EU

## Calamus® Плаггер S



В продаже поштучно.



A111000000000 Calamus Heated Plugger S ISO 40 taper .03

## Calamus® Плаггер M



В продаже поштучно.



A112000000000 Calamus Heated Plugger M ISO 50 taper .05

## Calamus® Плаггер L



В продаже поштучно.



A113000000000 Calamus Heated Plugger L ISO 60 taper .06

## Calamus® Термическая насадка



В продаже поштучно.



A115000000000 Calamus Thermal Response Tip

## Calamus® Аксессуары

В продаже поштучно.



A120600000000 Держатель для замены картриджей

A120700000000 Держатель для придания формы наконечнику

A120800000000 Щетка для очистки наконечника

A120900000000 Теплозащита для наконечника

## Calamus® Картриджи

В продаже поштучно.



A121000000000 Calamus GP Cartridges 20G 10P

A122000000000 Calamus GP Cartridges 23G 10P

## Силер AH Plus®

Силер для корневых каналов AH Plus является двухкомпонентной пастой на основе эпоксидно-аминной смолы. Предназначен для техники как горячей, так и холодной obturation, AH Plus добивается отличной герметизации благодаря своим самоадгезивным свойствам и размерной стабильности. Он биосовместим и обладает умеренными антимикробными свойствами, вследствие чего имеет потенциал к существенному снижению бактериальной нагрузки на корневой канал. Материал обладает очень высокой рентгеноконтрастностью, поэтому его можно четко различить на рентгеновском снимке.



## AH Plus® Силер

В продаже поштучно.



60620112 AH Plus Paste – 2 шт. тубика 4 мл

## AH 26®

60621102 AH 26 – 8 г порошка, 10 г пасты

60621103 AH 26 Silver-free – 8 г порошка, 10 г пасты



## Силер AH Plus® Jet™

Смесительный шприц AH Plus® Jet™ для прямого интраорального введения материала позволяет сделать процедуру более точной, удобной и быстрой.

## AH Plus® Jet™ Стартовый набор

В продаже поштучно.

60620115 AH Plus Jet Starter Kit Comprising состав :  
 смесительный шприц AH Plus® Jet™ 15 г  
 20 шт. смесительных наконечников  
 20 шт. внутриворотных наконечников  
 блок для замешивания  
 иллюстрированное техническое руководство  
 органайзер

60620118 AH Plus Jet Syringe Refill состав:  
 2 шт. смесительных шприца 15 г.



Герметично. Надежно.



ЭйЭйч Плюс®  
**АН Plus®**  
Эндо-силер номер 1\*

- ✓ Уникальная адгезия к дентину
- ✓ Выдающаяся пространственная стабильность
- ✓ Более 10 лет доказанного клинического успеха



К лучшей стоматологии

**DENTSPLY**

\*наиболее используемый эндо-силер в Германии, Испании, Португалии, странах Бенилюкса, США

## Lentulo® Spiral Fillers



17 мм. Применяется для внесения силанта в корневой канал. Упаковка из 4 шт.



Код	Point Type	Рекомендованная скорость вращения	Ассортиментная упаковка – 4 шт.
A002221700100	Размер 1	300-600 RPM	Assorted 1-4 A002221790000
A002221700200	Размер 2	300-600 RPM	
A002221700300	Размер 3	300-600 RPM	
A002221700400	Размер 4	300-600 RPM	

21 мм. Применяется для внесения силанта в корневой канал. Упаковка из 4 шт.



Код	Point Type	Рекомендованная скорость вращения	Ассортиментная упаковка – 4 шт.
A002222100112	Размер 1	300-600 RPM	Assorted 1-4 A002222190012
A002222100212	Размер 2	300-600 RPM	
A002222100312	Размер 3	300-600 RPM	
A002222100412	Размер 4	300-600 RPM	

25 мм. Применяется для внесения силанта в корневой канал. Упаковка из 4 шт.



Код	Point Type	Рекомендованная скорость вращения	Ассортиментная упаковка – 4 шт.
A002222500112	Размер 1	300-600 RPM	Assorted 1-4 A002222590012
A002222500212	Размер 2	300-600 RPM	
A002222500312	Размер 3	300-600 RPM	
A002222500412	Размер 4	300-600 RPM	

## Finger Spreaders, Cone Flat

Стальные инструменты для пломбирования корневых каналов.



21 мм. Упаковка из 4 шт.



Код	Размер	Ассортиментная упаковка – 4 шт.
A018202100100	A	Assorted box of 4 A018202190000
A018202100200	B	
A018202100300	C	
A018202100400	D	

25 мм. Упаковка из 4 шт.



Код	Размер	Ассортиментная упаковка – 4 шт.
A018202500100	A	Assorted box of 4 A018202590000
A018202500200	B	
A018202500300	C	
A018202500400	D	

## Finger Spreaders, Pointed

Стальные инструменты для пломбирования корневых каналов.



21 мм. Упаковка из 4 шт.



Код	Размер	Ассортиментная упаковка – 4 шт.
A020602101000	10	Assorted 10-40 A020602190000
A020602102000	20	
A020602103000	30	
A020602104000	40	

25 мм. Упаковка из 4 шт.



Код	Размер	Ассортиментная упаковка – 4 шт.
A020602501000	10	Assorted 10-40 A020602590000
A020602502000	20	
A020602503000	30	
A020602504000	40	

### WaveOne™ Гуттаперчевые штифты

Гуттаперчевые штифты соответствующие размерам инструментов WaveOne



Упаковка из 60 шт.



A024X00000S00	WaveOne Gutta Percha Points Small
A024X00000P00	WaveOne Gutta Percha Points Primary
A024X00000L00	WaveOne Gutta Percha Points Large
A024X00090000	WaveOne Gutta Percha Assorted

### WaveOne™ Бумажные штифты

Бумажные штифты соответствующие размерам инструментов WaveOne



Упаковка из 180 шт.



A024W00000S01	WaveOne Paper Points Small
A024W00000P01	WaveOne Paper Points Primary
A024W00000L01	WaveOne Paper Points Large
A024W00090001	WaveOne Paper Points Assorted

### WaveOne™ Thermafil® obturator

Качественная obturация длинных, изогнутых и узких корневых каналов. Быстрые, предсказуемые и стабильные результаты.



Упаковка из 6 шт.



A170000010S00	WaveOne Thermafil Small
A170000010P00	WaveOne Thermafil Primary
A170000010L00	WaveOne Thermafil Large



Упаковка из 20 шт.

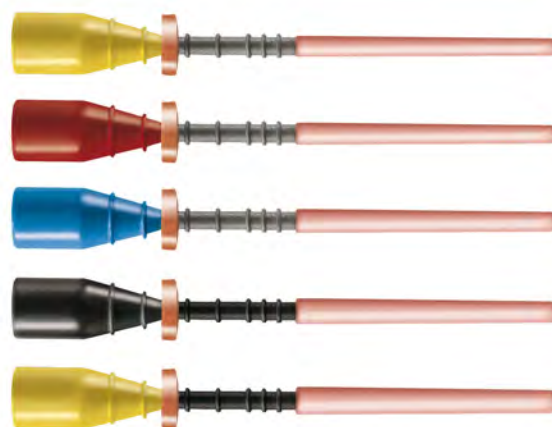


A170000011S00	WaveOne Thermafil Small
A170000011P00	WaveOne Thermafil Primary
A170000011L00	WaveOne Thermafil Large

## Обтураторы и Штифты ProTaper® Universal

Обтураторы соответствуют размерам формирующих инструментов ProTaper® и гарантируют качественную obturацию.

Гуттаперчевые штифты соответствуют размерам финишных файлов ProTaper® Universal и для облегчения идентификации имеют цветовую кодировку. Их конструкция одинаково подходит как для холодной, так и для горячей obturации.



### Обтураторы ProTaper® Universal

Упаковка из 6 шт.



A141100010100	ProTaper Universal obturator F1
A141100010200	ProTaper Universal obturator F2
A141100010300	ProTaper Universal obturator F3
A141100010400	ProTaper Universal obturator F4
A141100010500	ProTaper Universal obturator F5

Упаковка из 20 шт.



A141100011100	ProTaper Universal obturator F1
A141100011200	ProTaper Universal obturator F2
A141100011300	ProTaper Universal obturator F3
A141100011400	ProTaper Universal obturator F4
A141100011500	ProTaper Universal obturator F5

### Гуттаперчевые штифты ProTaper® Universal

Упаковка из 60 шт.



A022X00010100	Gutta percha Protaper Universal F1
A022X00010200	Gutta percha Protaper Universal F2
A022X00010300	Gutta percha Protaper Universal F3
A022X00090100	Gutta percha Protaper Universal B ассортименте F1-F3
A022X00090200	Gutta percha Protaper Universal B ассортименте F4-F5



## Gutta Каналонаполнитель

21 мм. Упаковка из 4 шт.



Код	Размер	Упаковка – одного вида	Ассортиментная упаковка по 4 шт.
A024202102500	25	4 шт.	1x 25, 1x 30, 1x 35, 1x 40  A024202190000
A024202103000	30	4 шт.	
A024202103500	35	4 шт.	
A024202104000	40	4 шт.	

Доступны в других размерах.



25мм. Упаковка из 4 шт.



Код	Размер	Упаковка – одного вида	Ассортиментная упаковка по 4 шт.
A024202502500	25	4 шт.	1x 25, 1x 30, 1x 35, 1x 40  A024202590000
A024202503000	30	4 шт.	
A024202503500	35	4 шт.	
A024202504000	40	4 шт.	

Доступны в других размерах.

## ProTaper® Thermafil Обтураторы

Качественная obturation длинных, изогнутых и узких корневых каналов.  
Быстрые, предсказуемые и стабильные результаты.



Упаковка из 6 шт.



A141100010100	ProTaper Thermafil Obturator F1
A141100010200	ProTaper Thermafil Obturator F2
A141100010300	ProTaper Thermafil Obturator F3
A141100010400	ProTaper Thermafil Obturator F4
A141100010500	ProTaper Thermafil Obturator F5

Упаковка из 20 шт.



A141100011100	ProTaper Thermafil Obturator F1
A141100011200	ProTaper Thermafil Obturator F2
A141100011300	ProTaper Thermafil Obturator F3
A141100011400	ProTaper Thermafil Obturator F4
A141100011500	ProTaper Thermafil Obturator F5

## Материал для восстановления корневых каналов ProRoot® MTA

Превосходный материал для восстановления корней с составом на водной основе, обеспечивающим естественное отверждение во влажной среде. ProRoot MTA устойчив к краевой проницаемости и уменьшает миграцию бактерий, а также способствует нормальному заживлению без воспаления тканей.



### Наборы ProRoot® MTA

		! MTA
A040500000100	ProRoot MTA (Белый) – 5 пакетиков по 1 г материала	
A040500000200	ProRoot MTA (Белый) – 2 пакетика по 1 г материала	

### ProRoot® MTA Kit

2x1 г ProRoot MTA  
 Эндодонтический ручной аппликатор (1 шт.)  
 Операционный ручной аппликатор 0/0 (1 шт.)  
 Операционный ручной аппликатор 1/3 (1 шт.)  
 Операционный ручной аппликатор 2/4 (1 шт.)  
 Трубки № 1 (8 мм)  
 Трубки № 2 (4 мм)  
 Шпатель (5 шт.)  
 Блокнот для замешивания (1 шт.)

A040600000100	ProRoot MTA Kit
---------------	-----------------



### ProRoot® MTA MAP System Вводный NiTi набор

Для стоматологов, регулярно использующих ProRoot MTA, но не пользующихся специальным инструментом для его внесения



A06620000000	MAP System Intro Kit NiTi
A06622GR00000	MAP System Intro Kit NiTi 2gr

### ProRoot® MTA MAP System Универсальный набор

Для эндодонтистов, регулярно использующих MTA и периодически выполняющих хирургические вмешательства на передних зубах



A06630000000	MAP System Universal Kit NiTi
--------------	-------------------------------

### ProRoot® MTA MAP System Хирургический набор

Для эндодонтистов, занимающихся хирургией на постоянной основе.



A06640000000	MAP System Surgical Kit
--------------	-------------------------

### ProRoot® MTA MAP System Kit Усовершенствованный

Модификация пистолета MTA (до универсального набора)

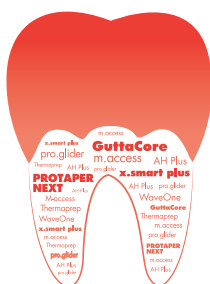


A066300000200	MAP System Kit Upgrade to Universal
---------------	-------------------------------------


# РЕСТАВРАЦИЯ



## ЭНДОДОНТИЯ



## РЕСТАВРАЦИЯ

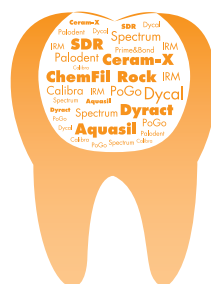

## ПРОФИЛАКТИКА



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ СТОМАТОЛОГИИ



### Prime&Bond® NT™

Prime&Bond® NT - универсальный однокомпонентный праймер и адгезив, с уникальным нано-наполнителем в составе, для обеспечения адгезии композитов и компомеров к эмали и дентину, а также к металлу и керамике. Уменьшение количества компонентов и этапов нанесения упрощает использование, при этом сохраняя великолепную силу адгезии и защиту против микроподтеканий.

60667273	Prime&Bond NT 1 шт. флакон 3.5 мл
60667240	Prime&Bond NT 2 шт. флакон 4.5 мл.
60667198	Апликаторы 100 шт.

### XP BOND®

XP BOND — Универсальный адгезив тотального протравливания, который обеспечивает выполнение работ экстра-класса благодаря высокой силе бондинга к эмали и дентину, легкому и комфортному применению и высокому уровню технических характеристик.

- Одна бутылочка/один слой
- Не нужны втирающие движения
- Хороший контроль адгезивного слоя
- Новая полупрозрачная бутылочка

60667406	XP BOND флакон 4.5 мл.
60667403	XP BOND флакон 4.5 мл. 2 шт.





### Xeno® V+

Xeno V+ — это однокомпонентный самопротравливающий адгезив.

Он обладает следующими свойствами:

- Обеспечивает высокую силу адгезии к дентину и эмали
- Не требует смешивания, простота нанесения
- Низкий показатель испарения
- Продленное рабочее время (до 30 мин. при закрытой палетке ClixDish)
- Новое! Ускоренный режим полимеризации — 10 секунд!
- Не требует специальных условий хранения

60667318 1 шт. флакон 3.5 мл.



### DETREY® Протравочный гель 36

Гель на основе фосфорной кислоты для протравливания эмали зубов и кондиционирования дентина.

60615208 2 шприца, 3 мл протравочного геля, аппликационные иглы 25 шт.

60615209 10 шприцов, 3 мл протравочного геля, аппликационные иглы 50 шт.

60615204 Аппликационные иглы 25 шт. для Detrey Conditioner 36 шт.



### Calibra® Complete Комплексный набор

Эстетический композитный цемент Calibra® - композитный цемент светового, двойного или самоотверждения, обладающий высокой прочностью и совместимый с адгезивными системами, включая Prime&Bond NT и XP BOND.

5 шт. шприцев базовых Calibra, 2 г. каждый:  
Светлый, Средний, Темный, Прозрачный, Опаковый  
2 шт. шприца катализатора Calibra, 2 г. каждый:  
(Стандартная и высокая вязкость)  
бутылочка адгезива Prime&BondNT, 4.5 мл.  
бутылочка самоотверждаемого активатора  
Self-CureActivator, 4.5 мл.  
шприц геля для кондиционирования  
ToothConditionerGel, 3 мл.  
Держатель для кисточек, кисточки одноразовые (50 шт.),  
3 шт. палетки, палочка для смешивания, иглы  
аппликационные (25 шт.),  
Инструкция по применению

607060 Calibra Complete Kit

### Calibra® Пробный набор

5 шт. шприцев пробных Calibra Try-In Paste, 1.8г. каждый:  
Светлый, Средний, Темный, Прозрачный

607058 Calibra Try-In Kit

### Calibra® Calibra операционный набор

2 шт. шприца базовых Calibra, 2 г. каждый:  
Светлый, прозрачный  
2 шприца катализатора Calibra, 2 г. каждый:  
Стандартная и высокая вязкость  
бутылочка адгезива Prime&BondNT, 4.5 мл.  
бутылочка самоотверждаемого активатора  
Self-CureActivator, 4.5 мл.  
шприц Calibra силиконовый агент, 3 мл.  
Держатель для кисточек, кисточки одноразовые  
3 шт. палетки, палочка для смешивания, иглы  
аппликационные

607059 Calibra Operator Kit

### Calibra® Катализатор

607068 1 шт. шприц катализатора Calibra,  
стандартная вязкость, 2 г.

607069 1 шт. шприц катализатора Calibra, высокая  
вязкость, 2 г.

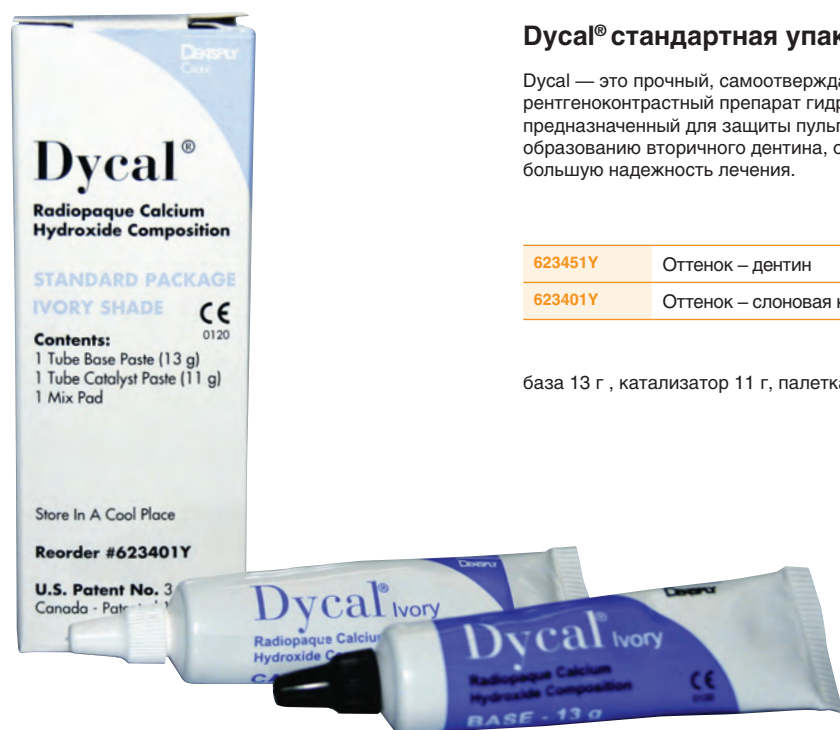
### Calibra® Силиконовый агент

607080 1 шт. шприц Calibra силиконовый агент,  
3 мл.  
25 аппликационных игл

**Calibra® База**

1 шприц 2 г.

607061	Calibra Refill – Светлый
607062	Calibra Refill – Средний
607063	Calibra Refill – Темный
607064	Calibra Refill – Прозрачный
607065	Calibra Refill – Опаковый

**Dycal® стандартная упаковка**

Dycal — это прочный, самоотверждаемый, рентгеноконтрастный препарат гидроокиси кальция, предназначенный для защиты пульпы, способствует образованию вторичного дентина, обеспечивающий большую надежность лечения.

623451Y	Оттенок – дентин
623401Y	Оттенок – слоновая кость

база 13 г, катализатор 11 г, палетка



### Integrity® TempGrip™

Integrity TempGrip — это временный, не содержащий эвгенола, цинк-оксидный цемент, применяющийся для не прямых реставраций (временных или ограниченно цементированных реставраций). Физические свойства цемента были оптимизированы, что позволяет добиться надежной фиксации, а также обеспечивает легкое снятие и очистку зуба после снятия реставрации.

666450	Refill Pack – 2 шт. 9 г шприцев 20 смесительных наконечников коричневый
666460	Mixing Tips – 50 шт. Смесительных наконечников коричневый



### IRM®

IRM — это цинк-оксид-эвгенольный цемент, усиленный полимером, используемый для проведения временных реставраций или как прокладочный материал. Среди различных способов применения выделяются следующие:

- Реставрации молочных зубов
- Срочная реставрация
- Лечение кариеса.

60661500	1шт. 40 г порошок, 1 шт. 15 мл жидкость
60661520	1шт. 40 г порошок
60661510	1шт. 15 мл жидкость
610200	50 шт. капсул ( по 0,35 г)



## SmartCem® 2

SmartCem 2 является двухкомпонентным самоадгезивным высокопрочным цементом двойного отверждения. Цемент SmartCem 2 сочетает в себе эстетику, высокую адгезию, что позволяет применять его для постоянной цементировки непрямых реставраций, вкладок типа «инлей» и «онлей», коронок, мостов и штифтов.

## SmartCem® 2 Вводный набор

5 шт. шприцев (оттенки: светлый, средний, темный, полупрозрачный и матовый), 50 шт. смесительных наконечников

669001	SmartCem® Introductory Kit
--------	----------------------------



## SmartCem® 2 отдельные упаковки

2 шт. шприца SmartCem™2, 5 г каждый  
20 шт. смесительных наконечников

669012	Оттенок – Светлый
669013	Оттенок – Средний
669014	Оттенок – Темный
669015	Оттенок – Прозрачный
669016	Оттенок – Опаковый

## SmartCem® Аксессуары

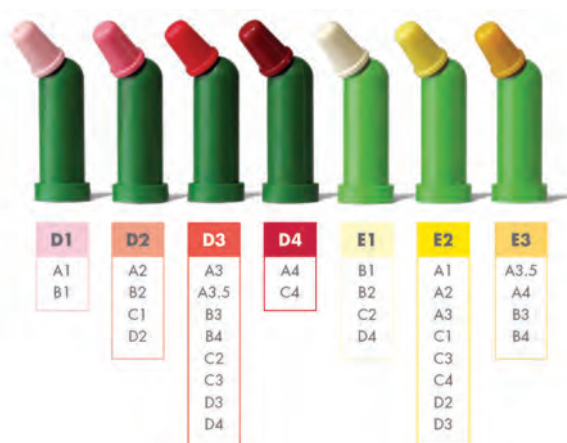
50 шт. смесительных наконечников

669005	Mixing Tips
--------	-------------



Ceram•X® – Просто. Естественно. Эстетично.

*ceram•x* duo<sup>+</sup>  
nano ceramic restorative



Производимый на основе новейших нанокерамических технологий с нанонаполнителями (средний размер: 10 нм) и наночастицами (средний размер: 2,3 нм), Ceram X представляет собой универсальный композитный материал с уникальной упрощенной системой оттенков, что дает возможность легко добиться естественной эстетики у каждого пациента.

- Материал выпускается всего в 7 оттенках, охватывающих всю систему VITA
- Новейшая нано-керамическая технология, со значительно меньшим выделением мономеров<sup>2</sup>
- Длительное рабочее время для внесения материала и придания ему формы
- Высокий показатель трещиностойкости
- Композит предназначен для прямых реставраций полостей всех классов передней и боковой группы зубов

<sup>1</sup>VITA является зарегистрированным товарным знаком компании VITA Zahnfabrik & Co. KG.

<sup>2</sup> Polydorou O. с соавт. Long-term release of monomers from modern dental-composite materials. (Высвобождение мономеров из современных стоматологических композитных материалов при долговременном использовании).

European Journal Oral Sciences 2009; 117: 68–75.



### Ceram•X® duo+

Двойная система прозрачности включает всего четыре дентинных оттенка (и отбеленный дентин) и три оттенка эмали, имитирующих естественную анатомию зуба. Оттенки полностью охватывают диапазон оттенков по шкале VITA, что позволяет легко добиться высокоэстетичных реставраций.

**Ceram-X® duo+ Отдельные оттенки (компьюлы)**

20 шт. компьютер по 0.25 г в упаковке

60701301	Compules Tips Refill D1 (A1, B1)
60701302	Compules Tips Refill D2 (A2, B2, C1, D2)
60701303	Compules Tips Refill D3 (A3, A3.5, B3-4, C2-3, D3-4)
60701304	Compules Tips Refill D4 (A4, C4)
60701305	Compules Tips Refill DB (Bleach)
60701307	Compules Tips Refill E1 (B1-2, C2, D4)
60701308	Compules Tips Refill E2 (A1-A3, C1, C3-4, D2-3)
60701309	Compules Tips Refill E3 (A3.5, A4, B3-4)

**Ceram-X® duo+ Стартовый набор (компьюлы)**

40 шт. компьютер (по 7 шт. каждого оттенка: D2, D3, E3, E2; по 3 шт. каждого оттенка: D1, D4, DB, E1)  
 2 шт. наклейки i-Shade Labels  
 пистолет для компьютер Compules® Tip Gun  
 смесительная палетка Dappen Dish,  
 50 шт. канюли  
 инструкция

60701310	Ceram-X duo+ Compules Starter Kit
----------	-----------------------------------

**Ceram-X® duo+ Стартовый набор (шприцы)**

7 шт. шприцов по 3 г каждый  
 (оттенка D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3)  
 2 наклейки i-Shade Labels  
 инструкция по моноцвету  
 инструкция

60701350	Ceram-X duo Syringe Starter Kit
----------	---------------------------------

**Ceram-X® duo+ Отдельные оттенки (шприцы)**

шприц 3 г

60701351	Syringe Refill D1 (A1, B1)
60701352	Syringe Refill D2 (A2, B2, C1, D2)
60701353	Syringe Refill D3 (A3, A3.5, B3-4, C2-3, D3-4)
60701354	Syringe Refill D4 (A4, C4)
60701355	Syringe Refill DB (Bleach)
60701357	Syringe Refill E1 (B1-2, C2, D4)
60701358	Syringe Refill E2 (A1, A2, A3, C1, C3-4, D2-3)
60701359	Syringe Refill E3 (A3.5, A4, B3-4)

## Ceram•X® mono+

Нано-керамический композит, который включает в себя всего 7 оттенков с промежуточной прозрачностью между эмалью и дентином. Рекомендован для реставраций всех классов на жевательной группе зубов, а также для врачей, которые предпочитают простые и эффективные техники реставрации.



### Ceram•X® mono+ Стартовый набор (компьюлы)

40 шт. компьютер (8 шт. оттенков M2, M5, M6;  
4 шт. оттенка M1, M3, M4, M7)  
2 шт. наклейки i-Shade Labels  
пистолет для компьютер  
смесительная палетка  
канюли 50 шт.  
инструкция

60701410 Ceram•X mono+ Compules Starter Kit



### Ceram•X® mono+ компактный набор (шприцы)

4 шприца по 3г. каждый  
(оттенки: M1, M2, M5, M6)  
Адгезив Prime & Bond NT 4,5 мл  
Кондиционер

60701408 Compact Kit Ceram•X mono+ Syringe





### Ceram-X® моно+ отдельные оттенки (компьюлы)

20 шт. компьютер по 0,25 г

60701411	Compules Tips Refill M1 (A1, B1)
60701412	Compules Tips Refill M2 (A2, B2)
60701413	Compules Tips Refill M3 (C1, D2)
60701414	Compules Tips Refill M4 (C2, C3, D4)
60701415	Compules Tips Refill M5 (A3, D3)
60701416	Compules Tips Refill M6 (A3.5, B3, B4)
60701417	Compules Tips Refill M7 (A4, C4)

### Ceram-X® моно+ шкала оттенков

60701332	1 шт. Shade Guide
----------	-------------------



### Ceram-X® моно+ Стартовый набор (шприцы)

7 шт. шприцов по 3 г каждый  
(цвета M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7)  
2 шт. наклейки i-Shade  
инструкция для монорасцветки  
смесительная палетка  
50 шт. канюли  
инструкция

60701510	Ceram-X mono+ Syringe Starter Kit
----------	-----------------------------------

### Ceram-X® моно+ Отдельные оттенки (шприцы)

Шприц 3 г

60701511	Syringe Refill M1 (A1, B1)
60701512	Syringe Refill M2 (A2, B2)
60701513	Syringe Refill M3 (C1, D2)
60701514	Syringe Refill M4 (C2, C3, D4)
60701515	Syringe Refill M5 (A3, D3)
60701516	Syringe Refill M6 (A3.5, B3, B4)
60701517	Syringe Refill M7 (A4, C4)



### Esthet-X® HD пробный набор (компьюлы)

20 шт. компьютер (0,25 г каждая)  
 5 компьютер каждого оттенка: YE, A1, A2, A2-O  
 3 шт. PoGo (чашка, конус, диск)  
 3 шт. Enhance (чашка, конус, диск)

**630604** Esthet-X HD полный набор (компьюлы)

### Esthet-X® HD

Esthet X HD — это светоотверждаемый, рентгеноконтрастный композитный материал для реставрации передней и боковой групп зубов. Esthet X HD обладает непревзойденными физическими свойствами для долгосрочных реставраций. Благодаря полному набору оттенков и степеней прозрачности, его можно применять как композитный материал одной, двойной или тройной прозрачности для высокоэстетичных реставраций.

### Esthet-X® HD Esthet-X® HD вводный набор (компьюлы)

60 шт. компьютер Compules® Tips (0,25 г каждая)  
 5 шт. каждого оттенка: CE, YE; 10 шт. каждого оттенка: A1, A2, A3, A3.5, A2-O  
 пистолет для компьютер  
 расцветка Esthet-X® HD True Match® Shade Guide  
 50 шт. минибраш  
 10 шт. Prime&Bond® NT® унидозы (0,125 мл каждая)  
 подставка для унидоз Unit Dose Holder; кольцо Palodent® BiTine® Round Ring  
 5 шт. матрицы Palodent® Standard Matrices  
 гелиевый кондиционер для протравки в шприце Caulk® 34%  
 25 шт. аппликаторы Applicator Tips; шприц Esthet-X® flow Syringe (1,3 г)  
 15 шт. аппликационные иглы Esthet-X® flow Syringe Tips

**630601** Esthet-X HD Compules Tips Intro System Kit

### Esthet-X® HD Полный набор (компьюлы)

156 шт. компьютер Compules® Tips (по 0,25 г каждая)  
 3 шт. каждого оттенка: AE, GE, A4, B5/DY, C4, D3, WO, A4-O, B2-O, C1-O, C4-O, D3-O  
 5 шт. каждого оттенка: CE, WE, YE, W, XL, B1, B3, C1, C2, C3, C5/XGB, D2, U  
 10 шт. каждого оттенка: A1, A2, A3, A3.5, A2-O  
 пистолет для компьютер Compules® Tips Gun  
 расцветка Esthet-X® HD True Match® Shade Guide  
 50 шт. минибраш Flocked Applicator Tips  
 5 шт. чашки PoGo® Micro-Polisher Cups  
 5 шт. конусы PoGo® Micro-Polisher Points  
 10 шт. диски PoGo® Micro-Polisher Discs  
 5 шт. чашки Enhance™ Finisher Cups  
 5 шт. конусы Enhance™ Finisher Points  
 10 шт. диски Enhance™ Finisher Discs  
 10 шт. Prime&Bond® NT® унидозы (0,125 мл каждая)  
 подставка для унидоз Unit Dose Holder  
 гелиевый кондиционер для протравки в шприце Caulk® 34% Tooth Conditioner Gel Syringe (3 мл)  
 25 шт. аппликаторов Applicator Tips; шприц Esthet-X® flow Syringe (1.3 г)  
 15 шт. аппликационные иглы Esthet-X® flow Syringe Tips

**630600** Esthet-X HD Compules Tips Complete System

Esthet.X® HD отдельные оттенки — 20 или 10 компьютер (0,25 г каждая)

<b>630610</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. Enamel, clear эмаль	<b>630626</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. C1
<b>630611</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. Enamel, белая эмаль	<b>630627</b>	Compules Tips Refill – 20 шт. C2
<b>630612</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. Enamel, желтая эмаль	<b>630628</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. C3
<b>630613</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. Enamel, янтарная эмаль	<b>630629</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. C4
<b>630614</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. Enamel, серая эмаль	<b>630630</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. C5/XGB
<b>630615</b>	Compules Tips Refill – 20 шт. белый	<b>630631</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. D2
<b>630616</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. XL	<b>630632</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. D3
<b>630617</b>	Compules Tips Refill – 20 шт. A1	<b>630633</b>	Compules Tips Refill – 20 шт. универсальный
<b>630618</b>	Compules Tips Refill – 20 шт. A2	<b>630634</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. W-O
<b>630619</b>	Compules Tips Refill – 20 шт. A3	<b>630635</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. A2-O
<b>630620</b>	Compules Tips Refill – 20 шт. A3.5	<b>630636</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. A4-O
<b>630621</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. A4	<b>630637</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. B2-O
<b>630622</b>	Compules Tips Refill – 20 шт. B1	<b>630638</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. C1-O
<b>630623</b>	Compules Tips Refill – 20 шт. B2	<b>630639</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. C4-O
<b>630624</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. B3	<b>630640</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. D3-O
<b>630625</b>	Compules Tips Refill – 10 шт. B5/DY		



## Esthet-X® HD полный набор (шприцы)

31 шт. 3 г шприцы, оттенков:  
CE, WE, W, XL, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1,  
B2, B3, B5/DY, C1, C2, C3, C4, C5/XGB,  
D2, D3, U, YE, AE, GE, WO, A2-O, C1-O,  
C4-O, D3-O.

630711	Esthet-X HD полный набор (шприцы)
--------	-----------------------------------



## Esthet-X® HD вводный набор (шприцы)

5 шприцов по 3 г, каждого оттенка  
(A1, A2, A3, YE, A2-O)  
адгезив Prime&Bond NT (4,5мл)  
1 шт. шприц кондиционера Caulk 34%  
Enhance (чашка, конус, диск)  
Palodent (кольцо, 5 матриц)  
рукоятка кисти  
палетка  
40 шт. кисточек

630715	Esthet.X® HD вводный набор (шприцы)
--------	-------------------------------------

## Esthet-X® HD отдельные оттенки

шприц 3 г

630650	Syringe Refill – C-E Enamel, clear
630651	Syringe Refill – W-E Enamel, белый
630652	Syringe Refill – Y-E Enamel, желтый
630653	Syringe Refill – A-E Enamel, янтарный
630654	Syringe Refill – G-E Enamel, серый
630655	Syringe Refill – белый
630656	Syringe Refill – XL
630657	Syringe Refill – A1
630658	Syringe Refill – A2
630659	Syringe Refill – A3
630660	Syringe Refill – A3.5
630661	Syringe Refill – A4
630662	Syringe Refill – B1
630663	Syringe Refill – B2
630664	Syringe Refill – B3
630665	Syringe Refill – B5/DY
630666	Syringe Refill – C1
630667	Syringe Refill – C2
630668	Syringe Refill – C3
630669	Syringe Refill – C4
630670	Syringe Refill – C5/XGB



630671	Syringe Refill – D2
630672	Syringe Refill – D3
630673	Syringe Refill – универсальный
630674	Syringe Refill – W-O
630675	Syringe Refill – A2-O
630676	Syringe Refill – A4-O
630677	Syringe Refill – B2-O
630678	Syringe Refill – C1-O
630679	Syringe Refill – C4-O
630680	Syringe Refill – D3-O

## Esthet-X® HD шкала оттенков TruMatch

630603	1шт. Shade Guide
--------	------------------

### Spectrum®TPH®3

Spectrum TPH3 — это субмикронный гибридный композит для реставраций как передней, так и боковой группы зубов. С момента выхода на рынок в январе 1996 года Spectrum TPH3 получил мировое признание благодаря простоте применения, высокой эстетике и проверенным клиническим характеристикам. Spectrum TPH3 идеален для использования вместе с Prime&Bond® NT™, универсальной адгезивной системой в одном флаконе. Материал выпускается также в компьютерях, что обеспечивает простоту применения и точность внесения материала, а запатентованная система идентификации компьютер Compules Identification System (CIS) обеспечивает легкость выбора оттенка при ежедневном применении.



### Spectrum®TPH®3 стартовый набор (компьюлы)

- 52 шт. компьютеры (0,25 г в каждой)
- 7 шт. каждого оттенка A2/A3/A3.5/C2
- 3 шт. каждого оттенка O-A2/O-A3.5/A4/B1/I-B1/B2/B3/C3
- пистолет для компьютер
- шкала оттенков
- флакон адгезива Prime&Bond® NT, 4,5 мл
- 50 шт. аппликаторов
- 3 мл кондиционера DETREY® Conditioner 36
- 25 шт. аппликационных игл
- инструкция по применению

60605120 Spectrum®TPH®3 Starter kit Compule

### Spectrum®TPH®3 стартовый набор (шприцы)

- 6 шприцев по 4,5 г
- по одному каждого оттенка (A2/A3/A3.5/O-A2/O-A3.5/B2)
- Prime&Bond® NT, 4,5 мл
- 50 шт. аппликаторов
- 3 мл кондиционер DETREY® Conditioner 36
- 25 шт. аппликационных игл

60605337 Spectrum®TPH®3 Starter kit Syringe



### Spectrum®TPH®3 отдельные оттенки (компьюлы)

20 или 10 шт. компьютер (0,25 г каждая)

- |          |   |
|----------|---|
| 60605201 | Compules Tips Refill Pack A1 – 20 шт.                     |
| 60605202 | Compules Tips Refill Pack A2 – 20 шт.                     |
| 60605204 | Compules Tips Refill Pack A3.5 – 20 шт.                   |
| 60605205 | Compules Tips Refill Pack A4 – 10 шт.                     |
| 60605206 | Compules Tips Refill Pack B1 – 20 шт.                     |
| 60605207 | Compules Tips Refill Pack B2 – 20 шт.                     |
| 60605208 | Compules Tips Refill Pack B3 – 20 шт.                     |
| 60605211 | Compules Tips Refill Pack C2 – 20 шт.                     |
| 60605212 | Compules Tips Refill Pack C3 – 20 шт.                     |
| 60605213 | Compules Tips Refill Pack C4 – 10 шт.                     |
| 60605215 | Compules Tips Refill Pack D3 – 10 шт.                     |
| 60605220 | Compules Tips Refill Pack O-A2<br>опакующий – 10 шт.      |
| 60605221 | Compules Tips Refill Pack O-A3.5<br>опакующий – 10 шт.    |
| 60605222 | Compules Tips Refill Pack B1 Inc<br>режущий край – 10 шт. |

### Spectrum®TPH®3 Shade Guide

60605230 1 шт. Spectrum Shade Guide



### Spectrum®TPH®3 отдельные оттенки (шприцы)

отдельные оттенки (шприцы)

- |          |                     |          |                       |
|----------|---------------------|----------|-----------------------|
| 60605301 | Syringe Refill A1   | 60605311 | Syringe Refill C2     |
| 60605302 | Syringe Refill A2   | 60605312 | Syringe Refill C3     |
| 60605303 | Syringe Refill A3   | 60605321 | Syringe Refill O-A3.5 |
| 60605304 | Syringe Refill A3.5 | 60605322 | Syringe Refill I-B1   |
| 60605305 | Syringe Refill A4   | 60605323 | Syringe Refill O-A2   |
| 60605306 | Syringe Refill B1   |          |                       |
| 60605307 | Syringe Refill B2   |          |                       |
| 60605308 | Syringe Refill B3   |          |                       |



# SDR – Рациональный заменить дентина

## SDR® Стартовый набор

45 шт. компьул (0,25 г каждая),  
адгезив XenoV+ (2,5 мл),  
палетка CliXdish,  
пистолет для компьул Compu Gun  
инструкция

60603000 Intro Kit



## SDR® (Smart Dentine Replacement)

SDR – это уникальный базовый текучий композитный материал для внесения большой порцией, предназначенный для реставрации боковых зубов (I и II классов), реставрации полостей I класса, формирования бугров и герметизации фиссур и ямок.

- Экономия времени до 40% по сравнению с традиционным послойным внесением композита<sup>1</sup>
- SDR характеризуется до 60% менее выраженным полимеризационным стрессом<sup>1</sup>, что позволяет вносить его порцией толщиной до 4 мм, избегая применения трудоемкой традиционной послойной техники внесения.
- SDR перекрывается стандартными композитами на метакрилатной основе.
- Нет послеоперационной чувствительности – 24-месячное клиническое исследование показало, что при использовании SDR не отмечается послеоперационной чувствительности<sup>2</sup>.
- Поразительная способность материала SDR к самовыравниванию, которая позволяет плотно адаптироваться к стенкам полости.
- Простота и эффективность внесения – инновационная система компьул обеспечивает точность внесения. Для упрощения работы SDR выпускается в одном универсальном оттенке.

<sup>1</sup> Неопубликованные данные.

<sup>2</sup> Двухлетнее клиническое исследование SDR™ проведено Dr J Burgess и Dr C Munoz.



## SDR® Компьюлы

60603002 SDR – 15 шт.

60603003 SDR – 50 шт.

## SDR® Шприцы

60603005 3-шприцевый набор SDR  
(1 г. каждый, 20 шт. аппликаторов)

60603011 10-шприцевый набор SDR  
(1 г. каждый, 60 шт. аппликаторов)

60603007 SDR аппликаторы (60 шт. аппликаторов)



### QuiXfil™

QuiXfil — это специальный композитный материал, предназначенный для жевательной группы зубов, характеризующийся очень высокой долговечностью и трещиностойкостью, а также низкой стираемостью. Реставрации, выполненные с материалом QuiXfil отличаются прочностью, благодаря технологии точного контроля наполнения была достигнута степень наполнения 66% по объему и 86% по весу.

60605610	40 шт. компьютер по 0.28 г., 2,5 мл флакон Prime&Bond NT Пистолет 50 шт. аппликаторов палетка
60605608	20 шт. компьютер по 0.28 г.



### X-flow®

X-flow — рентгеноконтрастный светоотверждаемый текучий композитный материал, идеально подходящий для изготовления реставраций в небольших полостях, использования в качестве подкладочного материала, а также для фиксации керамических и композитных вкладок.



### X-flow® Assortment Pack

16 шт. компьютер по 4 шт.  
каждого оттенка (A2, A3, B1, O-A3)  
пистолет

60608100	Ассортиментная упаковка
----------	-------------------------

### X-flow® Отдельные оттенки

16 компьютер по 0.25 г

60608102	Refill Pack A2
60608103	Refill Pack A3
60608104	Refill Pack A4
60608105	Refill Pack B1
60608107	Refill Pack A3.5
60608111	Refill Pack O-A3

**Dyract® XP**

Dyract XP - это компомер, оказывающий кариеспрофилактический эффект, предназначенный для всех классов полостей как передних, так и боковых зубов. Dyract XP высвобождает фтор и воздействует на интерпроксимальные контактные зоны реставраций зуба как кислотный буфер. Пломбы из материала Dyract XP являются логичным дополнением требуемых профилактических мер у пациентов с высоким риском возникновения кариеса.

**Dyract® XP Вводный набор**

40 шт. компюль (оттенков 10 шт. А2, 15 шт. А3, 10 шт. А3.5, 5 шт. В1),  
пистолет  
адгезив Prime&Bond® NT 3.5 мл

60604210	Intro Kit
----------	-----------

**Dyract® XP Отдельные оттенки**

20 шт. компюль по 0.25 г.

60604275	Dyract XP, оттенок А2
----------	-----------------------

60604276	Dyract XP, оттенок А3
----------	-----------------------

60604277	Dyract XP, оттенок А3.5
----------	-------------------------

60604278	Dyract XP, оттенок В1
----------	-----------------------

**ChemFil® Superior**

ChemFil Superior представляет передовую стеклоиономерную технологию и объединяет великолепные адгезивные свойства с отличными манипуляционными характеристиками и высокой эстетичностью. Материал характеризуется однородной нелипкой консистенцией для легкого внесения и дополнительной механической прочностью.

**ChemFil® Superior Вводный набор**

7 шт. порошка 10 г  
Оттенки: L, LYG, LY, DY, DG, LG, GB  
флакон лака ChemFil® Varnish, 12.5 мл  
флакон средства для очистки зубов, 10 мл  
расцветка  
флакон с дозатором для воды  
Аксессуары

60606515	ChemFil® Superior Introductory Pack
----------	-------------------------------------

**ChemFil® Superior Отдельные оттенки**

10 г порошка и аксессуары в упаковке

60606520	Refill Pack No.2 – светлый
----------	----------------------------

60606530	Refill Pack No.3 – светлый желто-серый (универсальный)
----------	--

60606540	Refill Pack No.4 – желтый светлый
----------	-----------------------------------

60606550	Refill Pack No.5 – темный желтый
----------	----------------------------------

60606560	Refill Pack No.6 – темный серый
----------	---------------------------------

60606570	Refill Pack No.7 – светлый серый
----------	----------------------------------

60606580	Refill Pack No.8 – серо-коричневый
----------	------------------------------------

60606585	Refill Pack No.2 – светлый
----------	----------------------------

60606586	Refill Pack No.3 – светлый желто-серый
----------	--

60606587	Refill Pack No.4 – желтый светлый
----------	-----------------------------------

**Палетка ChemFil® Superior**

Палетка 90 x 70 мм.

60606989	Палетка ChemFil® Superior
----------	---------------------------



# Экстра защита



**Dyract**<sup>®</sup> extra performance **XP**  
THE CARIES PREVENTING RESTORATIVE

- Продолжительное выделение фтора
- Отлично подходит для молодых, пожилых пациентов и пациентов с высоким риском развития кариеса
- Быстрое внесение, короткое время полимеризации

К лучшей стоматологии

**DENTSPLY**

Дентсплай Россия Лимитед | Москва | 129090 | проспект Мира | д.6 |  
Тел.: +7 495 988 28 08 | Факс: +7 495 988 28 08 | [www.dentsplycis.com](http://www.dentsplycis.com)

В системе Enhance® используется одинарный диск и дискодержатель — без металлической мандрели. В итоге, полностью ликвидируется возможность испортить или обесцветить реставрацию.

### Enhance® Polishing System

Финишная и полировочная система Enhance объединяет несколько продуктов, разработанных для полировки всех типов полимерных реставраций. Система состоит из одноразовых конусов, дисков и чашечек.



### Enhance® Polishing System Intro Kit

20 шт. дисков для финишной обработки  
10 шт. конусов для финишной обработки  
10 шт. чашек для финишной обработки  
шприц полировочной пасты Prisma® Gloss (стандартная)  
шприц полировочной пасты Prisma® Gloss™ extra-fine (со сверхмелким размером частиц)  
металлическая мандрель

624075 Enhance® Polishing Intro Kit

### Enhance® Polishing Полиры

624045X	Чашки для финишной обработки, 30 шт.
624055X	Конусы для финишной обработки, 30 штук
624065X	Диски для финишной обработки, 30 штук
624020	Полировочные чашки 100 шт. + 1 держатель



### Enhance® Polishing System Kit

624005 Polishing System Kit

### PoGo® – Enhance® Complete Kit

В этой революционной полировочной системе используется одноступенчатая техника для высококачественной финишной обработки всех реставраций. Систему PoGo можно использовать для полирования всех композитных, микропломбировочных, текучих и микрогибридных материалов.



### PoGo® Полиры

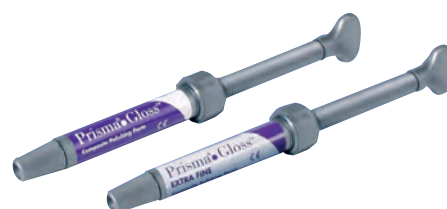
662025Y	Набор PoGo® Combo Refill (10 шт. чашек, 10 шт. конусов, 10 шт. дисков)
662023Y	Чашки PoGo® Cup Refill (30 шт.)
662010Y	Диски PoGo® Disc Refill (30 шт.)
662022Y	Конусы PoGo® Point Refill (30 шт.)
662020	Комплексный набор PoGo/Enhance Enhance полиры — по 10 шт. каждого вида (диски, конусы, чашки) PoGo полиры — по 10 шт. каждого вида (диски, конусы, чашки)

### Prisma® Gloss™

Полировочная паста Prisma® Gloss™ разработана для конечного полирования композитных реставраций и виниров. Prisma® Gloss™ и Prisma® Gloss™ Extrafine (со сверхмелким размером частиц) представляют собой однокомпонентные полировочные пасты, распределяемые в воде. Эти пасты обеспечивают реставрациям, изготовленным из композитов для фронтальной и жевательной групп зубов, превосходные гладкость и блеск поверхности. Идеальный материал для стоматологов-гигиенистов, предназначенный для полировки композитных виниров.

Шприц 4 г

631400	Стандартная
631450	Со сверхмелким размером частиц (4г.)



## Palodent® Plus

Система секционных матриц Palodent Plus, обеспечивает улучшенный доступ и визуализацию в операционном поле, а также больший комфорт для пациентов.

Предсказуемый плотный контакт и качественное краевое прилегание

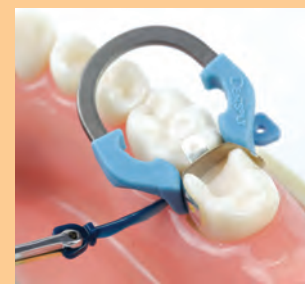
- Кольца из никель-титанового сплава с повышенной прочностью на изгиб и матрицы с перфорациями.
- Выраженный краевой гребень с одной стороны, десневой выступ с другой стороны и улучшенный изгиб матрицы для идеального прилегания к зубу и плотного контакта с клиньями.

Меньше нависающих краев и сокращение финишной обработки

- Плотное прилегание выступов кольца к клиньям и матрицам предотвращает нависание краев и сокращает время финишной обработки.

Легкое позиционирование и извлечение

- Матрицы с перфорациями, анатомические клинья и клинья с защитой упрощают установку и извлечение.
- Можно выбирать, что установить первым: матрицу, клин или клин с защитой.
- Клинья с защитой устанавливаются одним движением и можно приступать к установке следующего клина.



## Palodent® Plus Вводный набор

100 матриц по 25 шт. каждого размера: 3,5 мм; 4,5 мм; 5,5 мм; 6,5 мм.  
75 шт. клиньев по 25 шт. каждого размера: малые, средние, большие  
30 шт. клиньев с защитой по 10 шт. каждого размера: малые, средние, большие  
универсальное кольцо, узкое кольцо  
щипцы, пинцет

659700 Palodent plus Intro Kit

## Palodent® Plus Стартовый набор

20 шт. матриц (15 шт. 5,5 мм, 5 шт. 4,5 мм)  
15 шт. клиньев по 5 штук каждого размера: малые, средние, большие  
5 шт. клиньев с защитой среднего размера,  
2 шт. универсальных кольца  
щипцы  
пинцет  
Композит SDR 4 шт. компюлы

62500001 Palodent plus Starter Kit



## Palodent® Plus Матрицы

659710	50 шт. матриц, размер 3,5 мм
659720	50 шт. матриц, размер 4,5 мм
659730	50 шт. матриц, размер 5,5 мм
659750	50 шт. матриц, размер 6,5 мм
659740	100 шт. матриц, размер 5,5 мм
659860	50 шт. матриц, размер 7,5 мм

## Palodent® Plus Клинья

659780	100 шт. клиньев малых
659790	100 шт. клиньев средних
659800	100 шт. клиньев больших

## Palodent® Plus Клинья с защитой

659830	50 шт. клиньев с защитой малых
659840	50 шт. клиньев с защитой средних
659850	50 шт. клиньев с защитой больших



## Palodent® Plus Кольца

659760	2 универсальных кольца
659770	2 узких кольцах

## Palodent® Plus Щипцы

659810	1 шт. Set of Forceps
--------	----------------------

## Palodent® Plus Пинцет

659820	1 шт. Set of Tweezers
--------	-----------------------

**Palodent® Matrix System Complete Kit**

100 стандартных матриц  
 50 матриц  
 50 матриц  
 4 круглых кольца  
 2 овальных кольца

659060Y	Complete Kit
---------	--------------

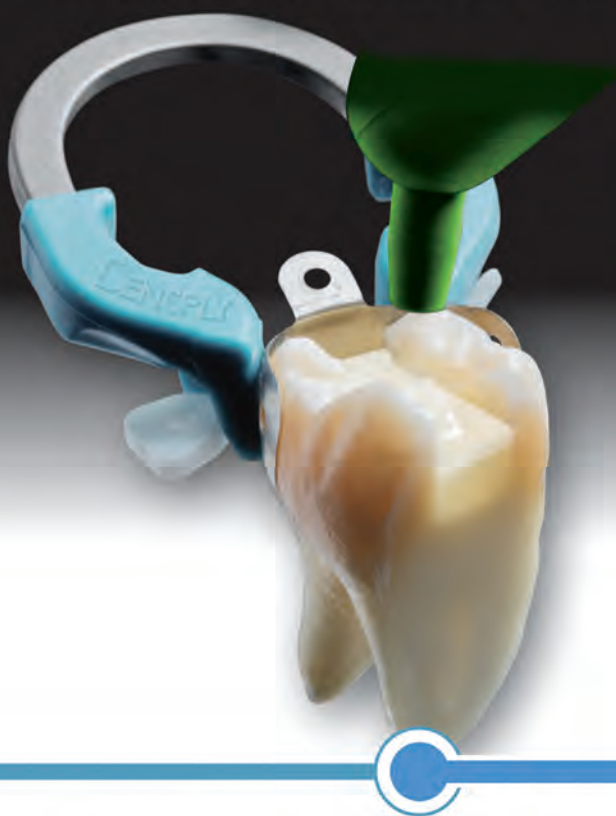
**Palodent® Matrix Комплектующие**

659010	100 шт. стандартных матриц
659015	50 шт. стандартных матриц
659020	50 шт. малых матриц
659030	50 шт. больших матриц



# ЭТАЛОН РЕСТАВРАЦИИ КЛАССА II

НАДЕЖНО. ПРОСТО. БЫСТРО.



**Palodent<sup>Plus</sup>**  
 Sectional Matrix System

**SDR<sup>®</sup>**  
 Smart Dentin Replacement

**ceram<sup>•</sup>x duo<sup>+</sup>**  
 nano ceramic restorative

## Aquasil Ultra

Слепочный материал Aquasil Ultra с выдающимися свойствами смачиваемости — это четырехфункциональный винилполисилоксановый материал, разработанный для минимизации таких проблем, как пустоты, пузырьки, разрывы и деформации. Он имеет ряд преимуществ по сравнению с другими оттисковыми материалами:

- Более высокая смачиваемость
- Высокая устойчивость к разрывам
- Исключительная точность и пространственная стабильность
- Сниженный риск возникновения пустот, пузырьков, разрывов и деформаций
- Приятный запах, обеспечивающий комфорт для пациента
- Продукт пять лет подряд завоевывал награду REALITY Five Star Award
- Идеальный оттисковый материал для имплантов.



## Aquasil Монофазная масса

678100	Monophase Standard Pack, purple – 90 мл - база 90 мл - катализатор
--------	--



## Aquasil Обычного отверждения

Aquasil soft putty — это слепочная масса очень высокой вязкости, имеющая оптимальную эластичность, обеспечивающую простое удаление материала из поднутрений. Эта слепочная масса идеальна для применения в качестве ложечного материала для методики двойного оттиска или в качестве основного слепочного материала для методики нанесения с последующей коррекцией при помощи материалов низкой или сверхнизкой вязкости.

60578320	Aquasil Soft Putty обычного отверждения баночка катализатора 450 мл. баночка базы 450 мл. 2 мерные ложки
60578321	Aquasil Soft Putty обычного отверждения экономичная упаковка 4 шт. баночка катализатора 450 мл. 4 шт. баночка базы 450 мл. 2 мерные ложки



## Aquasil Быстрого отверждения

Материал быстрого отверждения Aquasil Hard Putty — это слепочный материал очень высокой вязкости с идеальными механическими свойствами для двухэтапной техники работы паста/жидкий материал. Он обеспечивает более краткое время отверждения при более высокой твердости А по шкале Шора, что позволяет достичь большей пространственной стабильности.

60578332	Aquasil Hard Putty быстрого отверждения баночка катализатора 450 мл. баночка базы 450 мл. 2 шт. мерные ложки
60578333	Aquasil Hard Putty быстрого отверждения экономичная упаковка 4 шт. баночка катализатора 450 мл. 4 шт. баночка базы 450 мл. 2 мерные ложки



### Aquasil Ultra Light Body Wash

Aquasil Ultra Light Bodies — слепочный материал с выдающимися свойствами смачиваемости Smart Wetting®. Aquasil Ultra LV/XLV Smart Wetting® обычного и быстрого отверждения — это эластомерный оттисковый материал высокой точности и устойчивости к разрывам и деформациям с превосходными гидрофильными свойствами. Выдающиеся свойства смачиваемости материала повышают точность воспроизведения деталей на модели.

4 шт. картриджа по 50 мл  
24 шт. смешительных наконечника  
24 шт. внутриротовых наконечника

678779	Aquasil Ultra LV / Regular Set обычного отверждения
678780	Aquasil Ultra LV / Fast Set быстрого отверждения
678781	Aquasil Ultra XLV / Regular Set обычного отверждения
678882	Aquasil Ultra XLV / Fast Set быстрого отверждения

### Aquasil Ultra Оттисковая масса

4 шт. картриджа по 50 мл.  
12 шт. смешительных наконечников

678773	Aquasil Ultra монофазный материал, обычного отверждения
678775	Aquasil Ultra плотный материал, обычного отверждения
678777	Aquasil Ultra жесткий материал, обычного отверждения
678778	Aquasil Ultra плотный материал, быстрого отверждения







### Aquasil Аксессуары

60578121	40 шт. смешительных наконечников
678212	48 шт. смешительных наконечников
626382	100 шт. внутриротовых наконечников Monophase
626384	12 упаковок по 100 шт. внутриротовых наконечников Monophase

### Integrity®

Integrity® — материал для изготовления временных мостов и коронок. Автоматически смешивающийся двухкомпонентный материал на основе многофункциональных метакрилатных эфиров. Подходит как для краткосрочных, так и долгосрочных временных коронок и мостов.



### Integrity® Отдельные оттенки

картридж 75 мл,  
16 шт. смешительных наконечников

60578345	Refill A1
60578346	Refill A2
60578347	Refill A3.5
60578348	Refill B1

### Integrity® Аксессуары

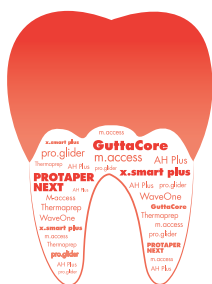
666260	Пистолет для внесения материала
60578349	50 шт. смешительных наконечников Integrity Mixing Tips




# ПРОФИЛАКТИКА



## ЭНДОДОНТИЯ



## РЕСТАВРАЦИЯ

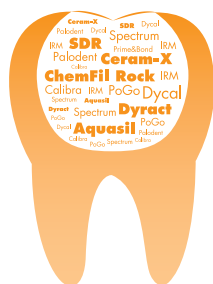

## ПРОФИЛАКТИКА



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ СТОМАТОЛОГИИ

**СКОРО  
НА РЫНКЕ**

**Паста NUPRO® Sensodyne обеспечивает немедленное снижение чувствительности при непревзойденном качестве полировки и удаления пятен.**

Усиленная с помощью Novamin, кальциево-натриевого фосфосиликата, NUPRO Sensodyne является профилактической пастой, которая обеспечивает десенсибилизацию зуба, закрытие дентинных канальцев, удаление пятен. Пасту также можно использовать до процедуры и очистки. Выпускается с двумя доступными степенями абразивности и с двумя приятными вкусами.



**Seal&Protect™ — это первый материал, который защищает обнаженный дентин зуба от истирания зубной щеткой.**

При нанесении на дентин корня эта полимеризуемая оболочка механически укрепляет дентин, повышая твердость его поверхности. Такая обработка также идеальна для профилактики повреждений V класса. Противомикробное действие триклозана снижает образование бляшек и борется с кариес-ассоциированными бактериями. В отличие от традиционных противомикробных веществ, триклозан не имеет отрицательных побочных эффектов, таких как горький вкус или обесцвечивание.

60604700	Seal&Protect стандартный набор флакон 4,5 мл Аксессуары
60604705	Seal&Protect экономичный набор 2 флакона, каждый по 4.5 мл





**На протяжении более пяти десятилетий стоматологи отдают предпочтение клиническим преимуществам, которые предоставляют ультразвуковые скейлеры. В клинических и независимых исследованиях было доказано, что никакой другой метод удаления зубных отложений с лингвальных и с супра-лингвальных областей не может превзойти ультразвуковой скейлинг по скорости, эффективности и универсальности.**







DENTSPLY™ предлагает широкий ассортимент магнитострикционных ультразвуковых скейлеров Cavitron® (30K и 25K), поэтому Вы можете выбрать тот аппарат, который в наибольшей степени подходит для Ваших нужд, вне зависимости от того, должен ли это быть портативный прибор, обеспечивающий Вам мобильность, или же комбинированная система скейлинга и полирования воздухом для наибольшего удовлетворения потребностей пациента.

Все аппараты с наконечниками 30K (Cavitron® Jet Plus™, Cavitron® Plus™ и Cavitron® Select™ SPS™) поддерживают технологию Sustained Performance System (SPS), которая позволяет добиться постоянного баланса между эффективностью скейлинга и комфортом пациента, сохраняя клиническую эффективность, когда наконечник прибора встречает прочные отложения. Это позволяет клиницисту проводить эффективный скейлинг даже при установке прибора на более низкую мощность. Технология SPS усиливается технологией 'Blue Zone™', обеспечивающей больший комфорт для пациента.

Скейлер Cavitron® Jet Plus™ с технологией Tap-On™ — является последней версией аппарата Cavitron®, в котором сохранены многие существующие характеристики с некоторыми инновациями. Аппарат Cavitron® Jet Plus теперь выпускается с ножной педалью Tap-On™, помогающей снизить нагрузку на ногу и стопу. Для активации на педаль достаточно быстро нажать один раз, а во время проведения процедуры ногу можно снять с педали, после чего необходимо снова нажать на педаль для деактивации. Кроме того, эти аппараты теперь выпускаются с встроенным автоматическим циклом в режиме Prophy, в котором осуществляется автоматическое переключение между воздушной полировкой и омытием без необходимости нажимать на ножную педаль. Можно выбрать короткий, средний или длинный цикл в режиме Prophy. Технология Tap-On™ активирует автоциклы в режиме Prophy.

Наряду с многосторонним выбором ультразвуковых инструментов, компания DENTSPLY™ предлагает еще более широкий ассортимент насадок для скейлинга, что позволяет сделать выбор в зависимости от конкретного клинического случая. С момента выхода на рынок аппаратов Cavitron®, компания DENTSPLY™ продолжила свою традицию, выпуская инновационные продукты, которые открывают возможности для повышения производительности и большего комфорта пациентов.

**Линейка скейлеров Cavitron**

	 Cavitron Jet Plus (30K)	 Cavitron Select SPS (30K)	 Cavitron Select (25K)	 Cavitron Bobcat Pro (25K)
Скейлинг	●	●	●	●
Полировка воздухом	●			
Портативность (с резервуаром для воды)		●	●	
Беспроводная ножная педаль	●			
Режим «Blue Zone»	●	●		
Автоклавируемый наконечник	●	●		
Режим "Hands free"	●	●		
Регулировка омытия непосредственно на наконечнике	●	●	●	
Tap-On™ Технология	●			
SPS™ Технология	●	●		





### Cavitron® Jet Plus™ Tap-On™

Аппарат Cavitron® Jet Plus™ оборудован технологией SPS™, которая позволяет проводить профилактику и лечение периодонтита. Аппарат выпускается с педалью Tap-On, помогающей снизить нагрузку на ногу и стопу; с автоциклами в режиме Prophy, обеспечивающем автоматическую циклическую смену режимов полировки воздухом и промывку без нажатия на педаль; в режиме Turbo мощность повышается до 25% по сравнению с режимом Boost. Система поддерживает полировку воздухом и ультразвуковое удаление периодонтических отложений с турбо усилением, режим Blue Zone™ и ультразвуковой лаваж глубоких карманов с доставкой лекарственных препаратов. Система решений для практической профилактической стоматологии.

90116E	Cavitron® Select™ 1 шт. Cavitron® Select™ с резервуаром для жидкости, 1 шт. Насадка 25K FSI® 1000
90112E	Cavitron® Select™ 1 шт. Cavitron® Select™ без резервуара для жидкости 1 шт. Насадка 25K FSI® 1000
81313E	Cavitron® Select™ SPS® 1 шт. Cavitron® Select™ SPS® с резервуаром для жидкости, 1 шт. Насадка 30K FSI® 1000
81307E	Cavitron® Select™ SPS® 1 шт. Cavitron® Select™ SPS® без резервуара для жидкости 1 шт. Насадка 30K FSI® 1000

### Cavitron® Jet Plus™ насадка Prophy-Jet



63740	Prophy-Jet Insert
-------	-------------------



### Порошок Cavitron® Prophy-Jet

Подходят для аппаратов Cavitron® Jet Plus и Cavitron® Jet SPS. Используются для удаления трудноудаляемых пятен, налета и мягких отложений. Содержит бикарбонат натрия. Со вкусом мяты.

130002V	Prophy-Jet® Чистящий порошок 6 флаконов по 364 г каждый, со вкусом перечной мяты
---------	---

### Порошок Cavitron® Jet-Fresh Mint

Революционная безнатриевая формула порошка, состоящего из тригидрокси алюминия. Cavitron® Jet-Fresh обладает приятным освежающим мятным вкусом и способностью к эффективному удалению пятен. Уникальные текучие свойства делают порошок безвредным для оборудования.

130203	JET-Fresh® грофилактический порошок с мятным вкусом ; 6 флаконов по 364 г.
--------	---

### Cavitron® Select™ SPS™

Ультразвуковой скейлер Cavitron® Select™ SPS® — это компактный портативный аппарат, имеющий автономный резервуар для жидкости с уникальной технологией SPS (Sustained Performance System — система стабильной эксплуатации). Данная конструкция имеет мощность на выходе в 30000 колебаний в минуту, при этом не требуется подключение к водопроводу.

81313E	Cavitron® Select™ SPS® Cavitron® Select™ SPS® Насадка 30K FSI® 1000
81307E	Cavitron® Select™ SPS® Cavitron® Select™ SPS® без резервуара для жидкости Насадка 30K FSI® 1000
90148	Cavitron® Select™ SPS®/ Cavitron® Select™ резервуар для жидкости



### Cavitron® Select™

Cavitron® Select™ был первым портативным аппаратом Cavitron с автономным резервуаром для воды. Компактный портативный аппарат с технологией выработки колебаний частотой 25 кГц. Процедуру скейлинга с его помощью можно проводить буквально в любом месте, где есть источник питания. Именно поэтому аппарат Cavitron® Select™ так прост в использовании.

### Cavitron® Select™

90116E	Cavitron® Select™ (с резервуаром для жидкости) 230V EU,+ Free Cavitron Insert 25K FSI -1000
90112E	Cavitron® Select™ (без резервуара для жидкости) 230V EU,+ Free Cavitron Insert 25K FSI -1000

### Система воздушной полировки Cavitron® Prophy-Jet®

Система воздушной полировки Prophy-Jet® удаляет трудноудаляемые пятна, бляшки и мягкие отложения с большей эффективностью, чем полировка резиновым колпачком или ручной кюретой. Может быть использован до установки пломб, соединяющих ортодонтические крепления, и во время периодонтальной операции. Продается отдельно.

80855	Cavitron Prophy Jet 230V G122U
-------	--------------------------------





### Bobcat Pro™

Ультразвуковой скейлер Bobcat Pro сочетает в себе безопасность, практичность, надежность в эксплуатации и качество в элегантной современной форме. Аппарат подходит для использования широкого ассортимента 25K насадок Cavitron.

<b>81203</b>	Bobcat Pro 220V, EU plug with 25K FSI - 1000 Insert
--------------	---

<b>81204</b>	Bobcat Pro 230V, EU plug with 25K FSI - 1000 Insert
--------------	---



### DualSelect™

Аппарат для сохранения водных линий вашей установки в чистом состоянии, без риска обсеменения и дальнейшего развития микроорганизмов в системе. Полностью отвечает современным гигиеническим нормам. Диспенсер Dual Select предлагает Вам выбор скейлинга и воздушно-абразивной обработки с помощью медикаментозных растворов или воды из отдельного резервуара.

<b>80528</b>	Dual Select Dispensing System Аппарат
--------------	---------------------------------------

<b>80529</b>	Dual Select Accessory Pack – 2 резервуара для жидкостей
--------------	---

<b>80530</b>	Dual Select Disinfectant резервуар для дезинфекции
--------------	--

### Cavitron® PowerLine™ Inserts (FSI®)

Специально разработаны для эффективного удаления более плотных зубных отложений. Серия насадок PowerLine™ (FSI®) обеспечивает более эффективный скейлинг и удаление зубных бляшек при меньшем расходе воды. Патентованная технология подачи воды Focus Spray® разработана для проведения лаважа, обеспечивающего большую эргономичность для клинициста и большой комфорт для пациента.

Эти инструменты предназначены для использования вместе с ультразвуковыми скейлерами Cavitron®. Наконечники PowerLine™ (FSI®) доступны для использования вместе с насадками линии Bellissima™ для исключительного удобства стоматолога.

#### Cavitron® PowerLine™ FSI®-3 насадка

“Beavertail” — “Хвост бобра”

Показания: легкое удаление трудноудаляемых темных смоляных пятен и зубного камня. Для наддесневого использования, особенно в области передней части языка. Для применения при мощности от низкой до высокой.



80797	Cavitron PowerLine Insert 30K FSI - 3
80794	Cavitron PowerLine Insert 25K FSI - 3
81500	Bellissima Cavitron PowerLine Insert 30K FSI - 3

#### Cavitron® PowerLine™ FSI®-100 насадка

Показания: контра-угловой изгиб наконечника позволяет легче достать до язычной и щечной поверхностей зубов. Для применения при мощности от низкой до высокой..



80798	Cavitron PowerLine Insert 30K FSI - 100
80795	Cavitron PowerLine Insert 25K FSI - 100
81502	Bellissima Cavitron PowerLine Insert 30K FSI - 100

#### Cavitron® PowerLine™ FSI®-10 насадка

Показания: для общего удаления отложений во всех квадрантах ротовой полости, предназначено для наддесневого использования. Особенно удобно при легком и умеренном скейлинге. Для применения при мощности от низкой до высокой. Продается отдельно.



80294	Cavitron PowerLine Insert 30K FSI - 10
80293	Cavitron PowerLine Insert 25K FSI - 10
81501	Bellissima Cavitron PowerLine Insert 30K FSI - 10

#### Cavitron® PowerLine™ FSI®-1000 насадка

Показания: Позволяет легче доставать до линий углов коронок и интерпроксимальных поверхностей. Для наддесневого применения во всех квадрантах для удаления твердого зубного налета. Для применения при мощности от низкой до высокой. Продается отдельно.



80799	Cavitron PowerLine Insert 30K FSI - 1000
80796	Cavitron PowerLine Insert 25K FSI - 1000
81503	Bellissima Cavitron PowerLine Insert 30K FSI - 1000



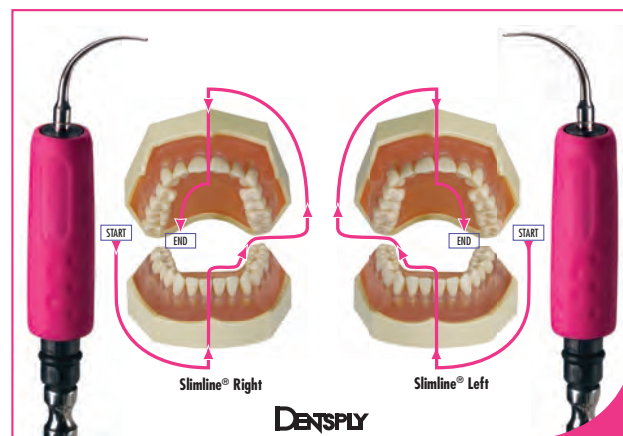
### Насадки Cavitron® линейки Bellissima™:

Ультразвуковые насадки линии Bellissima™ — это уникальное сочетание рабочих характеристик ваших любимых насадок Cavitron® с мягкостью и комфортом. Они обеспечивают превосходное качество скейлинга и имеют большое разнообразие форм.

- Разработаны для снижения усталости руки.
- Подходят для парадонтальных карманов разной глубины.



Мягкий силиконовый держатель



### Левая насадка Cavitron® FSI SlimLINE

Показания: Для точного очищения периодонта и отличного доступа, адаптации к анатомии корней в карманах глубже 4 мм. Для применения при мощности от низкой до средней. В продаже поштучно.



80396	Cavitron Insert 30K FSI SlimLINE Left
80393	Cavitron Insert 25K FSI SlimLINE Left light green
81511	Bellissima Cavitron Inserts 30K FSI SlimLINE Left

### Прямая насадка Cavitron® FSI SlimLINE

Показания: Для удаления легкого налета, а также очистки десневых карманов глубиной менее 4 мм. Для пациентов с сохранной костной тканью. Можно использовать во всех квадрантах. Для применения при мощности от низкой до средней. В продаже поштучно.



80395	Cavitron Insert 30K FSI SlimLINE Straight
80392	Cavitron Insert 25K FSI SlimLINE Straight
81510	Bellissima Cavitron Insert 30K FSI SlimLINE Straight

### Правая насадка Cavitron® FSI SlimLINE

Показания: Для точного очищения периодонта и отличного доступа, адаптации к анатомии корней в карманах глубже 4 мм. Для применения при мощности от низкой до средней. В продаже поштучно.



80397	Cavitron Insert 30K FSI SlimLINE Right
80394	Cavitron Insert 25K FSI SlimLINE Right light green
81512	Bellissima Cavitron Insert 30K FSI SlimLINE Right

### Прямая насадка Cavitron® THINsert® 30K

Учитывая то, что диаметр наконечника на 47% тоньше, чем существующий ассортимент SlimLINE, этот наконечник позволяет добиться отличного доступа ко всем областям, лучшего удаления биопленки и большего комфорта пациента. Насадка применяется в сочетании с любым ультразвуковым 30 кГц скейлером Cavitron для обработки межпроксимальных поверхностей, впадин и мест с плотным присоединением тканей, без потери тактильного ощущения. Насадка THINsert может применяться на мощности от низкой до высокой.



81551	Cavitron THINsert 30K Straight
-------	--------------------------------

**Cavitron® SofTip насадка с мягким наконечником**



Насадка Cavitron SofTip предназначена для использования совместно с одноразовыми наконечниками SofTip® Prophy для удаления зубного налета и камня вокруг имплантатов и их супраструктур. Также с помощью данной насадки можно проводить скейлинг вокруг реставраций, выполненных из керамики и композитов. Данная насадка должна использоваться на минимальных значениях мощности и только в сочетании с пластиковыми насадками SofTip®.

**90411** Cavitron SofTip Ultrasonic Implant 30K Insert,  
1 шт. Tip Tool (Wrench), 15x SofTip Disposable Prophy Tips

**Cavitron® SofTip одноразовые насадки**



Одноразовые пластиковые насадки SofTip

**380059** 100 шт. SofTip Disposable Prophy Tips



**Cavitron® SofTip Tool  
Ключ**

Ключ для одноразовых насадок SofTip

**380060** Cavitron SofTip Tool (Wrench)

**Cavitron® Handpieces**

**Cavitron® Jet Mate  
насадка для полировки воздухом**



**8170201** Cavitron Jet Mate Handpiece

**Cavitron® Steri-Mate™ Handpiece**

**78688** 1 шт. 30K Steri-Mate Handpiece

**78703** 3 шт. 30K Steri-Mate Handpiece

