

АКЦИИ

ЯНВАРЬ – АПРЕЛЬ 2024



Kerr

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 22 ЯНВАРЯ ПО 30 АПРЕЛЯ 2024



СКИДКА

12%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

12 150 ₽

Harmonize™ Intro Kit

Наногибридный универсальный композит

Начните работу Harmonize™ со стартового набора с самыми популярными оттенками

36633

Harmonize™ набор Intro Kit: 4 шприца (по 4 г)
эмаль A2, A3; дентин A3, A3.5

Беретарь Руслан Саферович

Практическое руководство
**«ПРЯМАЯ РЕСТАВРАЦИЯ.
КРИТЕРИИ КЛИНИЧЕСКОГО
УСПЕХА»**

Данное методическое пособие содержит протоколы применения композита **Harmonize™** и описание клинических случаев. Оно поможет вам успешно выполнять реставрации как на жевательной, так и на фронтальной группе зубов.



Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 22 ЯНВАРЯ ПО 30 АПРЕЛЯ 2024

Harmonize™ и Herculite™ XRV Ultra Flow: идеальная пара



Размер основных частиц наполнителя композитов Herculite™ XRV Ultra Flow и Harmonize™ меньше длины волны голубого света.

Наличие в составе схожего метилметакрилата обеспечивает совместимость Herculite™ XRV Ultra Flow и Harmonize™ при полимеризации.



Адаптивная технология Smart Placement

Сложно представить, что текучий композит можно равномерно распределить по дну и стенкам полости любой конфигурации и при этом сам материал будет сохранять нужную форму.

Тем не менее Herculite™ XRV Ultra Flow работает именно так. Реологические добавки снижают поверхностное натяжение при контакте материала с тканями зуба под действием давления и композит легко растекается. Благодаря тем же добавкам поверхностное натяжение увеличивается после того, как материал занял нужный объем, и композит стабилизируется.



Легко растекается и сохраняет форму



Превосходная прочность на изгиб



Высокая рентгеноконтрастность



Легкая полируемость и сохранение блеска надолго

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 22 ЯНВАРЯ ПО 30 АПРЕЛЯ 2024



Maxcem Elite™ Mini Kit

Самопротравливающий самоадгезивный композитный цемент
для постоянной фиксации

Надежная фиксация без адгезивной подготовки

- Универсален и совместим с любыми субстратами: эмалью, дентином, керамикой, металлами, диоксидом циркония и пр.
- Экономит ваше время: не нужно протравливать или использовать адгезив
- Высокая гидрофильность цемента способствует повышенной адгезии к дентину
- Высокая рентгеноконтрастность – для контролируемого удаления излишков (280% AI)
- Запатентованная Redox система инициаторов гарантирует полное самоотверждение цемента за 4 минуты и его цветостабильность

34057

Maxcem Elite™ набор Mini Kit: 1 шприц (5 г) прозрачный оттенок, 4 стандартных смесительных насадки, 4 широких смесительных насадки, 4 интраоральных насадки

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 22 ЯНВАРЯ ПО 30 АПРЕЛЯ 2024



OptiBond™ Universal

Универсальный однокомпонентный светоотверждаемый адгезив

Простое решение, которому доверяют



Один флакон.
Одно нанесение



Защита
от постоперационной
чувствительности



Проверенная временем
технология OptiBond™



Доказанная
эффективность



Универсальность применения –
все техники протравливания в одном флаконе

36517

OptiBond™ Universal набор: 1 флакон (5 мл) адгезива,
1 шприц (3 г) протравливающего геля Gel Etchant
с 10 насадками, 25 емкостей для смешивания,
100 аппликаторов

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 22 ЯНВАРЯ ПО 30 АПРЕЛЯ 2024



OptiDisc™ General Assorted Kit

Полировочные диски

Одна система для финишной обработки всех видов реставраций

- Оптимальная гибкость и наличие укороченного дискодержателя – решение для дистальной группы зубов и труднодоступных областей
- Отсутствие выступающего держателя – точная обработка без царапин на поверхности зубов и реставраций без повреждения мягких тканей
- Прозрачность диска – хороший обзор рабочего поля
- Понятная цветовая кодировка: 4 цвета – 4 степени абразивности

4200

OptiDisc™ набор General Assorted Kit, 240 дисков:

Ø 9,6 мм – по 30 шт. очень грубых, средних, тонких, ультратонких дисков;
Ø 12,6 мм – по 30 шт. очень грубых, средних, тонких, ультратонких дисков;
5 дискодержателей (3 стандартных, 2 коротких); 1 OptiShine™

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 22 ЯНВАРЯ ПО 30 АПРЕЛЯ 2024



Cleanic

Паста для профессиональной чистки и полировки зубов

Одна паста для качественной гигиенической чистки и полировки зубов

- Одна паста для чистки и полировки благодаря изменяемой абразивности
- Высокая чистящая и полирующая способность – снижение скорости появления нового налета
- Успешное применение после процедуры чистки пескоструйным аппаратом (PROPHYflex или AirFlow)
- Бережное отношение к эмали благодаря низкой абразивности
- Экономичность использования благодаря упаковке в виде тубы (100 г)
- Паста без фтора для успешного проведения общей профилактической чистки перед реставрацией, фиксацией брекет-систем и процедурой отбеливания
- Укрепление эмали и защита от кариеса благодаря содержанию фторида натрия 0,10%
- Насыщенный ягодный вкус для детского приема

3382

Green Apple (100 г)
Паста Cleanic вкус зелёного яблока,
с фтором, туба (100 г)

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 22 ЯНВАРЯ ПО 30 АПРЕЛЯ 2024



Herculite™ XRV Ultra™ Mini Kit

Наногибридный универсальный композит

Оптимальное решение для повседневных клинических случаев по доступной цене

- Универсальный композитный материал для реставраций I-V классов
- Оптимальная моделируемость
- Высокая механическая прочность
- Привычная цветовая гамма по шкале VITA
- Отличная полируемость и устойчивый блеск
- Не липнет к инструменту

33860

3 шприца (по 4 г): эмаль A2, A3, дентин A2;
OptiBond™ Solo Plus (5 мл), 1 шприц Gel Etchant
(3 г) с 10 насадками, 50 аппликаторов

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 22 ЯНВАРЯ ПО 30 АПРЕЛЯ 2024



Herculite™ XRV™ Mini Kit

Микрогибридный универсальный композит

Качество, проверенное временем

- Повышенная прочность реставрации благодаря технологии микронаполнения
- Многолетний опыт успешного использования и наличие отдаленных результатов
- Широкий выбор оттенков по шкале VITA
- Оптимальное соотношение цены и качества

62829

Herculite™ XRV™ набор Mini Kit: 3 шприца (по 3 г) эмали A2, A3, дентин A3, 1 флакон (3 мл) OptiBond™ Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля Gel Etchant с 10 насадками, 50 аппликаторов

Узнать больше >>

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.


Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

Схема построения реставрации по IV классу на композите Harmonize™ от Марии Логвиненко




Доктор Мария Логвиненко


Врач стоматолог-терапевт,
клиника BELGRAVIA DENTAL STUDIO, Москва

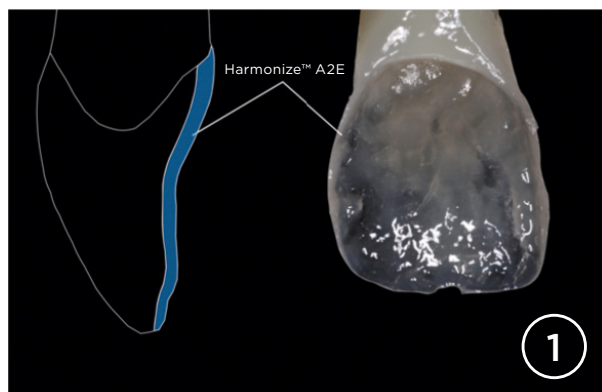


Для построения палатинальной стенки используем эмалевые оттенки композита (в данном случае выбрана светлая средней прозрачности эмаль Harmonize™ A2E)

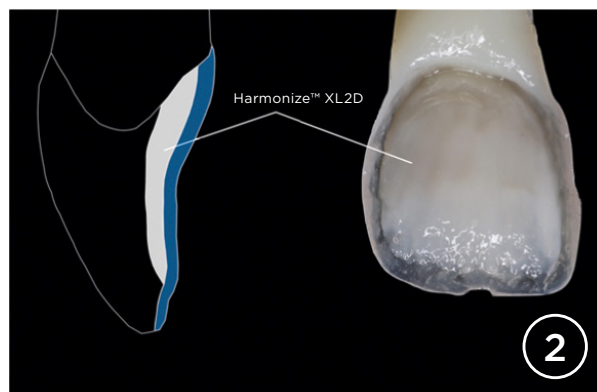

Вспомогательный белый дентин Harmonize™ XL2D помогает увеличить опакость основного дентина. Порция не доходит до режущего края 3 мм, до апроксимальных стенок 1 мм

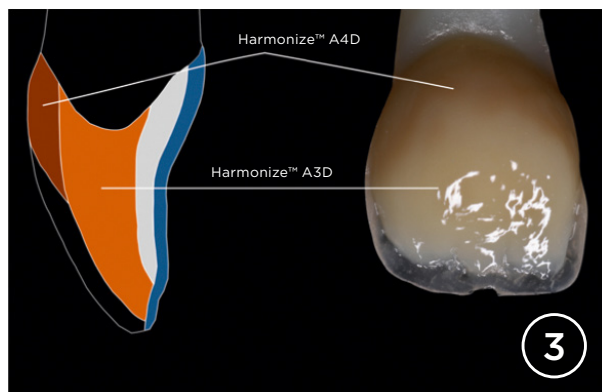


Большую массу реставрации (80%) несет на себе основной дентин (в данном случае выбран Harmonize™ A3D). На этапе построения дентинного слоя восстанавливаем форму зуба. Для вестибулярной эмали оставляем минимальное место. В пришеечной части зуба перекрытие эмалью не требуется. Дентин лучше вносить горизонтальными порциями. Последняя порция по режущему краю будет участвовать в формировании мамелонов (острым инструментом разделяем горизонтальную порцию композита на 3 мамелона)

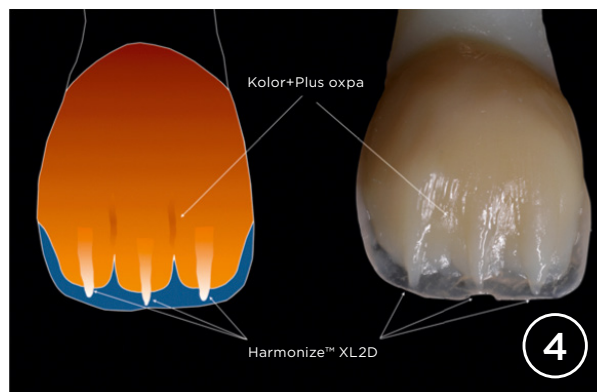

Для усиления рисунка мамелонов по режущему краю можно использовать светлый или темный дентин (в данном случае выбран белый дентин Harmonize™ XL2D). Порцию располагаем горизонтально. Часть порции, которая направлена в среднюю треть, истончаем так, чтобы не было видно перехода между Harmonize™ XL2D и Harmonize™ A3D


ДАННУЮ СХЕМУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ДРУГИМИ НЕОБХОДИМЫМИ ОТТЕНКАМИ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА С ИНТЕГРАЦИЕЙ XL2D, СОБЛЮДАЯ ТОПОГРАФИЮ СЛОЕВ.

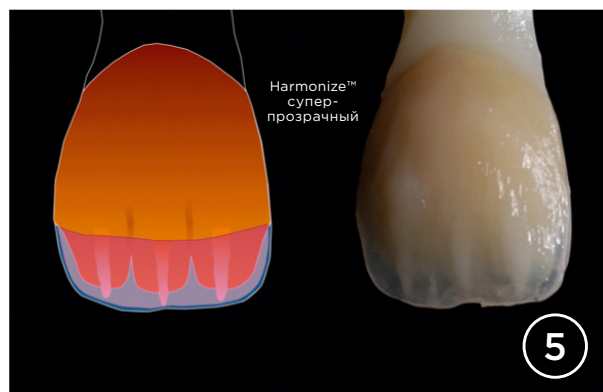

Пространство между мамелонами заполняем Harmonize™ суперпрозрачного оттенка



Вестибулярную эмаль выполняем тем же оттенком Harmonize™ A2E, что и палатинальную стенку

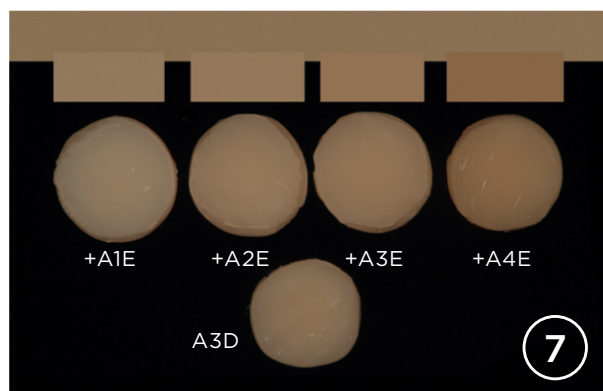

Влияние эмали на «светлость» реставрации



Окончательный результат

Есть 2 варианта работы с Harmonize™ XL2D

Вариант 1

Сразу адаптировать Harmonize™ XL2D на палатинальную стенку первым слоем. Но с палатинальной поверхности будет разность цвета «зуб-реставрация».

Вариант 2

Использовать Harmonize™ XL2D внутренним слоем подобно ядру. Первично на палатинальную стенку выкладываем основной дентин толщиной не больше 1 мм по тем же границам (в данном случае Harmonize™ A3D) и уже сверху основного дентина выкладываем слой Harmonize™ XL2D*.

*Harmonize™ XL2D и OptiShade™ Bleach White взаимозаменяемые композитные материалы.