

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

*сентябрь - декабрь 2021*



**Kerr**™

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

акции действительны с 1 сентября по 20 декабря 2021 года

## Harmonize™

Наногибридный универсальный композит



В материале Harmonize™ используется Технология Адаптивного Реагирования **ART**.

Это означает, что наночастицы кремния и циркония соединяются, а затем спекаются в единую, упрочненную сеть. Кроме того, наполнитель и органическая матрица имеют между собой дополнительные связи. Такая структура обеспечивает пластичность материала, улучшенную полимеризацию и повышенную прочность

5 нм



ОКСИД  
ЦИРКОНИЯ  
Положительный заряд

20 нм




КОЛЛОИДНЫЙ  
ОКСИД КРЕМНИЯ  
Отрицательный заряд



~30 нм



2-3 μm

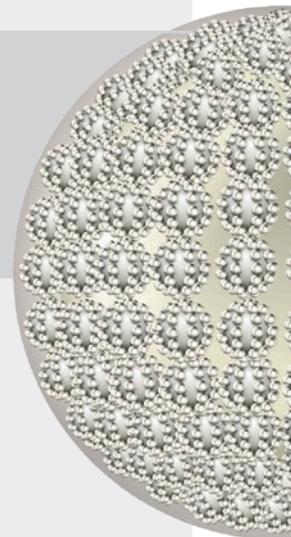

### Несравненная эстетика

В основе Harmonize™ – сферические частицы циркония и кремния правильной формы. Поэтому отполированная поверхность материала отражает волны красного и синего цвета подобно натуральной эмали. Благодаря такому оптическому свойству реставрация из Harmonize™ будет демонстрировать эффект хамелеона и сливаться с тканями зуба. Наночастицы в составе Harmonize™ обеспечат реставрации долговечный сухой блеск

### Легкое моделирование

Harmonize™ произведен по Технологии Адаптивного Реагирования **ART** – с добавлением специального модификатора реологических свойств. Это значит, что во время внесения в полость материал становится податливым и вы сможете легко его адаптировать к стенкам без прилипания к инструменту. А после завершения моделирования Harmonize™ не стекает и сохраняет форму до момента полимеризации

### Исключительная прочность

Неорганические частицы и смола в составе Harmonize™ имеют повышенное сцепление между собой. Такое свойство в комбинации с наполненностью 81% позволит реставрациям выдерживать серьезные жевательные нагрузки без трещин и сколов



**Kerr™**  
РЕСТАВРАЦИЯ

«ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

**Kerr™**

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

акции действительны с 1 сентября по 20 декабря 2021 года



## Harmonize™ Intro Kit Unidose

Наногибридный универсальный композит в унидозах

Удобство для вас и гарантия безопасности для ваших пациентов

Использование индивидуальной унидозы для каждой реставрации обезопасит ваших пациентов от перекрестного заражения.

36634

Harmonize™ Набор Intro Kit Unidose: 40 унидоз x 0.25 г



## СНОВА В ПРОДАЖЕ! Моделировочная смола Kerr

800-503

Универсальная моделировочная жидкость (10 мл)

**Kerr™**  
РЕСТАВРАЦИЯ

«ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

**Kerr™**

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

акции действительны с 1 сентября по 20 декабря 2021 года



## Harmonize™ Advanced Kit

Наногибридный универсальный композит, большой набор

Воссоздайте натуральную эстетику во фронтальной реставрации с широким выбором оттенков Harmonize™ Advanced kit

36635

Harmonize™ Набор Advanced Kit: 8 шприцев (по 4 г), эмаль А2, А3; дентин А2, А3, А4; прозрачный, прозрачный янтарный, прозрачный серый



**Беретарь Руслан Сафорович**

Практическое руководство  
**«ПРЯМАЯ РЕСТАВРАЦИЯ.  
КРИТЕРИИ КЛИНИЧЕСКОГО  
УСПЕХА»**

Данное методическое пособие содержит протоколы применения композита **Harmonize™** и описание клинических случаев. Оно поможет вам успешно выполнять реставрации как на жевательной, так и на фронтальной группе зубов.

Доступно к заказу на сайте [www.kerruniversity.ru](http://www.kerruniversity.ru) и у официальных дистрибьюторов Kerr™



**Kerr™**  
РЕСТАВРАЦИЯ

«ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

**Kerr™**

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

акции действительны с 1 сентября по 20 декабря 2021 года



## Point 4™ Mini Kit

*Point 4™ в мини-наборе с адгезивом OptiBond™ Solo Plus*

Проверенное решение для повседневных клинических случаев по доступной цене

- Прекрасная полируемость
- Эффект «хамелеона»
- Многолетний опыт успешного использования и наличие отдаленных результатов
- Широкий выбор оттенков по шкале VITA

62843

Point 4™ Мини-набор Mini Kit: 3 шприца (по 3 г): эмаль A2, A3, дентин A3, 1 бутылочка (3 мл) OptiBond Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 насадками, 25 одноразовых емкостей для замешивания, 50 аппликаторов

**Kerr™**  
РЕСТАВРАЦИЯ

«ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

**Kerr™**

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

акции действительны с 1 сентября по 20 декабря 2021 года

## SonicFill™ 2

Композит для объемного пломбирования  
(Bulk Fill)

### Легкость адаптации и моделировки

В материале применен особый реологический модификатор. Звуковая энергия наконечника SonicFill™2 воздействует на модификатор и снижает вязкость композита на 87%. В этой текучей фазе материал легко адаптируется к стенкам и заполняет полость. Когда воздействие звуковой энергии прекращается, композит постепенно приобретает плотную консистенцию, позволяя смоделировать необходимую форму реставрации

### Гарантия полимеризации

Надежная полимеризация слоя до 5 мм подтверждена как лабораторными исследованиями, так и отдаленными клиническими результатами



### Долговечность реставраций

Система наполнителя из оксида циркония обеспечит исключительную полируемость реставрации, прочность и износостойкость

### Реставрации без стресса

Низкая усадка (1,6%) гарантирует хорошее краевое прилегание реставрации и снижает риск постоперационной чувствительности

- ПОЛИРУЕМОСТЬ
- ЭСТЕТИКА
- ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

**SonicFill™2**  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОДНОШАГОВЫЙ BULK FILL  
С ВНЕСЕНИЕМ ОДНОЙ ПОРЦИИ



Традиционная техника послойного нанесения.

**Несколько слоев**




Текущий Bulk Fill с перекрытием универсальным композитом.

**Два слоя**



Bulk Fill высокой вязкости с использованием лайнерной прокладки из текучего композита.

**Два слоя**

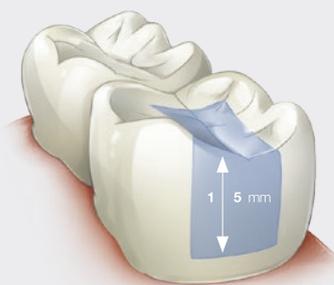

Система SonicFill™2  
**ОДИН СЛОЙ**

**Kerr™**  
РЕСТАВРАЦИЯ

«ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

**Kerr™**

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

акции действительны с 1 сентября по 20 декабря 2021 года



ЦЕНА СО СКИДКОЙ  
**48 900 Р**

## SonicFill™2

Композит для объемного пломбирования, стартовый набор

Начните работу с SonicFill™2 с выгодой:  
купите стартовый комплект с унидозами по цене наконечника

Заполняйте объёмные полости быстро и качественно при помощи SonicFill™2.  
Одна порция композита, одно засвечивание, надежный результат

- |                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| <b>1.007.7400</b> |  | Наконечник SonicFill™                       |
| <b>36048</b>      |  | SonicFill™2 унидозы, 20 шт. (по 0,25 г), A2 |
| <b>36049</b>      |  | SonicFill™2 унидозы, 20 шт. (по 0,25 г), A3 |

**Kerr™**  
РЕСТАВРАЦИЯ

«ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

**Kerr™**

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

акции действительны с 1 сентября по 20 декабря 2021 года



СКИДКА

18%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ\*

6 900 Р

\*цена за комплект из двух упаковок

## Maxcem Elite™ Mini Kit

Самопротравливающий самоадгезивный композитный цемент  
для постоянной фиксации

Простой протокол самопротравливания –  
надежный результат с Maxcem Elite™.  
Купите набор из двух шприцев по более выгодной цене

- Улучшенная формула цемента, обеспечивающая силу адгезии к тканям зуба, сравнимую с адгезивами тотального протравливания (по данным независимых исследований)
- Отсутствие необходимости в проведении адгезивного протокола, а также ручного замешивания
- Высокая цветовая стабильность
- Хорошая совместимость с ортопедическими конструкциями на основе оксида циркония, керамики на основе дисиликата лития
- Отсутствие необходимости протравливания корневого канала и нанесения адгезива на штифт при фиксации стекловолоконных штифтов
- Легкое удаление излишков цемента

34057

Maxcem Elite™ Мини-набор Mini Kit: 1 шприц (5 г) прозрачного оттенка, 4 стандартные смешивательные насадки, 4 насадки с широким наконечником, 4 интраоральные насадки

**Kerr**<sup>™</sup>  
РЕСТАВРАЦИЯ

«ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

**Kerr**<sup>™</sup>

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

акции действительны с 1 сентября по 20 декабря 2021 года

СКИДКА

20%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

2 500 Р



## Temp-Bond Clear™

Прозрачный композитный цемент двойного отверждения  
для временной фиксации

### Прозрачный временный цемент для высокой эстетики ваших работ

- Точность дозировки компонентов и легкость смешивания в шприце automix
- Великолепная эстетика благодаря высокой прозрачности
- Опция светового отверждения позволяет фиксировать временные виниры
- Оптимизированное время полимеризации
- Высокая прочность и эластичность
- Легкость удаления
- Отсутствие эвгенола и совместимость с композитными цементами

33351EU

Temp-Bond Clear™,  
Цемент стоматологический для фиксации  
временных протезов, 1 шприц (5 мл)


**Kerr**<sup>™</sup>  
РЕСТАВРАЦИЯ

«ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

**Kerr**<sup>™</sup>

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

акции действительны с 1 сентября по 20 декабря 2021 года

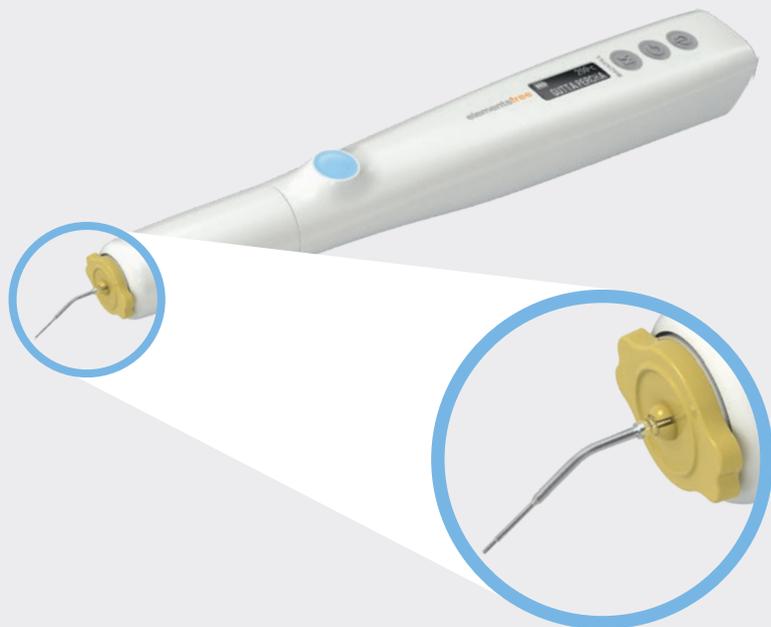

## Elements™ Gutta Percha Cartridge

Обтурация одним движением по методике Downpack с удобным и безопасным elements™free



### Новые технологии в процедуре обтурации

- Компоненты швейцарского производства для работы высокого качества
- Продуманные одноразовые картриджи с гуттаперчей
- Автоматизированное выведение гуттаперчи без усилий
- Изоляция нагревательных элементов для комфортной и безопасной работы

**972-1002**

Elements™ Gutta Percha Cartridge, гуттаперча в картриджах в упаковке (10 шт.) 23GA, средняя вязкость

**972-1005**

Elements™ Gutta Percha Cartridge, гуттаперча в картриджах в упаковке (10 шт.) Heavy 23GA, высокая вязкость

**Kerr™**  
ЭНДОДОНТИЯ

«ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

**Kerr™**

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

акции действительны с 1 сентября по 20 декабря 2021 года



## OptiBond™ Universal

Универсальный однокомпонентный светоотверждаемый адгезив, набор



Одна бутылочка.  
Одно нанесение



Защита от постоперационной  
чувствительности



Доказанная эффективность



Проверенная временем  
технология OptiBond™



Универсальность применения  
(все техники протравливания  
в одном флаконе)

**36517**

OptiBond™ Universal, набор: 1 бутылочка (5 мл) адгезива,  
1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 насадками,  
25 палеток для смешивания, 100 аппликаторов

**Kerr™**  
РЕСТАВРАЦИЯ

«ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

**Kerr™**

# ВЕБИНАРЫ KERR

## ПОЧЕМУ ЭТО УДОБНО?



### **Экономия времени**

Возможность дистанционного обучения и доступ к записи вебинаров в любое удобное время



### **Бесплатное участие**

Для участия в вебинаре необходимо лишь зарегистрироваться на сайте



### **Получение сертификата**

Пациенты оценят ваше стремление к совершенствованию профессиональных навыков



### **Единая учётная запись**

Единовременная регистрация на сайте позволит вам не вводить информацию о себе повторно при регистрации на несколько мероприятий



### **Удобный поиск**

На одном сайте представлены все образовательные мероприятия по терапии, ортопедии и другим тематикам с возможностью быстрого поиска по городам

Регистрируйтесь на образовательные мероприятия Kerr  
на сайте [www.KerrUniversity.ru](http://www.KerrUniversity.ru)



- ПРЯМАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
- НЕПРЯМАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
- ЭНДОДОНТИЯ
- ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ