

# ЩЕТОЧКИ

 [Перейти в магазин Эль-Дент и заказать:](#) 

## OSCLUBRUSH

Occlubrush – это щеточки, использующиеся для быстрой полировки до зеркального блеска окклюзионных и вогнутых поверхностей реставраций из композитов, компомеров, стеклоиономеров и керамики, а также для профилактической обработки.

### Обенности и преимущества Occlubrush

- Отсутствие необходимости в применении полировочной пасты, так как полирующие частицы импрегнированы в каждую щетинку.
- Экономия времени и достижение зеркального блеска быстрее, чем при использовании обычных полиров, особенно для фиссур, бугорков и окклюзионных поверхностей.
- Отсутствие повреждений эмали зубов и краев пломб.
- Наибольшая эффективность при полировании жевательной группы зубов.
- Легкая полировка труднодоступных мест благодаря наличию различных форм щеточек.
- Многократное и длительное использование без потери рабочих качеств благодаря автоклавированию (при температуре до 134 °C в течение 3 мин.).




### Occlubrush – набор ассорти (Assorted Kit) 2520

Стандартная чашечка 5 шт., малая чашечка 5 шт., острый кончик 5 шт.

Occlubrush – набор ассорти (Assorted Kit) 2520

### Occlubrush – дополнительные упаковки

			
	Стандартная чашечка	Малая чашечка	Острый кончик
3 шт.	2503	2504	2505
10 шт.	2510	2511	2512

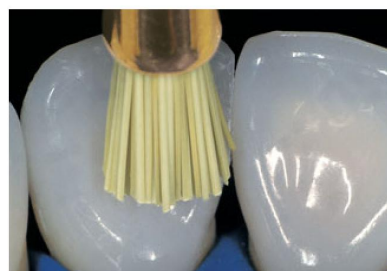


Малая чашечка



Острый кончик



Стандартная чашечка

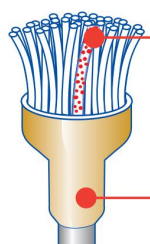

**Каждая отдельная щетинка** – полировальный инструмент. Специальные волокна с абразивными частицами карбида кремния

**Невозможно перепутать** Узнаваемость благодаря золотому хвостовику

ПОЛИРОВКА