

Kerr™

Новинки & Акции

Самоадгезивный
текущий композит –
КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Компания Kerr представила
**универсальный композит
нового поколения**
с технологией ART



АКЦИИ KERR –
ЧТО НОВОГО?

**СКИДКИ
ДО 25%!**

НОВЫЕ СИЛЕРЫ
в эндодонтической
линейке Kerr

OptiBond FL

АДГЕЗИВ ТОТАЛЬНОГО ПРОТРАВЛИВАНИЯ



26684 Е

Набор:

- 1 бутылочка праймера (8 мл)
- 1 бутылочка адгезива (8 мл)
- Gel Etchant (3 г)

- Высокие показатели адгезии. Адгезив признан «золотым стандартом».
- Высокая наполненность (48 %) и прочный адгезивный слой, выполняющий также функцию суперадаптивного слоя.



скидка:
25%

цена со скидкой:
6 300 руб.

АКЦИЯ

КРУТИКОВ
Денис Валерьевич



Style Italiano Silver Member, Международный лектор по реставрации зубов, Член Европейского Общества Косметической Стоматологии (ESCD), Всемирного Общества изучения цвета в Стоматологии (SCAD), Российского Общества изучения цвета в Стоматологии, Российского Стоматологического Общества (PCO), Российской Академии Имплантологии и Эстетической Стоматологии (NAIAD). Стоматолог-ортопед и реставратор (г. Москва).

Работая 20 лет с композитными материалами, я понял, что правильная реставрация – это не только идеальный подбор цвета, точное воспроизведение анатомии и морфологии зуба, художественная работа с композитными красками, но, в первую очередь, прекрасная адгезия, благодаря которой реставрация прослужит пациенту долгие годы. Постоянно экспериментируя с материалами для реставрации зубов, я 14 лет назад познакомился с OptiBond FL и с тех пор это мой адгезив №1. Посещая учебные мастер-классы ведущих реставраторов и ортопедов мира, я только утвердился в своем мнении, видя, что мои учителя в большинстве своем тоже выбирают именно OptiBond FL. Могу с уверенностью сказать, что при работе с OptiBond FL, соблюдая правильный адгезивный протокол, я ни разу не получил дебондинга ни в терапевтических реставрациях, ни в фиксации керамических конструкций. В качестве лайфхаков могу рекомендовать следующие дополнительные возможности применения OptiBond FL: это единственный адгезив, который, в силу его наполненности, я использую как замену моделировочной жидкости и как средство борьбы с микропорами на этапе финишной обработки реставрации.

Также рекомендуем к использованию адгезив V поколения **Optibond Solo Plus**



- Высокие показатели адгезии.
- Один из самых наполненных среди адгезивов V поколения (15%).

- Надежная защита от микроподтеканий.
- Экономичность использования благодаря нанесению в 1 слой.

КОМПОЗИТНЫЙ САМОПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ,
САМОАДГЕЗИВНЫЙ ЦЕМЕНТ

Maxcem Elite


34055

Набор Maxcem Elite™ Standard Kit:
5 шприцев (по 5 г): 2 прозрачных, 1 белый,
1 белый дентин и 1 желтый, насадки

34057

Набор Maxcem Elite™ Mini Kit:
1 шприц (5 г) прозрачного оттенка, насадки

скидка:
20%
цена за набор
со скидкой
14 300 руб.

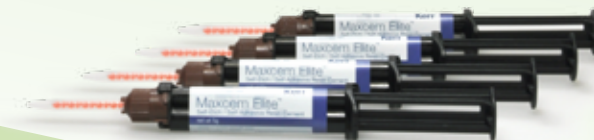

АКЦИЯ 2

• ВЫСОКАЯ СИЛА АДГЕЗИИ

Улучшенная формула цемента обеспечивает высокую силу адгезии
(МПа: эмаль – 25,5, дентин – 25,8, титан – 41, цирконий – 32,1, золото – 33,2,
е.max – 34, керамика – 33,6)

• ВЫСОКАЯ ЦВЕТОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

• СОВМЕСТИМОСТЬ С ЛЮБЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

Литий-дисиликатная керамика / Оксид циркония / Оксид алюминия / Дентин / Эмаль / Металлы

• ВЫСОКАЯ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОСТЬ (280% Al)

• ШИРОКИЙ ВЫБОР ОТТЕНКОВ (4 цвета)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Фиксация

- безметалловых конструкций (цельнокерамических, композитных CAD/CAM, на основе оксида циркония)
- конструкций на металлической основе (PFM, сплавов)
- коронок
- мостовидных конструкций
- вкладок/накладок
- штифтов
- виниров (оптимально для 1-2 единиц)
- культевых штифтовых вкладок
- коронок на имплантаты

Osclubrush + Opti1step

8000

Полиры Opti1Step, набор Assortment Kit:
12 полиров для композитов
(пламя - 4 шт, чашечка -
4 шт, диск - 4 шт)

2503

Полирующие щеточки Osclubrush,
стандартная чашечка, 3 шт



скидка:
14%
цена за набор
со скидкой:
3 300 руб.




АКЦИЯ 3

OPTI1STEP



ПОЛИРОВКА

OSCLUBRUSH

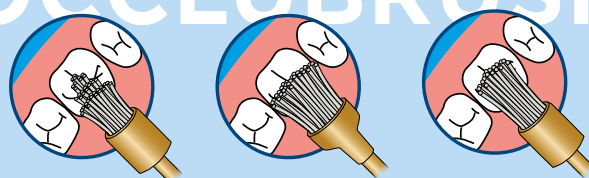

ПРИДАНИЕ ЗЕРКАЛЬНОГО БЛЕСКА



МИНАКОВ
Александр Леонидович

врач стоматолог-терапевт, эксперт в художественной реставрации, эндодонтии, микроскопии.
Стоматологическая клиника «Практика Доктора Волкова», г. Москва.

После проведения этапа контурирования и финирирования дисками или борами композит становится гладким и приобретает первичный блеск, но на поверхности остается слабо заметная поперечная исчерченность в виде микроцарапин. С этими микроцарапинами мне помогает справиться полир OPTI1STEP (Kerr). Он сочетает в себе свойства двух полиров - крупнозернистого и мелкозернистого. С его помощью мне удается загладить не только микроцарапины на поверхности композита, создать морфологию в виде вертикальных углублений, при необходимости,

но и получить сухой зеркальный блеск. Все это достигается лишь изменением нажима на инструмент. Чем сильнее будет давление, тем больше будет редуция композита. При ослаблении нажатия на полир мы получаем сухой зеркальный блеск. А закрепить блестящий результат, мне помогают щеточки Osclubrush, которые в составе ворсинок имеют карбид кремния (компонент полировочных паст). Обработать ими поверхность композита стоит без воды. После этого работа приобретает зеркальный блеск, который сохраняется длительное время!



САМОАДГЕЗИВНЫЙ ТЕКУЧИЙ КОМПОЗИТ

ПАСТА
ДЛЯ ЧИСТКИ И ПОЛИРОВКИ

Vertise Flow + Cleanic

34398

Самоадгезивный самопротравливающий текучий композит Vertise Flow, набор Test-Me Kit: 1 шприц (2 г) эмаль A2, 10 насадок, 10 щеточек

3183

Паста Cleanic Mint Fluoride-Free, без фтора: туба, 100 г



скидка:
24%
цена за набор
со скидкой:
2 500 руб.

+



АКЦИЯ 4

Когда использовать Vertise™ Flow?

- 1 Герметизация фиссур и слепых ямок (детская практика)
- 2 Реставрация небольших полостей I класса по Блэку
- 3 Лайнерная прокладка в полостях I, II класса по Блэку
- 4 При восстановлении полостей II класса по Блэку в качестве адгезивного протокола*
- 5 Починка керамики
- 6 Не требует проведение протравливания и бондинга

Преимущества Cleanic:

- 1 Одна паста для чистки и полировки благодаря изменяемой абразивности.
- 2 Успешное проведение чистки перед процедурами реставрации, фиксации и отбеливания (не содержит фторид натрия).
- 3 Успешное применение на финишном этапе процедуры профессиональной гигиены полости рта.
- 4 Бережное отношение к эмали благодаря низкой абразивности (RDA=27).



«Один из наиболее инновационных продуктов на рынке – этот универсальный самоадгезивный композит имеет различные показания к применению, прост в использовании, и позволяет сэкономить время врача и повысить комфорт пациента.»

– Доктор Стивен Д. Посс



АКЦИЯ

скидка:
20%

цена со скидкой:
3 000 руб.

Безэвгенольный полимерный силер для пломбирования корневых каналов на основе гидроксида кальция, который ускоряет заживление и формирование твердых тканей

Sealapex

18432

Sealapex, набор:
1 тюбик базы (12 г), 1 катализатор (18 г),
1 блокнот для замешивания



НА ОСНОВЕ
ГИДРОКСИДА
КАЛЬЦИЯ



ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ
СИЛЕРЫ



ЦИНК-ОКСИД
ЭВГЕНЬОЛЬНЫЙ
СИЛЕР

Цинк-оксид-эвгенольный силер для пломбирования корневых каналов типа паста/паста. Имеет светлый оттенок, не темнеет, обладает высокой рентгеноконтрастностью

НОВИНКА

Tubli-Seal


00340

Tubli-Seal: 1 тюбик базы (15 г), 1 катализатор (5 г),
1 блокнот для замешивания

Новый композит Harmonize



Художественная реставрация – это просто!

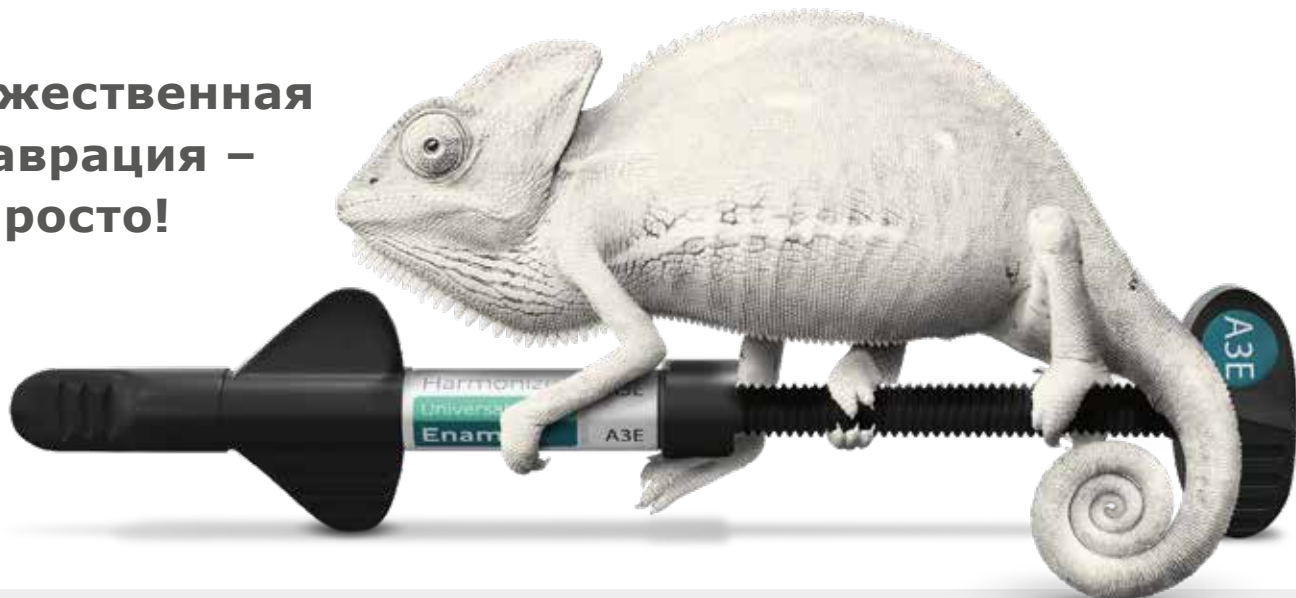

Несравненная эстетика

• Усиленный эффект хамелеона

Точно так же, как ткани естественного зуба Harmonize™ адаптируется к длине волны, рассеянно отражая свет с короткими волнами и зеркально отражая свет с длинными волнами. Это обеспечивает улучшенное слияние реставрации с натуральными тканями зуба.

• Выраженный и стабильный блеск

Размер и структура частиц обеспечивают легкую полируемость и позволяют эффективнее сохранить блеск

Легкое моделирование

• Динамическая вязкость

Система наночастиц наполнителя, использующая технологию ART, адаптируется к манипуляциям врача.

Уникальный модификатор реологических свойств улучшает текучесть во время моделирования, облегчая придание композиту формы. После завершения моделирования вязкость возрастает, предотвращая стекание материала.

• Минимизация прилипания к инструменту

Исключительная прочность

• **Повышенная прочность** благодаря высокому содержанию наполнителя (81 %).

• **Повышенное сцепление между связующим материалом и наполнителем**, гарантирующее сохранение характеристик.

• **Стойкость к сколам и трещинам.**

5 нм



ОКСИД ЦИРКОНИЯ
Положительный заряд

20 нм




КОЛЛОИДНЫЙ ОКСИД КРЕМНИЯ
Отрицательный заряд

~30 нм



2-3 мкм

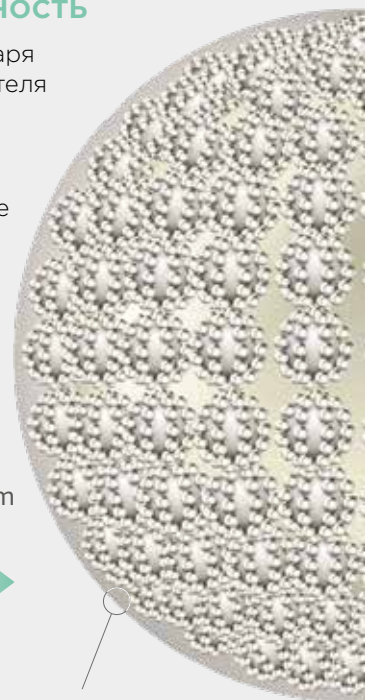

Полностью пропитывающая полимерная сеть обеспечивает структурную целостность и отличное сцепление с органической матрицей.

36633

Harmonize™ – набор Intro Kit
4 шприца (по 4 г): эмаль A2, A3; дентин A3, A3,5,
инструкция

36635

Harmonize™ – набор Advance Kit
8 шприцев (по 4 г), эмаль A2, A3; дентин A2, A3, A4;
прозрачный, прозрачн. янтарный, прозрачн. серый

SonicFill™2



1.007.7401.RUS

SonicFill™2 Intro Kit:
наконечник SonicFill, 60 унидоз (по 0,3 г):
A1 – 10 шт., A2 – 20 шт., A3,5 – 30 шт.

36047 36048 36049 36050

A1 A2 A3 B1

SonicFill™2 рефилы 20 унидоз (по 0,3 г)

1.007.7400

Наконечник SonicFill

АДАПТАЦИЯ

Активация композитного материала звуковой энергией, подаваемой через наконечник, благодаря реологическому модификатору вызывает уменьшение вязкости (до 87%) и увеличение текучести композита, тем самым обеспечивая быстрое заполнение и точную адаптацию материала к стенкам полости.

ГЛУБИНА ОТВЕРЖДЕНИЯ

Возможность одномоментного внесения композита слоем до 5 мм благодаря пониженной усадке и значительной глубине полимеризации.

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Система наночастиц наполнителя из оксида циркония обеспечивает исключительную прочность, полировку и износостойкость для обеспечения долговременных реставраций.

КРАЕВОЕ ПРИЛЕГАНИЕ И ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫЙ СТРЕСС

Полимеризационная усадка (1,6%) ниже чем у других Bulk Fill или традиционных композитов, что обеспечивает хорошее краевое прилегание и минимизирует вероятность возникновения постоперационной чувствительности.

- ПОЛИРУЕМОСТЬ
- ЭСТЕТИКА
- ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!

SONICFILL™2

ДЕЙСТВИТЕЛЬНООДНОШАГОВЫЙ BULK FILL
С ОБЪЕМОМ ПЛОМБИРОВАНИЯ ДО 5 ММ



Традиционная
последняя техника
последнего.

Несколько слоев



Текущий Bulk Fill
с перекрытием
универсальным
композитом.

Два слоя



Bulk Fill высокой вязкости
с использованием
лайнерной прокладки
из текучего композита.

Два слоя



Система SONICFILL™2
ОДИН СЛОЙ