

NX3

NX3 – это универсальный композитный цемент для постоянной фиксации любых непрямых реставраций, имеющий инновационный химический состав и обеспечивающий непревзойденный эстетический результат и адгезию.

Цемент NX3 дает возможность выбрать между двумя способами полимеризации материала, которые включают в себя цемент двойного отверждения (база/катализатор) в двойном шприце для автоматического смешивания и светоотверждаемый цемент в отдельном шприце (только база) для цементирования нескольких виниров в ситуациях, когда требуется длительное время работы.

NX3 предназначен для фиксации цельнокерамических, металлокерамических, композитных ортопедических конструкций, CAD/CAM.

Особенности и преимущества NX3

- Совместимость с любыми поверхностями: с дентином, эмалью, керамикой, металлокерамикой, блоками CAD/CAM.
- Универсальность для всех видов непрямых реставраций.
- Простота использования благодаря автоматическому смешиванию: формирование гомогенной массы без воздушных пузырьков и избыточного заполнения рабочей области или реставрации, а также без риска преждевременной полимеризации материала.
- Удобство нанесения и простота удаления излишков по достижении материалом состояния геля.
- Совместимость с любыми адгезивами V и VII поколений.
- Высокая сила адгезии (МПа: при двойном отверждении – 30,0 к эмали и 34,5 к дентину, при световом отверждении – 29,2 к эмали и 33,8 к дентину).
- Возможность отверждения только светом (для реставраций, требующих неограниченного времени работы) и высокоэффективный механизм полимеризации в темноте благодаря запатентованной redox-системе.
- Превосходная эстетика и цветовая стабильность, отсутствие изменения по истечении длительного времени и эстетичность результатов благодаря иницирующей системе без аминов.
- Наличие пробных гелей для примерки реставраций, позволяющих точно подобрать оттенок постоянного цемента, оценить окончательный результат реставрации, а также одновременно примерить все виниры и фиксировать на постоянный цемент по одному.
- Применение одного пробного геля при использовании как цемента двойного отверждения, так и цемента светового отверждения.
- Хороший контроль качества реставрации и отдаленных результатов с помощью рентгенодиагностики (рентгеноконтрастность 330% Al).



Показания к применению

- Постоянная фиксация любых непрямых реставраций, включая:
 - виниры;
 - вкладки;
 - накладки;
 - коронки;
 - мостовидные протезы;
 - штифты.
- Восстановление культи зуба.



NX3 – стартовый набор (Intro Kit)

33642

NX3 – стартовый набор (Intro Kit) 33642

3 двойных шприца (по 5 г) цемента двойного отверждения: прозрачный, белый и желтый; по 3 шприца (по 1,8 г) светоотверждаемого цемента: прозрачный, белый и желтый; 3 шприца (по 3 г) пробного геля: прозрачный, белый и желтый, 1 бутылочка (5 мл) силанового праймера, смесительные насадки

NX3 – пробный набор (Test-me Kit) 33653

1 двойной шприц (5 г) прозрачного цемента двойного отверждения, смесительные насадки, 1 бутылочка (5 мл) однокомпонентного адгезива OptiBond™ All-In-One, инструкция

NX3 – светоотверждаемый набор 33682

2 шприца (1,8 г) светоотверждаемого цемента (прозрачный и белый), 10 унидоз OptiBond™ Solo Plus, 2 шприца (по 3 г) пробного геля (прозрачный и белый), 1 бутылочка (5 мл) силанового праймера, смесительные насадки, 10 насадок для шприца с протравливающим гелем, инструкция

Maxcem Elite™ – дополнительные упаковки (Refill)

Цемент двойного отверждения (прозрачный), 1 двойной шприц 5 г, 8 смесительных насадок	33643
Цемент двойного отверждения (белый), 1 двойной шприц 5 г, 8 смесительных насадок	33644
Цемент двойного отверждения (желтый), 1 двойной шприц 5 г, 8 смесительных насадок	33645
Цемент двойного отверждения (для отбеленных зубов), 1 двойной шприц 5 г, 8 смесительных насадок	33646
Цемент двойного отверждения (белый опакочный), 1 двойной шприц 5 г, 8 смесительных насадок	33647
Светоотверждаемый цемент (прозрачный), 1,8 г	33648
Светоотверждаемый цемент (белый), 1,8 г	33649
Светоотверждаемый цемент (желтый), 1,8 г	33650
Светоотверждаемый цемент (для отбеленных зубов), 1,8 г	33651
Светоотверждаемый цемент (белый опакочный), 1,8 г	33652
Пробный гель (прозрачный), 3 г	33656
Пробный гель (белый), 3 г	33657
Пробный гель (желтый), 3 г	33658
Пробный гель (белый опакочный), 3 г	33659
Пробный гель (для отбеленных зубов), 3 г	33660
Силановый праймер (5 мл)	23448



NX3 – пробный набор (Test-me Kit) 33653




NX3 – светоотверждаемый набор 33682

Цветовая стабильность композитных материалов двойного отверждения – прозрачный оттенок

Сразу после внесения



Через 28 недель в воде при 37 °C

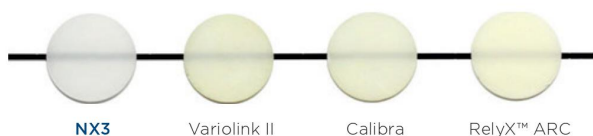

NX3

Variolink II

Calibra

RelyX™ ARC