

 [Перейти в магазин Эль-Дент и заказать:](#) 

OptiClean

OptiClean — первый вращающийся инструмент для удаления временного цемента и других загрязнений с поверхности препарированного зуба. Оптимизированные абразивные частицы эффективно удаляют цемент, не причиняя вреда дентину. OptiClean имеет силиконовую матрицу, обеспечивающую превосходную гибкость и сопротивление динамической нагрузке. Ароматический полимер, из которого изготовлен инструмент, гарантирует точное соответствие его хвостовика сердечнику наконечника. Это самый маленький из существующих инструментов, имеющий эластичное покрытие и диаметр кончика 1.65 мм.

Преимущества:

Простота и эффективность применения:

- Быстрое, легкое и полное удаление временного цемента
- Прекрасный доступ благодаря особенностям дизайна
- Хорошая видимость рабочей поверхности, так как не требуется применения паст или пемзы

Безопасность применения:

- Отсутствие риска механического повреждения препарированного зуба или соседних зубов
- Не повреждает мягкие ткани
- Отвечает требованиям гигиены, предназначен для одноразового применения



OptiClean
Масштаб 2:1

OptiClean Kit

950

Состав: 12 инструментов OptiClean

До настоящего момента эффективной методики удаления временного цемента не существовало. Но теперь у вас есть инструмент OptiClean фирмы Kerr для удаления временного цемента и загрязнений.



Удаление временной реставрации с препарированного зуба.



Удаление временного цемента с помощью инструмента OptiClean фирмы Kerr.



Превосходный результат использования инструмента OptiClean фирмы Kerr.


Техническая информация:



2 мм
Увеличение: 17x



500 мкм
Увеличение: 55x

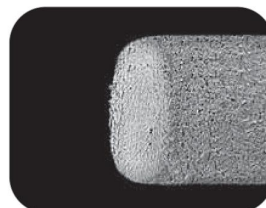

200 мкм
Увеличение: 150x

Снимок получен на электронном микроскопе проф. Р. Lambrechts (Католический университет, Лувен, Бельгия)

Цветовая кодировка:

Инструменты OptiClean повторяют цветовую кодировку дисков OptiDisc — первых прозрачных дисков для финирирования и полировки (Голубой цвет — мелкоабразивные). За дополнительной информацией обращайтесь к Главе 6 Каталога.